



Air Pressure Massage System

Model Nymph 4

Nymph 6

Nymph 8



NL – Nederlands .4

1. INLEIDING 5

2. UITLEG VAN SYMBOLEN 6

3. TERMINOLOGIE 8

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 8

4.1. Contra-indicaties 9

4.2. Algemene veiligheid 9

4.3. Gebruikers 10

4.4. Elektrische veiligheid 11

4.5. Netsnoer 12

4.6. Warmte & ventilatie 13

4.7. Water 14

4.8. Batterijveiligheid
(afstandsbediening) 14

4.9. Restricties 16

4.10. Redelijkerwijs voorzienbaar
verkeerd gebruik 17

4.11. Medische overwegingen 18

5. BEOOGD GEBRUIK 19

6. LEVERINGSOMVANG 19

6.1. Inhoud 19

6.2. Uitpakken 20

6.3. Veiligheid tijdens het uitpakken 20

7. TECHNISCHE GEGEVENS 22

8. PRODUCTONDERDELEN 24

8.1. De bedieningseenheid 24

8.2. Het bedieningspaneel 25

8.3. De afstandsbediening 26

9. MASSAGEPROGRAMMA'S A –

F 26

10. VOORDELEN VAN

COMPRESSIEMASSAGE 28

11. GEBRUIK 29

11.1. Vóór het eerste gebruik 29

11.2. Het systeem aansluiten 29

11.3. Een behandelsessie starten 31

11.4. Een programma selecteren 32

11.5. Kamers in- en uitschakelen 32

11.6. Het programma starten 33

11.7. Na gebruik 34

12. GEBRUIK VAN DE

AFSTANDSBEDIENING 36

13. GEBRUIK VAN DE

MANCHETTEN 37

14. PROBLEEMOPLOSSING 38

15. REINIGING 39

16. ONDERHOUD & SERVICE .. 40

17. OPSLAG 41

18. TRANSPORT 41

19. VERWIJDERING &

RECYCLING 42

19.1. Verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA) ... 42

19.2. France – Triman-markering ... 43

19.3. Duitsland (ElektroG §18(4)) 43

19.4. Verwijdering van batterijen 44

19.5. Verwijdering van
verpakkingsmateriaal 44

20. GARANTIE &

AANSPRAKELIJKHEID 45



EN – English 47

1. INTRODUCTION 48

2. EXPLANATION OF SYMBOLS 49

3. TERMINOLOGY 51

4. SAFETY INSTRUCTIONS 51

- 4.1. Contraindications 52
- 4.2. General safety 52
- 4.3. Users 53
- 4.4. Electrical safety 54
- 4.5. Power cord 55
- 4.6. Heat & ventilation 56
- 4.7. Water 56
- 4.8. Battery safety (remote control) 57
- 4.9. Residual Risks 58
- 4.10. Reasonably foreseeable misuse 59
- 4.11. Medical considerations 60

5. INTENDED USE 61

6. SCOPE OF DELIVERY 61

- 6.1. Contents 61
- 6.2. Unpacking 62
- 6.3. Safety during unpacking 62

7. TECHNICAL DATA 64

8. PRODUCT OVERVIEW 66

- 8.1. The control unit 66
- 8.2. The operating panel 67
- 8.3. The remote control 68

9. MASSAGE PROGRAMS A–F 68

10. BENEFITS OF COMPRESSION MASSAGE 70

11. OPERATION 71

- 11.1. Before first use 71
- 11.2. Connecting the system 71
- 11.3. Starting a treatment session 73
- 11.4. Selecting a program 74

11.5. Enabling and Disabling

Chambers 74

11.6. Starting the program 74

11.7. After Use 75

12. USING THE REMOTE CONTROL 77

13. USING THE CUFFS 78

14. TROUBLESHOOTING 79

15. CLEANING 80

16. MAINTENANCE & SERVICE 81

17. STORAGE 82

18. TRANSPORT 82

19. DISPOSAL & RECYCLING ... 83

- 19.1. Disposal of electrical and electronic equipment (WEEE) 83
- 19.2. France – Triman marking 84
- 19.3. Germany (ElektroG §18(4)) 84
- 19.4. Disposal of the batteries 85
- 19.5. Disposal of packing material. 85

20. WARRANTY & LIABILITY .. 86

DE – DEUTSCH ...88

1. EINLEITUNG 89

2. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE 90

3. TERMINOLOGIE92

4. SICHERHEITSHINWEISE 92

4.1. Kontraindikationen93

4.2. Allgemeine Sicherheit 93

4.3. Benutzer95

4.4. Elektrische Sicherheit 95

4.5. Netzkabel96

4.6. Wärme & Belüftung 97

4.7. Wasser98

4.8. Batteriesicherheit

(Fernbedienung) 99

4.9. Restrisiken 100

4.10. Vernünftigerweise

vorhersehbarer Fehlgebrauch101

4.11. Medizinische Hinweise 102

5. BESTIMMUNGSGEMÄSSER

GEBRAUCH103

6. LIEFERUMFANG103

6.1. Inhalt103

6.2. Auspacken 104

6.3. Sicherheit beim Auspacken 104

7. TECHNISCHE DATEN 106

8. PRODUKTTEILE 108

8.1. Die Steuereinheit 108

8.2. Das Bedienfeld 109

8.3. Die Fernbedienung110

9. MASSAGEPROGRAMME A–F110

10. VORTEILE DER

KOMPRESSIONSMASSAGE 112

11. BEDIENUNG113

11.1. Vor der ersten Verwendung113

11.2. Anschließen des Systems 113

11.3. Starten einer

Behandlungssitzung115

11.4. Auswahl eines Programms116

11.5. Aktivieren und Deaktivieren von

Kammern116

11.6. Starten des Programms117

11.7. Nach der Verwendung 118

12. VERWENDUNG DER

FERNBEDIENUNG 120

13. VERWENDUNG DER

MANSCHETTEN121

14. FEHLERBEHEBUNG122

15. REINIGUNG123

16. WARTUNG & SERVICE 124

17. LAGERUNG 125

18. TRANSPORT125

19. ENTSORGUNG & RECYCLING126

19.1. Entsorgung von Elektro- und

Elektronik-Altgeräten (EEE) 126

19.2. Frankreich – Triman-

Kennzeichnung 127

19.3. Deutschland (ElektroG §18(4))127

19.4. Entsorgung von Batterien128

19.5. Entsorgung von

Verpackungsmaterial128

20. GARANTIE & HAFTUNG ... 129

FR – Français ...131

1. INTRODUCTION 132

2. EXPLICATION DES SYMBOLES133

3. TERMINOLOGIE 135

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.135

4.1. Contre-indications 136

4.2. Sécurité générale 136

4.3. Utilisateurs138

4.4. Sécurité électrique 138

4.5. Câble d'alimentation139

4.6. Chaleur & ventilation140

4.7. Eau141

4.8. Sécurité des batteries
(télécommande)142

4.9. Risques résiduels143

4.10. Mauvaise utilisation
raisonnablement prévisible144

4.11. Considérations médicales 145

5. UTILISATION PRÉVUE 146

6. CONTENU DE LA LIVRAISON146

6.1. Contenu 146

6.2. Déballage147

6.3. Sécurité lors du déballage147

7. CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES149

8. PIÈCES DU PRODUIT151

8.1. L'unité de commande151

8.2. Le panneau de commande 152

8.3. La télécommande153

9. PROGRAMMES DE MASSAGE

A–F 153

10. BIENFAITS DU MASSAGE

PAR COMPRESSION 155

11. UTILISATION 156

11.1. Avant la première utilisation... 156

11.2. Raccordement du système 156

11.3. Démarrage d'une séance de
traitement158

11.4. Sélection d'un programme159

11.5. Activation et désactivation des
chambres 159

11.6. Démarrage du programme... 160

11.7. Après utilisation161

12. UTILISATION DE LA

TÉLÉCOMMANDE 163

13. UTILISATION DES

MANCHONS164

14. DÉPANNAGE165

15. NETTOYAGE166

16. ENTRETIEN & SERVICE167

17. STOCKAGE168

18. TRANSPORT168

19. ÉLIMINATION & RECYCLAGE169

19.1. Élimination des équipements
électriques et électroniques (DEEE)169

19.2. France – Marquage Triman...170

19.3. Allemagne (ElektroG §18(4)) .170

19.4. Élimination des batteries171

19.5. Élimination des matériaux
d'emballage 171

20. GARANTIE &

RESPONSABILITÉ172

Luchtdrukmassagesysteem

Model Nymph 4-6-8



Deze handleiding hoort bij de Nymph 4-6-8 en bevat belangrijke informatie over installatie, veiligheid, verwijdering en gebruik. Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies om een veilig en correct gebruik van het product te garanderen.

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik, zelfs als je vertrouwd bent met het product. Zorg ervoor dat deze handleiding wordt meegeleverd wanneer je het product aan derden doorgeeft.

De afbeeldingen in de handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en kunnen enigszins afwijken van het product. In dat geval is **NYMPH** niet verplicht de handleiding bij te werken of te herzien. Gebruik het daadwerkelijke product als referentie.



BELANGRIJK – LEES DIT VOOR GEBRUIK

Dit apparaat is een medisch hulpmiddel van klasse IIa dat bedoeld is voor intermitterende pneumatische compressietherapie.

Gebruik dit apparaat uitsluitend overeenkomstig het beoogde gebruik en neem alle contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding in acht.

NYMPH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of verlies als gevolg van gebruik in strijd met deze handleiding, het niet naleven van contra-indicaties, waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen, of gebruik buiten het beoogde doel.

1. INLEIDING

Bedankt dat je voor een product van **NYPH** hebt gekozen. Deze handleiding bevat de informatie die nodig is voor een veilig en correct gebruik van het product.

Dit product draagt de CE-markering en voldoet aan de toepasselijke Europese wettelijke vereisten.

	CE-markering Dit product draagt de CE-markering, die aangeeft dat het voldoet aan de relevante Europese richtlijnen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten van de EU.
	RoHS-conformiteit Dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn (2011/65/EU), die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt. Deze conformiteit garandeert dat de niveaus van stoffen zoals lood, kwik en cadmium onder de maximaal toegestane grenswaarden blijven.
EMC	EMC-conformiteit Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn (2014/30/EU) inzake elektromagnetische compatibiliteit. Deze richtlijn waarborgt dat het apparaat correct functioneert in zijn omgeving zonder elektromagnetische storingen te veroorzaken of hierdoor te worden beïnvloed.
MDR	MDR-conformiteit Dit product voldoet aan de Verordening medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 (MDR), waarin eisen worden vastgesteld voor de veiligheid, prestaties en klinische evaluatie van medische hulpmiddelen die op de Europese markt worden gebracht. Deze conformiteit toont aan dat het product voldoet aan de essentiële eisen voor medische hulpmiddelen volgens de EU-wetgeving.

De volledige EU-conformiteitsverklaring en alle ondersteunende testrapporten zijn op verzoek verkrijgbaar.

Als je vragen, opmerkingen of problemen hebt bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op.

Wij hopen dat je veel plezier beleeft aan je aankoop!

2. UITLEG VAN SYMBOLEN

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

	OPMERKING: Geeft belangrijke informatie of nuttige tips voor het gebruik van het product.
	GEVAAR: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, zal leiden tot overlijden of ernstig letsel.
	WAARSCHUWING: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
	LET OP: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht letsel of materiële schade.

De veiligheidssymbolen vervangen de schriftelijke veiligheidsinstructies niet. Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door en volg deze nauwkeurig op.

Symbolen voor medische hulpmiddelen:

Symbool	Titel van het symbool	Betekenis
	Serienummer (SN)	Geeft het serienummer van de fabrikant aan voor productidentificatie.

	Batchcode (LOT)	Geeft de batchcode of het lotnummer van de fabrikant aan.
	Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie (EU REP)	Geeft de gemachtigde vertegenwoordiger binnen de Europese Unie aan.
	Productiedatum	Geeft de datum aan waarop het medisch hulpmiddel is vervaardigd.
	CE-markering met nummer van de aangemelde instantie	Geeft conformiteit met de toepasselijke EU-wetgeving aan. Het nummer identificeert de aangemelde instantie.
	Toegepast onderdeel van type BF	Geeft een toegepast onderdeel van type BF aan dat bescherming biedt tegen elektrische schokken.
	Symbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)	Geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Voer het product af overeenkomstig de plaatselijke voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis	Geeft aan dat het apparaat uitsluitend bedoeld is voor gebruik binnenshuis.
	Klasse II-apparatuur	Geeft Klasse II-apparatuur met dubbele of versterkte isolatie aan ter bescherming tegen elektrische schokken.
	IP21-beschermingsgraad	Geeft bescherming aan tegen vaste vreemde voorwerpen groter dan 12,5 mm en bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels.
	Fabrikant	Geeft de juridische fabrikant van het product aan.

3. TERMINOLOGIE



OPMERKING:

In deze handleiding verwijst de term “Nymph 4-6-8” gezamenlijk naar de modellen Nymph 4, Nymph 6 en Nymph 8. Tenzij anders vermeld, verwijst deze term naar het volledige product, inclusief de bedieningseenheid (apparaat) en de meegeleverde accessoires zoals de afstandsbediening en de manchet met aansluitslang. Wanneer afzonderlijke onderdelen worden beschreven, worden deze met hun specifieke benaming aangeduid.

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Volg de instructies en veiligheidsinformatie in deze handleiding zorgvuldig op. Het niet naleven hiervan kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

Schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet opvolgen van deze instructies valt niet onder de garantie.

Elektrische apparaten en batterijen kunnen gevaren opleveren wanneer zij onjuist worden gebruikt. Deze gevaren kunnen onder meer bestaan uit letsel, brand, elektrische schokken of materiële schade. Behandel het apparaat altijd met zorg en houd het buiten het bereik van kinderen.

Deze handleiding bevat de informatie die nodig is voor een veilig gebruik van het apparaat. Niet alle mogelijke situaties of gevaren kunnen echter worden beschreven. Gebruik het apparaat altijd met de nodige voorzichtigheid en volg de verstrekte instructies op.

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kunnen restrisico's blijven bestaan. Volg alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding op om het risico op letsel, schade of storingen te beperken.

Als je vragen hebt die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact met ons op.

4.1. Contra-indicaties

Gebruik het apparaat niet:

- op open wonden, breuken of ernstig beschadigde lichaamsdelen;
- op lichaamsdelen die zijn aangetast door een acute ontsteking of infectie;
- als je acute veneuze trombose of diepe tromboflebitis hebt;
- als je lijdt aan longoedeem;
- als je ernstige perifere arteriële occlusieve aandoeningen (PAOD) hebt.

Raadpleeg vóór gebruik een arts indien je:

- zwanger bent;
- een pacemaker of een ander geïmplantiseerd elektronisch apparaat hebt;
- lijdt aan een hartaandoening, circulatiestoornis of ongecontroleerde hoge bloeddruk;
- diabetes hebt met verminderd gevoel of perifere neuropathie;
- een kankerbehandeling ondergaat;
- antistollingsmedicatie gebruikt;
- een andere medische aandoening hebt die door compressiemassage kan worden beïnvloed.

4.2. Algemene veiligheid

- Gebruik de Nymph 4-6-8 niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De Nymph 4-6-8 is ontworpen en bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparatuur niet is toegestaan.
- De Nymph 4-6-8 is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Schokken, stoten of vallen, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Nymph 4-6-8 niet op een onstabiele ondergrond. Hierdoor kan het apparaat vallen en defect raken.

- Knijp de manchet niet samen.
- Stel de Nymph 4-6-8 niet bloot aan overmatige trillingen, drukkrachten, stoten of andere mechanische belasting.
- Ga niet op de manchet zitten.
- Het apparaat moet correct en veilig worden aangesloten. Volg de instructies om mogelijke schade of letsel te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend accessoires of hulpstukken die door de fabrikant voor dit apparaat zijn geleverd of aanbevolen. Onjuiste accessoires of hulpstukken kunnen een risico vormen voor de gebruiker en de Nymph 4-6-8 beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in openingen.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het bedienen van de knoppen van de Nymph 4-6-8.
- Raak de manchet niet aan met scherpe voorwerpen.
- Oefen geen overmatige kracht uit op het scherm en raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.
- Plaats nooit voorwerpen op de Nymph 4-6-8.
- Laat de ingeschakelde Nymph 4-6-8 niet onbeheerd achter. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van jonge kinderen wordt gebruikt.
- Gebruik de Nymph 4-6-8 niet in de buurt van sterke magnetische velden, zoals motoren, transformatoren, mobiele telefoons enz.
- Gebruik de Nymph 4-6-8 niet in een stoffige omgeving.
- Als het veilig gebruik van de Nymph 4-6-8 niet langer mogelijk is, stel het apparaat dan buiten gebruik en voorkom onbedoeld gebruik. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is;
 - niet meer correct functioneert;
 - langdurig onder ongunstige omgevingsomstandigheden is opgeslagen;
 - of is blootgesteld aan zware transportbelasting.

4.3. Gebruikers

- De Nymph 4-6-8 is geen speelgoed. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Het apparaat mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt. De manchetten zijn uitsluitend ontworpen voor volwassen gebruikers. Gebruik door kinderen kan letsel veroorzaken.

- Laat personen die niet vertrouwd zijn met de bediening van de Nymph 4-6-8 of met deze instructies het apparaat niet gebruiken.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door personen die deze instructies begrijpen en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Gebruik de Nymph 4-6-8 niet wanneer je moe bent, afgeleid bent of onder invloed bent van alcohol of medicatie.

4.4. Elektrische veiligheid

- Je mag de Nymph 4-6-8 niet wijzigen, zelf repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van schade vertoont.
- Gebruik geen andere netstekker voor dit apparaat. Dit kan storingen en/of schade veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het stopcontact de juiste netspanning levert om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de Nymph 4-6-8 bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Om het energieverbruik en mogelijke veiligheidsrisico's te verminderen, dien je altijd de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, tijdens reiniging of onderhoud, of wanneer een storing optreedt. Het apparaat blijft aangesloten op het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit.
- Schakel de Nymph 4-6-8 niet in of uit door de stekker in het stopcontact te steken of eruit te trekken. Gebruik altijd de AAN/UIT-knop.
- Forceer de netstekker van het netsnoer nooit in een stopcontact. Als de stekker niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik ervan.

Controleer altijd of de netstekker van het apparaat correct in het stopcontact is aangesloten.

- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als er rook ontstaat of als er ongebruikelijke geluiden of geuren worden waargenomen, schakel de Nymph 4-6-8 dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. In deze gevallen mag de Nymph 4-6-8 niet worden gebruikt totdat deze is gecontroleerd door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Adem nooit rook van een mogelijke apparaatbrand in. Als je toch rook hebt ingeademd, raadpleeg dan een arts. Het inademen van rook kan schadelijk zijn.
- Koppel in geval van brand de stroomvoorziening los indien dit veilig kan worden gedaan. Gebruik geschikte blusmiddelen en houd een veilige afstand tot het apparaat.
- Trek om veiligheidsredenen altijd de stekker uit het stopcontact tijdens onweer.

4.5. Netsnoer

- Rol het netsnoer vóór gebruik volledig uit.
- Wijzig het netsnoer niet.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het netsnoer nooit als er tekenen van beschadiging zichtbaar zijn.
- Om risico's te voorkomen, mag een beschadigd netsnoer uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Raak het netsnoer niet aan als het beschadigd is. Een beschadigd netsnoer kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken. Schakel eerst het betreffende stopcontact spanningsloos (bijvoorbeeld via de betreffende stroomonderbreker) en trek vervolgens voorzichtig de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer beschadigd is.
- Trek de netstekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Trek de stekker altijd aan de daarvoor bestemde grip uit het stopcontact.
- Draag of verplaats de Nymph 4-6-8 niet aan het netsnoer.
- Wikkel het netsnoer nooit rond het apparaat. Hierdoor zal het snoer voortijdig slijten en breken.
- Zorg ervoor dat niemand over het netsnoer kan struikelen.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Het netsnoer mag niet worden geknikt, bekneeld raken of worden verdraaid.

- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of aan mechanische belasting wordt blootgesteld.
- Leg nooit een knoop in het netsnoer.
- Draai het netsnoer regelmatig recht als het door gebruik verdraaid raakt.
- Vermijd overmatige thermische belasting van het netsnoer door extreme hitte of kou.
- Wanneer je een verlengsnoer gebruikt dat op het stopcontact is aangesloten, zorg er dan voor dat het totale elektrische vermogen van de aangesloten apparaten de nominale capaciteit niet overschrijdt.
- Kinderen kunnen tijdens het spelen verstrikt raken in snoeren, wat wurgingsgevaar kan veroorzaken. Snoeren zijn geen speelgoed.

4.6. Warmte & ventilatie

- De Nymph 4-6-8 kan tijdens gebruik warm worden. Dit is normaal.
- Dek het apparaat of de ventilatieopeningen niet af terwijl het in gebruik is, aangezien hierdoor de Nymph 4-6-8 oververhit kan raken. Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg tijdens het gebruik voor voldoende ventilatie rondom de Nymph 4-6-8.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en plaatsen waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (zoals kachels of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuur (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De Nymph 4-6-8 en de afstandsbediening zijn ontworpen om optimaal te functioneren bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en om te worden opgeslagen bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Nymph 4-6-8 en de afstandsbediening kunnen beschadigd raken en hun levensduur verkorten als de apparaten buiten dit temperatuurbereik worden gebruikt of opgeslagen. Stel de apparaten niet bloot aan plotselinge temperatuurschommelingen. Bewaar de apparaten niet gedurende langere tijd in een hete auto of in direct zonlicht. Plaats de apparaten niet in de buurt van een raam (vooral in de zomer).

4.7. Water

- Dit apparaat is niet waterdicht. Blootstelling aan water kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of permanente schade.
- Gebruik de Nymph 4-6-8 nooit met vochtige handen. Vocht kan elektrische schokken of kortsluiting veroorzaken.
- Raak de stekker nooit met vochtige handen aan wanneer je deze in het stopcontact steekt of eruit trekt. Vocht kan elektrische schokken of kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik de Nymph 4-6-8 niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een andere met water gevulde container, zoals een gootsteen.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving. Dompel het apparaat, het netsnoer, de stekker, de manchet of de afstandsbediening niet onder in vloeistoffen. Giet nooit vloeistoffen over of in de buurt van de Nymph 4-6-8. Er bestaat een risico op elektrische schokken of kortsluiting. Als er toch vloeistof in de behuizing terechtkomt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en schakel vervolgens de Nymph 4-6-8 uit.
- Raak het apparaat niet aan als het in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal het apparaat pas daarna uit het water.
- Zorg ervoor dat de Nymph 4-6-8 op een droge ondergrond wordt geplaatst.

4.8. Batterijveiligheid (afstandsbediening)

- Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. Door verhitting van het apparaat kan de batterij extra worden verhit, waardoor deze kan barsten of ontploffen.
- Probeer de batterij niet te doorboren, te wijzigen of te demonteren, aangezien dit brand, explosie, lekkage van chemicaliën of ernstig letsel kan veroorzaken.
- Gebruik geen batterij die beschadigd of vervormd is.
- Gebruik de afstandsbediening niet als de batterij een geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak gelekte stoffen niet aan en adem geen dampen in die door de batterij worden afgegeven. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen chemische brandwonden aan de huid veroorzaken. Draag daarom geschikte handschoenen.
- De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en steek er geen voorwerpen in.
- Gooi de batterij nooit in het vuur.

- Zorg ervoor dat je handen, het product en de batterij droog zijn wanneer je de batterij hanteert.
- Veroorzaak geen kortsluiting. Kortsluiting kan ertoe leiden dat de batterij ontploft of gaat lekken.
- Voorkom na het verwijderen van de batterij onbedoelde kortsluiting door de batterijpolen niet in contact te laten komen met metalen voorwerpen (bijvoorbeeld munten, haarspelden of ringen). Wikkel de batterij niet in aluminiumfolie. Plak tape over de batterijpolen of doe batterijen afzonderlijk in een plastic zak voordat je ze weggooit.
- Laat de batterij niet vallen en voorkom stoten.
- Raadpleeg in geval van inslikken van een batterij onmiddellijk een arts of neem contact op met je plaatselijke antigifcentrum voor advies over de behandeling.
- Reinig de batterijcontacten en de contacten van het apparaat voordat je de batterij plaatst.
- Controleer of de batterij correct is geplaatst met de juiste polariteit (+ en -).
- Controleer de afstandsbediening en zorg ervoor dat het batterijvak goed is afgesloten, bijvoorbeeld doordat de schroef of een andere mechanische bevestiging goed is vastgedraaid. Gebruik de afstandsbediening niet meer en houd deze buiten het bereik van kinderen als het batterijvak niet goed sluit.
- Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde formaat en hetzelfde type.
- Gebruik de batterij binnen de aanbevolen gebruikspanperiode.
- Voorkom dat kinderen of dieren in contact komen met de batterij.

4.9. Restrisico's

Ondanks de implementatie van alle veiligheidsmaatregelen kunnen bij het gebruik van de Nymph 4-6-8 bepaalde restrisico's blijven bestaan.

- Tijdelijk ongemak, huidirritatie, roodheid, gevoelloosheid of druksporen als gevolg van langdurig gebruik of te hoge drukinstellingen.
- Ongemak of letsel als gevolg van een onjuiste plaatsing of verkeerde pasvorm van de manchetten.
- Verminderde bloedcirculatie, pijn of lichamelijk ongemak als gevolg van een te lange behandelingsduur of ongeschikte drukinstellingen.
- Elektrische schokken, oververhitting of brandgevaar als gevolg van beschadigde kabels, beschadigde onderdelen, onjuiste reparaties, blootstelling aan vloeistoffen of verkeerd gebruik van het apparaat.
- Struikelgevaar veroorzaakt door slangen, kabels of aangesloten manchetten tijdens gebruik of opslag.
- Schade aan manchetten, slangen, aansluitingen of de bedieningseenheid veroorzaakt door scherpe voorwerpen, overmatig buigen, trekken, draaien, samendrukken of onjuiste opslag.
- Risico's die verband houden met gebruik door personen met medische aandoeningen waarvoor het gebruik wordt afgeraden, waaronder circulatiestoornissen, trombose, ernstige hoge bloeddruk, geïmplanteerde medische apparaten of andere aandoeningen die in deze handleiding worden vermeld.
- Risico's die verband houden met gebruik door kinderen, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen die de instructies niet kunnen begrijpen of ongemak niet kunnen communiceren.

Volg altijd alle instructies en veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding om deze risico's tot een minimum te beperken.

4.10. Redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik

De volgende toepassingen worden beschouwd als redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik en moeten worden vermeden:

- Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan intermitterende pneumatische compressietherapie met gebruik van de meegeleverde compressiemanchetten.
- Het apparaat gebruiken bij baby's, kinderen, huisdieren of personen die het apparaat niet veilig kunnen bedienen of ongemak niet kunnen communiceren.
- Het apparaat gebruiken tijdens het slapen, bij bewusteloosheid of onder invloed van alcohol, medicatie of andere middelen die het bewustzijn of het gevoel kunnen verminderen.
- Het apparaat gebruiken met beschadigde manchetten, slangen, aansluitingen, kabels, stekkers of andere onderdelen.
- Het apparaat gebruiken in vochtige omgevingen, in de buurt van water of met natte handen.
- De bedieningseenheid afdekken tijdens gebruik of de ventilatieopeningen blokkeren.
- Aan slangen of netsnoeren trekken, deze verdraaien, scherp buigen, samendrukken of erop stappen.
- De manchetten of slangen loskoppelen terwijl het apparaat in werking is of onder druk staat.
- Drukinstellingen, behandelingsduur of programma's gebruiken die pijn, gevoelloosheid of aanzienlijk ongemak veroorzaken.
- Het apparaat gebruiken ondanks bekende contra-indicaties, medische aandoeningen, letsels of medisch advies om geen compressietherapieapparaten te gebruiken.
- Proberen het apparaat of de accessoires te openen, te wijzigen, te repareren of te demonteren.
- Vreemde voorwerpen in de bedieningseenheid, aansluitingen, ventilatieopeningen of andere openingen van het apparaat steken.
- Niet-goedgekeurde accessoires, reserveonderdelen, netsnoeren of hulpstukken gebruiken.
- Staan, wandelen of zich verplaatsen terwijl men is aangesloten op de compressiemanchetten.
- Het product buitenshuis gebruiken of blootstellen aan direct zonlicht, overmatige hitte, open vuur of temperaturen onder het vriespunt.

Dergelijk verkeerd gebruik kan leiden tot letsel, brandgevaar of schade aan het apparaat.

4.11. Medische overwegingen

Dit product is een medisch hulpmiddel van klasse IIa, bedoeld voor intermitterende pneumatische compressietherapie. Het mag uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het beoogde gebruik en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, een medische diagnose, medische controle of een medische behandeling.

Raadpleeg een arts voordat je dit apparaat gebruikt indien je:

- lijdt aan circulatiestoornissen, vaatziekten, spataderen, diabetes, ernstige hoge bloeddruk of een hartaandoening;
- geïmplanteerde medische hulpmiddelen hebt, zoals een pacemaker;
- zwanger bent of recent een operatie hebt ondergaan;
- last hebt van chronische pijn, gevoelloosheid, verminderde gevoeligheid of huidaandoeningen;
- een medische behandeling ondergaat of andere medische zorgen hebt.

Gebruik het apparaat niet op gewonde, gezwollen, geïnfecteerde, ontstoken of gevoelige lichaamsdelen, tenzij dit is goedgekeurd door een gekwalificeerde zorgverlener.

Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en vraag medisch advies als je tijdens of na gebruik pijn, duizeligheid, gevoelloosheid, verkleuring van de huid, ongebruikelijke zwelling, ademhalingsproblemen of een andere abnormale lichamelijke reactie ervaart.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om te bepalen of dit product geschikt is voor hun individuele fysieke conditie.

5. BEOOGD GEBRUIK

De Nymph 4-6-8 is bedoeld voor intermitterende pneumatische compressietherapie met behulp van opblaasbare compressiemanchetten voor de benen, armen, taille of het onderlichaam. Het apparaat zorgt voor sequentiële luchtdrukcompressie.

Het apparaat is bedoeld ter ondersteuning van de bloedcirculatie en voor tijdelijke verlichting van lichte spierongemakken en vermoeidheid.



WAARSCHUWING:

Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik buiten het beoogde gebruik of in strijd met de instructies kan leiden tot verminderde prestaties, schade aan het apparaat of veiligheidsrisico's.

6. LEVERINGSOMVANG

6.1. Inhoud

De volgende onderdelen zijn inbegrepen in de leveringsomvang:

- 1x Nymph 4-6-8
- 1x Afstandsbediening (zonder batterij)
- 1x Luchtslangset
- 1x Manchet
- 1x Draagtas
- 1x Schouderriem voor draagtas
- 1x Handleiding



OPMERKING:

Vanwege transport- en verpakkingsvereisten kunnen sommige accessoires gedemonteerd worden geleverd. Volg de montage-instructies zorgvuldig op.

6.2. Uitpakken

Verwijder alle onderdelen uit de verpakking en controleer deze op beschadigingen. Gebruik de Nymph 4-6-8 niet als er schade wordt vastgesteld. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering volledig is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Neem contact met ons op als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is.

Verwijder vóór gebruik alle verpakkingsmaterialen.



OPMERKING:

Dit apparaat is verpakt om het tijdens transport te beschermen. Bewaar de originele doos en andere verpakkingsmaterialen op een veilige plaats om schade aan het apparaat te voorkomen als je het in de toekomst moet vervoeren. Als je de verpakking weggooit, zorg er dan voor dat deze op de juiste wijze wordt gerecycled.

6.3. Veiligheid tijdens het uitpakken

Laat verpakkingsmaterialen en accessoires tijdens het uitpakken niet achteloos rondslingeren. Ze kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.



WAARSCHUWING: Verstikkingsgevaar

Houd plastic zakken en folie buiten het bereik van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen. Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven kleven en de ademhaling belemmeren.





WAARSCHUWING: Wurgingsgevaar

Snoeren en slangen langer dan 22 cm kunnen gevaarlijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen.

Kinderen kunnen tijdens het spelen verstrikt raken in het netsnoer en de slangen. Laat de accessoires tijdens het uitpakken niet rondslingeren.



WAARSCHUWING: Knoopcelbatterij.

De afstandsbediening wordt geleverd zonder de benodigde knoopcelbatterij. Wees voorzichtig bij het uitpakken en/of plaatsen van batterijen. Knoopcelbatterijen zijn klein en zeer krachtig. Voor kinderen kunnen ze eruitzien als snoepjes of munten en ze kunnen gemakkelijk worden ingeslikt.

- Houd nieuwe en gebruikte knoopcelbatterijen buiten het bereik van kinderen.
- Een ingeslikte knoopcelbatterij kan al binnen twee uur inwendige chemische brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Zoek onmiddellijk medische hulp als je vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsopening is terechtgekomen.
- Gooi gebruikte knoopcelbatterijen onmiddellijk weg.



7. TECHNISCHE GEGEVENS



OPMERKING:

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Product	Luchtdrukmassagesysteem		
Model	Nymph 4	Nymph 6	Nymph 8
Merk	Nymph		
Kleur	Zwart		
Materiaal	Hard kunststof		
Aantal luchtkamers	4	6	8
Aantal programma's	6 (A - F)		
Vermogen	65 W		
Ingangsspanning	220 - 240 V		
Frequentie	50/60 Hz		
Beschermingsklasse (apparaat)	Klasse I 		
Zekering	T3.15A, 5 × 20 mm		
Lengte netsnoer	1,5 m		
Timerinstelling	1 - 90 min		
Pompcapaciteit	20 - 25 l/min		
Druk	30 - 240 mmHg (stappen van 30 mmHg)		
Bedrijfstemperatuur	10 - 40 °C		
Opslagtemperatuur	10 - 40 °C		
Bedrijfsvochtigheid	30 - 85 % RH		
Opslagvochtigheid	30 - 85 % RH		

Voeding afstandsbediening	CR2032 (knoopcelbatterij)
IP-classificatie	IP 21
Gewicht	2,3 kg
Afmetingen	300 × 237 × 126 mm

Productidentificatie:

Merk	Nymph		
Model	Nymph 4	Nymph 6	Nymph 8
OEM-fabrikant	Xiamen Weiyou Intelligent Technology Co., Ltd., Xiamen, China		
OEM-model	VU-NIPC02	VU-IPC04	VU-IPC06



OPMERKING:

Het productidentificatie- en typeplaatje bevindt zich op het apparaat. Dit label bevat belangrijke informatie, zoals het modelnummer en de elektrische specificaties.

MDR-conformiteit:

Dit product is een medisch hulpmiddel van klasse IIa en voldoet aan de Verordening medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 (MDR), waarin eisen worden vastgesteld voor de veiligheid, prestaties en klinische evaluatie van medische hulpmiddelen die op de Europese markt worden gebracht. Deze conformiteit toont aan dat het product voldoet aan de essentiële eisen voor medische hulpmiddelen volgens de EU-wetgeving.

Notified Body (aangemelde instantie):

Notified Body 0598 – SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Tel.: +358 9 696 361

www.sgs.fi

Business ID 0634247-4

Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie (EU REP):




SUNGO Cert GmbH

Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf, Duitsland

8. PRODUCTONDERDELEN


8.1. De bedieningseenheid

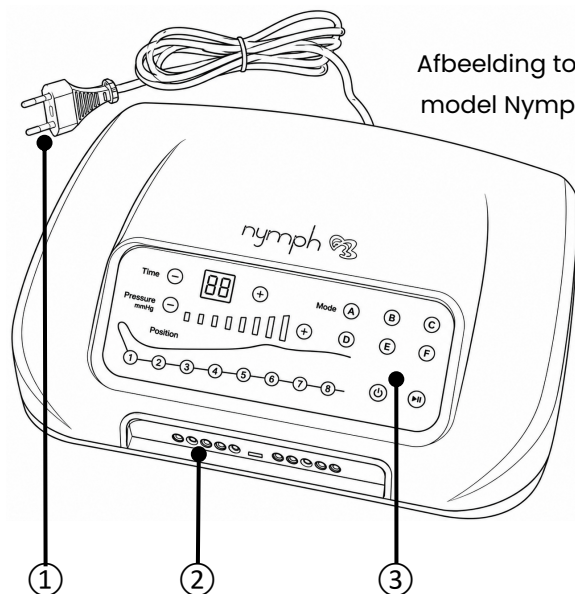

Afbeelding toont:
model Nymph 8.

- ① Netsnoer
- ② Aansluiting voor meerpoortsconnector
- ③ Bedieningspaneel

8.2. Het bedieningspaneel

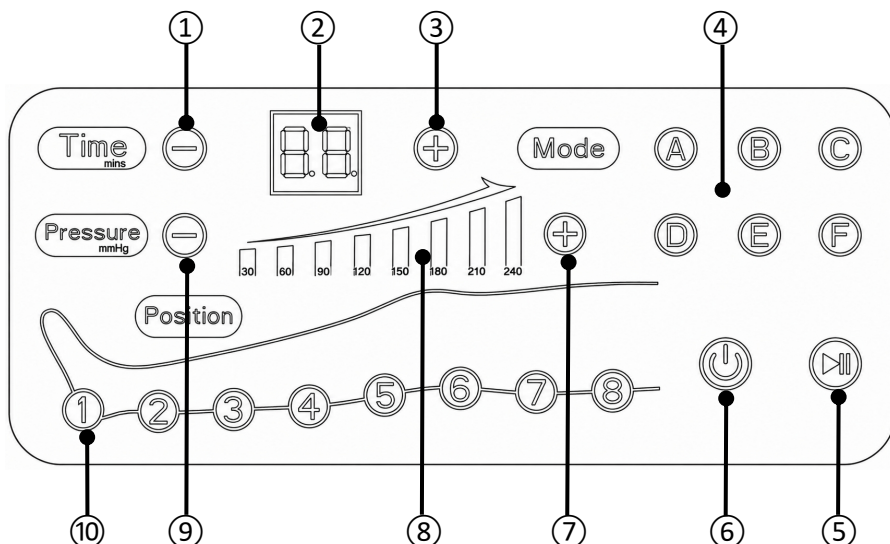


Afbeelding toont: model Nymph 8.

- ① Knop voor het verlagen van de tijd
- ② Indicator voor resterende tijd (1 - 90 minuten)
- ③ Knop voor het verhogen van de tijd
- ④ Programmaknoppen (A, B, C, D, E, F)
- ⑤ Start-/pauzeknop
- ⑥ AAN/UIT-knop
- ⑦ Knop voor het verhogen van de druk
- ⑧ Drukindicator (8 niveaus: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 mmHg)
- ⑨ Knop voor het verlagen van de druk
- ⑩ Positie-/kamerknoppen
 - Nymph 4: 1, 2, 3, 4
 - Nymph 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Nymph 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

8.3. De afstandsbediening

- ① Knop voor het verlagen van de tijd
- ② Knop voor het verhogen van de tijd
- ③ Knop voor het verlagen van de druk
- ④ Knop voor het verhogen van de druk
- ⑤ Positie-/kamerknoppen
 - Nymph 4: 1, 2, 3, 4
 - Nymph 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Nymph 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- ⑥ Modusknop
- ⑦ Start-/pauzeknop


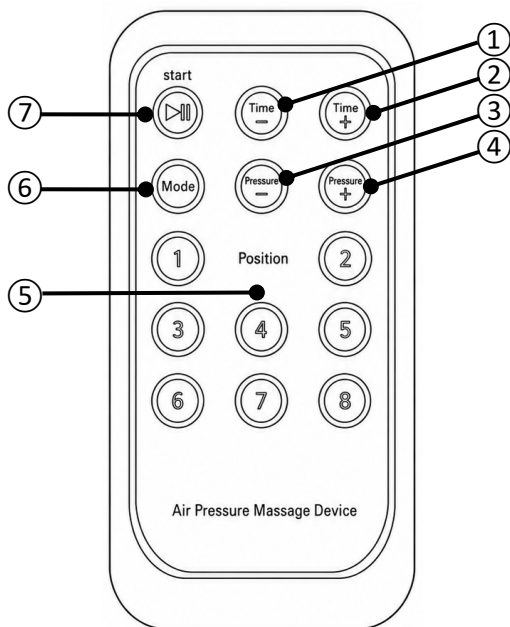


Afbeelding toont: model Nymph 8.

9. MASSAGEPROGRAMMA'S A-F

De luchtkamers in de beenmanchetten worden opgeblazen en leeggelaten volgens het geselecteerde programma. Hierdoor ontstaat een opeenvolgende compressiemassage die is ontworpen om comfort en ontspanning te bevorderen. De behandeltime, het drukniveau en aanvullende instellingen kunnen op elk moment tijdens de sessie worden aangepast.

- A** Normaal
- B** Sequentiële compressie
- C** Dubbele golf
- D** Volledige compressie
- E** Sequentiële compressie + dubbele golf
- F** Normaal + dubbele golf + volledige compressie

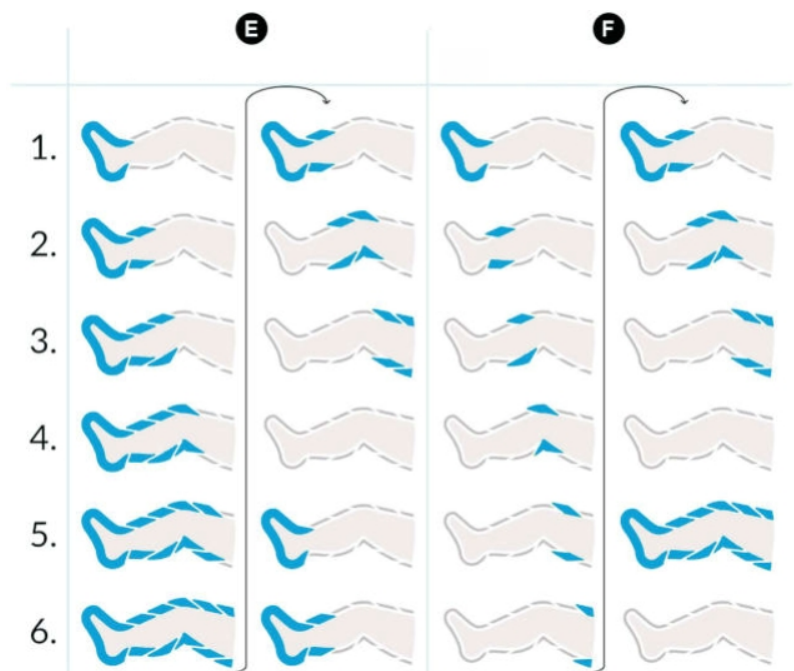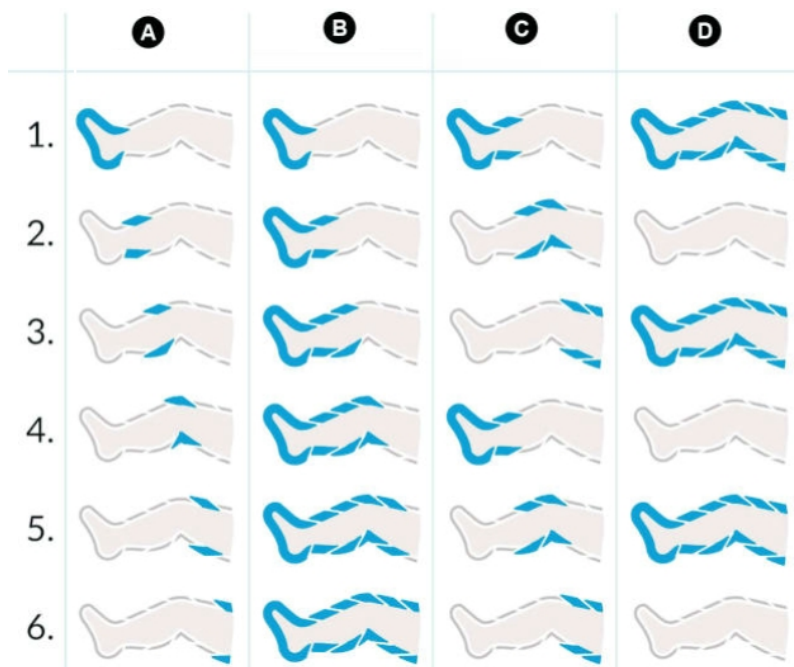

10. VOORDELEN VAN COMPRESSIEMASSAGE

Het apparaat biedt een opeenvolgende compressiemassage met behulp van meerdere luchtkamers die volgens het geselecteerde programma worden opgeblazen en leeggelaten. Hierdoor ontstaat een zachte drukmassage die is ontworpen om comfort en ontspanning te bevorderen.

Mogelijke voordelen van regelmatig gebruik zijn:

- Verlichting van het gevoel van vermoeide of zware benen na langdurig staan, zitten of dagelijkse activiteiten.
- Meer comfort en ontspanning na lichamelijke activiteit of lichaamsbeweging.
- Een rustgevende massage-ervaring voor de benen of armen.
- Tijdelijke verlichting van spierspanning en lichamelijke vermoeidheid.
- Meer comfort tijdens rust- en herstelperiodes.



OPMERKINGEN:

- De hierboven beschreven voordelen zijn bedoeld ter ondersteuning van compressietherapie en individuele ervaringen kunnen verschillen.
- Dit medisch hulpmiddel is bedoeld voor intermitterende pneumatische compressietherapie zoals beschreven in deze handleiding. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, een diagnose of een behandeling.


11. GEBRUIK

11.1. Vóór het eerste gebruik



EERSTE GEBRUIK:

Open het filterdeksel en verwijder de transportschroef door deze linksom te draaien. De schroef beschermt de bedieningseenheid tijdens transport en mag niet opnieuw worden gemonteerd.

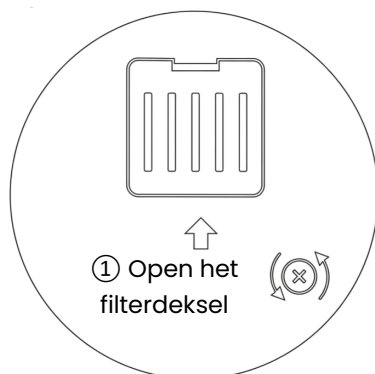


② Verwijder de transportschroef door deze linksom te draaien

Als de afstandsbediening is voorzien van een batterij-isolatiestrip, verwijder deze dan vóór het eerste gebruik. Als de batterij niet is geplaatst (bijvoorbeeld vanwege transportvoorschriften), plaats dan een CR2032-batterij in het batterijvak.

11.2. Het systeem aansluiten


Stap 1

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact van 220–240 V.

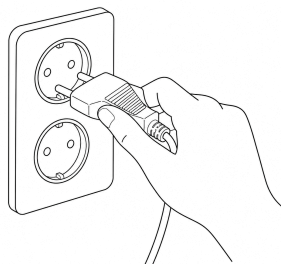


Stap 2

Controleer of de luchtslang correct is aangesloten op de manchet(ten). Als deze al is aangesloten, ga dan verder naar stap 3. Zo niet, steek dan de slangpinnen in de aansluitingen van de manchet(ten).

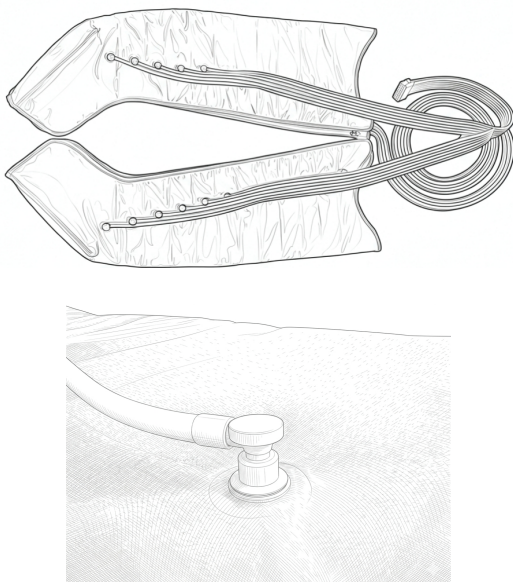

Stap 3

Sluit de hoofdconnector van de luchtslang aan op de bedieningseenheid.

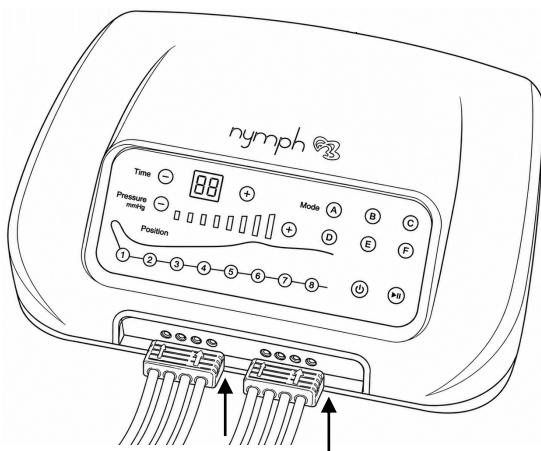


Afbeelding toont: model Nymph 8.

Stap 4

Controleer of alle aansluitingen stevig vastzitten en luchtdicht zijn.

Stap 5

Doe de manchet(ten) aan.

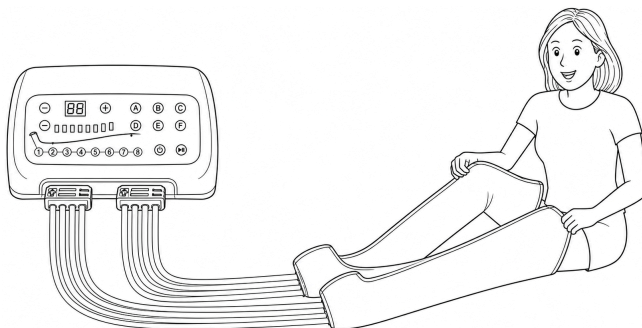

Afbeelding toont: model Nymph 8.



OPMERKING:

Het wordt aanbevolen het apparaat in te schakelen voordat de manchetten worden vastgemaakt.

11.3. Een behandel sessie starten

Stap 6

Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen.

Stap 7

Stel het gewenste drukniveau in met behulp van de knoppen + en -. De beschikbare drukniveaus zijn 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 en 240 mmHg. Het wordt aanbevolen om tijdens de eerste sessies met een lagere drukinstelling te beginnen en de druk geleidelijk te verhogen op basis van persoonlijke voorkeur en comfort.



OPMERKING:

Voor gebruikers die het apparaat voor het eerst gebruiken, wordt een drukinstelling van 120 mmHg of 150 mmHg aanbevolen. Verhoog de druk geleidelijk als dit comfortabel aanvoelt.

Stap 8

Stel de behandeltime in met de knoppen + en -. Het instelbereik bedraagt 1–90 minuten. De standaardinstelling is 30 minuten. Druk kort om de tijd in stappen van 1 minuut aan te passen of houd de knop ingedrukt voor een snelle aanpassing. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de timer nul bereikt.

11.4. Een programma selecteren

Stap 9

Selecteer het gewenste programma door op A, B, C, D, E of F te drukken. (zie het hoofdstuk “MASSAGEPROGRAMMA'S A–F”)

11.5. Kamers in- en uitschakelen

Stap 10

Schakel afzonderlijke kamers in of uit door op het overeenkomstige kamernummer te drukken. Standaard zijn alle kamers ingeschakeld en branden de indicatorlampjes. Druk eenmaal op een kamernummer om die kamer uit te schakelen en het indicatorlampje uit te schakelen. Druk opnieuw om de kamer weer in te schakelen en het indicatorlampje opnieuw te laten branden. Het indicatorlampje van een kamer knippert terwijl die kamer wordt opgeblazen of leeggelaten.

11.6. Het programma starten

Stap 11

Druk op de start-/pauzeknop om de behandelsessie te starten. Standaard bevindt het apparaat zich in de pauzmodus en brandt het indicatielampje groen. Druk op de start-/pauzeknop om de behandeling te starten. Tijdens de behandeling verandert het indicatielampje naar blauw.



OPMERKING:

Aan het begin van de behandeling kan de opblaastijd langer zijn omdat de manchetten vanuit een volledig lege toestand moeten worden gevuld.



LET OP:

- Verwijder de manchetten niet terwijl het apparaat in werking is. Schakel het apparaat altijd uit voordat je de manchetten loskoppelt of verwijdert.
- Stop de behandeling en raadpleeg je arts als tijdens of na de behandeling pijn, blauwe plekken of irritatie optreden.

Aanbevolen sessieduur

Voor nieuwe gebruikers wordt aanbevolen te beginnen met een korte sessie van ongeveer 10 tot 20 minuten.

Als dit comfortabel aanvoelt, kan de sessieduur tijdens toekomstige behandelingen geleidelijk worden verlengd op basis van persoonlijke voorkeur en comfort.

Stop onmiddellijk met het gebruik als ongemak, pijn, duizeligheid, gevoelloosheid of een andere ongebruikelijke reactie optreedt.

11.7. Na gebruik

De behandelssessie eindigt automatisch wanneer de timer nul bereikt. Je kunt de sessie ook op elk moment stoppen door op de Start/Pauze-knop te drukken of het apparaat uit te schakelen.




LET OP:

Schakel het apparaat altijd uit voordat je de manchetten verwijderd of slangen loskoppelt.

Nadat het apparaat is uitgeschakeld, open en verwijder je de manchetten. Indien nodig kun je de luchtkamers voorzichtig met de hand indrukken om resterende lucht vrij te laten en het leeglopen te versnellen.


Om de luchtslangset los te koppelen van de bedieningseenheid, druk je op de twee ontgrendelclips aan beide zijden van de hoofdconnector. Houd de clips ingedrukt en trek de connector vervolgens recht uit de bedieningseenheid. De manchetten en luchtslang moeten normaal gesproken als één geheel worden opgeborgen. Vermijd het onnodig loskoppelen van de slang van de manchetten, omdat herhaald loskoppelen de slangaansluitingen of slangpinnen kan beschadigen.

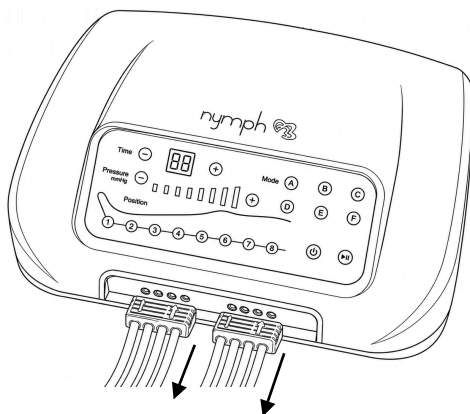

Afbeelding toont: model Nymph 8.

**OPMERKING:**

Voor transport of opslag kan de luchtslang van de manchetten worden losgekoppeld om minder opslagruimte te vereisen.

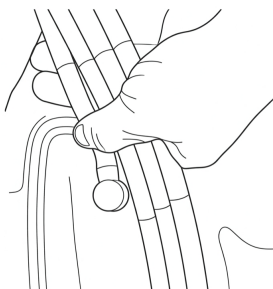**Stap 1**

Trek niet aan de slang.

**Stap 2**

Houd de connectorpinnen vast en trek ze recht uit de manchetconnector.

12. GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- Eerste gebruik: Als de afstandsbediening een batterij-isolatiestrip bevat, verwijder deze dan vóór het eerste gebruik. Als de batterij niet is geplaatst (bijvoorbeeld vanwege transportvoorschriften), plaats dan een CR2032-batterij in het batterijvak.
- Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het bedieningspaneel van de Nymph 4-6-8. Zorg voor optimale prestaties door de afstandsbediening uitgelijnd te houden met de IR-ontvanger. Gebruik de knoppen van de afstandsbediening om de Nymph 4-6-8 te bedienen.
- Het maximale bereik van de afstandsbediening bedraagt ongeveer 5 meter.
- Als de afstandsbediening niet correct werkt, voer dan de volgende stappen uit:
 - Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de Nymph 4-6-8.
 - Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en de Nymph 4-6-8.
 - Vervang de batterij door een nieuwe batterij.
 - Neem contact met ons op als het probleem hiermee niet wordt opgelost.



OPMERKINGEN:

- Verwijder vóór gebruik de beschermfolie van de afstandsbediening.
- De afstandsbediening biedt toegang tot alle functies die beschikbaar zijn op het bedieningspaneel van de Nymph 4-6-8.

13. GEBRUIK VAN DE MANCHETTEN

Vorbereiding voor gebruik:

- Draag voor comfort en hygiëne lichte kleding onder de compressiemanchetten. De kleding moet schoon en comfortabel zijn en vrij van knopen, ritsen of andere harde voorwerpen die tijdens gebruik ongemak kunnen veroorzaken.
- Verwijder horloges, armbanden, ringen of andere sieraden voordat je arm- of beenmanchetten gebruikt.

Aanbevolen posities:

- Plaats de bedieningseenheid op een stabiele, vlakke ondergrond waar deze tijdens gebruik gemakkelijk bereikbaar is. Zorg ervoor dat de luchtslangen niet gedraaid, geknikt of geblokkeerd zijn.
- Beenmanchetten kunnen zittend of liggend worden gebruikt. Voor extra comfort tijdens het zitten kunnen de benen licht worden verhoogd.
- Broekmanchetten moeten liggend op een bed, bank of vergelijkbaar vlak oppervlak worden gebruikt. Het gebruik van broekmanchetten in zittende positie kan plooiën in de manchetten veroorzaken, wat de opblaasprestaties kan beïnvloeden.
- Armmanchetten kunnen zittend of liggend worden gebruikt, waarbij de arm in een comfortabele positie wordt ondersteund.
- Blijf tijdens het gebruik ontspannen en vermijd overmatige bewegingen die de opblaas- en leegloopcycclus van de compressiemanchetten kunnen verstoren.



WAARSCHUWING:

Loop niet, ren niet, beklim geen trappen, bestuur geen voertuig en voer geen andere activiteiten uit terwijl je tijdens het gebruik beenmanchetten of broekmanchetten draagt. De manchetten beperken de natuurlijke bewegingsvrijheid en kunnen het risico op struikelen, vallen, evenwichtsverlies of letsel vergroten. Blijf altijd zitten of liggen terwijl de manchetten zijn opgeblazen en in gebruik zijn.



LET OP:

Blaas een manchet niet op tenzij deze correct op het bedoelde lichaamsdeel wordt gedragen. Gebruik het systeem niet met een

manchet dat niet wordt gedragen of waarvan de ritsen open zijn. Dit kan de prestaties beïnvloeden en de compressiemanchet beschadigen.

14. PROBLEEMOPLOSSING

① Het apparaat schakelt niet in

1. Zorg ervoor dat het netsnoer stevig is aangesloten op de bedieningseenheid en is aangesloten op een geschikt stopcontact.
2. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, koppel het dan los van de stroomvoorziening. Draai het apparaat om en verwijder met een schroevendraaier de zekeringhouder met de markering "FUSE". Controleer of de zekering intact is.
3. Als de zekering intact is, plaats dan de zekeringhouder terug en neem contact op met de klantenservice voor hulp. Als de zekering defect is, vervang deze dan door een trage zekering (T3.15A, 5 × 20 mm).

② De manchetten worden in de verkeerde volgorde opgeblazen

1. Zorg ervoor dat de meerpoortsconnector in de juiste richting in de bedieningseenheid is geplaatst. De connector is correct geplaatst wanneer de vergrendellippen uitgelijnd zijn met de openingen boven de luchtuitlaten.

③ De bedieningseenheid maakt ongewoon veel lawaai

1. Zorg ervoor dat de transportschroef is verwijderd voordat je het apparaat gebruikt.
2. Draai het apparaat om en open het filterdeksel aan de onderzijde van de eenheid.
3. Verwijder de transportschroef en gooi deze weg.
4. Start het apparaat opnieuw op en controleer of het geluidsniveau weer normaal is.

15. REINIGING

- Voor het reinigen van de buitenzijde van de bedieningseenheid wordt een schone, zachte en droge doek aanbevolen.
- Was de manchetten niet. Veeg ze voorzichtig af met een droge doek.
- Zorg ervoor dat je tijdens het reinigen niet te veel druk uitoefent op het scherm en de knoppen.
- Gebruik geen water voor de reiniging.
- Dompel de Nymph 4-6-8 niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan de bedieningseenheid met water af te spoelen, om te voorkomen dat water in het elektrische circuit terechtkomt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik onder geen enkele omstandigheid agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, aangezien deze in de behuizing kunnen binnendringen en de werking kunnen aantasten.
- Gebruik geen schurende voorwerpen voor de reiniging.
- Reiniging mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

16. ONDERHOUD & SERVICE

- De Nymph 4-6-8 is onderhoudsvrij, behalve wat betreft de reiniging.
- Je mag de Nymph 4-6-8 niet wijzigen, zelf repareren of demonteren.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Nymph 4-6-8 niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste montage kan elektrische schokken, schade, kortsluiting of brand veroorzaken.
- Indien je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Nymph 4-6-8 bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen de batterij van de afstandsbediening kan worden vervangen.
- Onderhoud, service en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Neem voor onderhoud of service eerst contact met ons op via info@nymph.be.

- Neem voor ontbrekende accessoires, zoals de handleiding of andere onderdelen, contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
- Stuur het product in geval van een defect terug naar **NYMPH** in de originele verpakking, samen met een beschrijving van het defect, een aankoopbewijs en alle accessoires.

17. OPSLAG

- Wij adviseren de Nymph 4-6-8 vóór langdurige opslag te reinigen (zie het hoofdstuk "REINIGING").
- Bewaar de Nymph 4-6-8 bij voorkeur in de originele verpakking.
- Bewaar geen natte onderdelen, aangezien schimmelvorming of roest kan ontstaan.
- Bewaar de Nymph 4-6-8 op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht of vocht.
- Bewaar de Nymph 4-6-8 niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar de Nymph 4-6-8 buiten het bereik van jonge kinderen.
- Verwijder de batterij uit de afstandsbediening voordat het apparaat gedurende langere tijd wordt opgeslagen.
- Rol het netsnoer losjes op, maar wikkel het niet rond het apparaat.
- Vouw de manchetten netjes op en plaats er geen zware voorwerpen bovenop, aangezien dit de manchetten of luchtkamers kan beschadigen.
- Plaats de manchetten (incl. slangen) voor opslag op elkaar. Rol ze vervolgens losjes samen op. Voor transport of opslag kan de luchtslang van de manchetten worden losgekoppeld om minder opslagruimte te vereisen.

18. TRANSPORT

- Monteer de transportschroef opnieuw. De transportschroef is uitsluitend bedoeld voor transport en mag tijdens normaal gebruik niet opnieuw worden gemonteerd.
- Tijdens transport:
 - Vermijd onnodige schokken en stoten.
 - Laat de Nymph 4-6-8 niet vallen.
 - Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat.
 - Bescherm de Nymph 4-6-8 tegen trillingen.
 - Bescherm de manchetten tegen perforaties.
 - Gebruik indien mogelijk de originele verpakking.

- Na transport of opslag bij zeer lage temperaturen moet de Nymph 4-6-8 zich gedurende ongeveer 30 minuten aanpassen aan kamertemperatuur vanwege mogelijke condensvorming. Daarna kan het apparaat worden gebruikt.

19. VERWIJDERING & RECYCLING

Dit product is vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden hergebruikt en gerecycled. Verwijder het product op verantwoorde wijze aan het einde van zijn levensduur.

19.1. Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)



Producten die zijn gemarkeerd met het symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen vallen onder gescheiden inzameling overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU (AEEA) en de toepasselijke nationale wetgeving.

Elektrische en elektronische apparatuur mag niet worden verwijderd via het ongesorteerde huishoudelijke afval. Breng het apparaat in plaats daarvan naar:

- een erkend gemeentelijk inzamelpunt, of
- een verkooppunt bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product.

Correcte gescheiden inzameling helpt milieuschade te voorkomen en maakt een correcte recycling van waardevolle materialen mogelijk.



OPMERKING:

Onjuiste verwijdering kan leiden tot sancties op grond van de nationale wetgeving.

19.2. France – Triman-markering

Indien dit product in Frankrijk wordt verkocht, zijn de verwijderingsinstructies van toepassing overeenkomstig de Triman-wetgeving. Volg de lokale inzamelrichtlijnen zoals aangegeven door het Triman-logo en de officiële Franse verwijderingsinstructies.



Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Ze moeten worden gesorteerd en verwijderd via de juiste recyclagestromen, overeenkomstig de toepasselijke Franse regelgeving en lokale inzamelinstructies.




19.3. Duitsland (ElektroG §18(4))

Voor producten die in Duitsland worden verkocht, is de volgende aanvullende consumenteninformatie vereist:

- Oude elektrische en elektronische apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld en mogen niet via het huishoudelijk afval worden verwijderd.
- Batterijen en lampen die zonder beschadiging kunnen worden verwijderd, moeten vóór verwijdering worden verwijderd.
- Consumenten kunnen oude apparaten gratis inleveren bij gemeentelijke inzamelpunten.
- Terugnameverplichtingen voor retailers in Duitsland:

- 1:1-terugname: Bij aankoop van een nieuw apparaat van hetzelfde type moet het oude apparaat gratis worden geaccepteerd.
- 0:1-terugname: Kleine apparaten (buitenafmeting < 25 cm) kunnen ook zonder aankoop van een nieuw product worden ingeleverd, tot maximaal drie apparaten per type.
- Van toepassing op fysieke winkels met een verkoopoppervlak van $\geq 400 \text{ m}^2$ voor elektrische/elektronische apparatuur en op verkopers op afstand waarvan de opslag- of verzendruimte voor dergelijke goederen $\geq 400 \text{ m}^2$ bedraagt.
- Consumenten zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van alle persoonsgegevens van apparaten voordat deze worden ingeleverd.
- Duitsland rapporteert jaarlijks inzamel- en recyclingquota onder de AEEA-richtlijn.

19.4. Verwijdering van batterijen

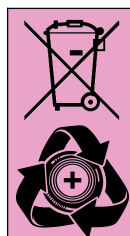

De omgang met en verwijdering van batterijen en oplaadbare batterijen wordt geregeld door Verordening (EU) 2023/1542 inzake batterijen en afgedankte batterijen. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten en heeft tot doel een veilig, duurzaam en milieuvriendelijk gebruik van batterijen te waarborgen.

Consumenten zijn wettelijk verplicht batterijen niet via het huishoudelijk afval te verwijderen. Gebruikte batterijen moeten in plaats daarvan worden ingeleverd bij aangewezen inzamelpunten, zoals aangegeven door het symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen, zodat zij correct kunnen worden gerecycled. Correcte verwijdering helpt het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

19.5. Verwijdering van verpakkingsmateriaal



Verwijder verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke wijze. Volg de aanwijzingen en recyclingsymbolen op de verpakking en zorg ervoor dat plastic zakken, karton en andere materialen worden ingezameld voor recycling.

20. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

NYMPH garandeert dat dit product gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument onder de toepasselijke EU-wetgeving inzake consumentenbescherming.

De garantie is van toepassing op producten die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet voor commerciële doeleinden of verhuur. **NYMPH** zal naar eigen goeddunken dit product of een onderdeel van het product dat tijdens de garantieperiode defect blijkt te zijn vervangen of repareren. Vervanging zal plaatsvinden door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Indien het product niet langer beschikbaar is, kan het worden vervangen door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Er worden geen terugbetalingen verstrekt. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en blijft gedurende de resterende garantieperiode onder deze garantie vallen.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van de eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om aanspraak te kunnen maken op garantieondersteuning.

Deze garantie is niet van toepassing op:

- Nalatig gebruik of verkeerd gebruik van het product.
- Gebruik met een onjuiste spanning of stroomsterkte.
- Schade als gevolg van vallen of stoten.
- Waterschade.
- Gebruik in strijd met de gebruiksinstructies.
- Demontage, reparatie of wijziging door anderen dan **NYMPH**.
- Schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal.
- Schade veroorzaakt door onjuist onderhoud en onjuiste opslag.
- Schade veroorzaakt door onjuiste montage.
- Schade veroorzaakt door onjuiste aansluitingen.
- Accessoires zoals batterijen en zekeringen.
- Blootstelling aan ongunstige externe invloeden, zoals zonlicht en andere straling of elektromagnetische velden.

- Normale slijtage.

Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding doet de garantie vervallen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

NYMPH behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten opgenomen in kritische beoordelingen en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan onder het auteursrecht. Neem contact met ons op voor verzoeken om toestemming.

Air Pressure Massage System

Model Nymph 4-6-8



This user manual accompanies the Nymph 4-6-8 and contains important information about installation, safety, disposal and use. Read this manual carefully and follow the instructions to ensure safe and proper use of the product.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this user manual when passing on this product to third parties.

The images in the user manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **NYMPH** is not obliged to update or revise the user manual. Use the actual product as a reference.



IMPORTANT – READ BEFORE USE

This device is a Class IIa medical device intended for intermittent pneumatic compression therapy.

Use this device only in accordance with its intended use and observe all contraindications, warnings and precautions described in this user manual.

NYMPH accepts no liability for damage, injury or loss resulting from use contrary to this user manual, failure to observe contraindications, warnings or precautions, or use outside the intended purpose.

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing a **NYMPH** product. This manual provides the information required for safe and proper operation of the product.

This product bears the CE marking and complies with applicable European regulatory requirements.

	CE marking This product bears the CE marking, indicating that it conforms to the relevant European Union directives concerning safety, health, and environmental protection. The CE marking is a declaration by the manufacturer that the product meets the applicable EU legal requirements.
	RoHS Compliance This product complies with the RoHS Directive (2011/65/EU), which restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Compliance ensures that levels of substances such as lead, mercury, and cadmium remain below the maximum permitted thresholds.
EMC	EMC Compliance This product complies with the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive (2014/30/EU), which ensures that the device functions properly in its environment without causing or suffering from electromagnetic interference.
MDR	MDR Compliance This product complies with the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 (MDR), which establishes requirements for the safety, performance, and clinical evaluation of medical devices placed on the European market. Compliance demonstrates that the product meets the essential requirements for medical devices under EU law.

The full EU Declaration of Conformity and all supporting test documentation are available upon request.

If you have any questions, remarks, or problems using the product, please contact us.

We hope you enjoy your purchase!

2. EXPLANATION OF SYMBOLS

Throughout this user manual, the following symbols are used:

	NOTE: Provides important information or useful tips for the use of the product.
	DANGER: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor injury or material damage.

The safety symbols do not replace the written safety instructions. Read and follow the safety instructions exactly.

Medical device symbols:

Symbol	Symbol title	Explanation
	Serial number (SN)	Indicates the manufacturer's serial number for product identification.
	Batch code (LOT)	Indicates the manufacturer's batch or lot number.

	Authorised representative in the European Union (EU REP)	Indicates the authorised representative within the European Union.
	Date of manufacture	Indicates the date when the medical device was manufactured
	CE marking with notified body number	Indicates conformity with applicable EU legislation. The number identifies the notified body.
	Type BF applied part	Indicates a Type BF applied part providing protection against electric shock.
	WEEE symbol	Indicates that the device must not be disposed of with household waste. Dispose of the product in accordance with local regulations for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
	Indoor use only	Indicates that the device is intended for indoor use only.
	Class II equipment	Indicates Class II equipment with double or reinforced insulation for protection against electric shock.
	IP21 protection rating	Indicates protection against solid foreign objects larger than 12,5 mm and protection against vertically falling water droplets.
	Manufacturer	Indicates the legal manufacturer of the product.

3. TERMINOLOGY



NOTE:

In this user manual, the term “Nymph 4-6-8” collectively refers to the Nymph 4, Nymph 6 and Nymph 8 models. Unless otherwise stated, the term refers to the complete product, including the control unit (device) and the supplied accessories such as the remote control and cuff with connecting hose. When individual components are described, they are referred to by their specific names.

4. SAFETY INSTRUCTIONS



Follow the instructions and safety information in this user manual carefully. Failure to do so may result in personal injury or damage to property.

Damage or injury resulting from improper use or failure to follow these instructions is not covered by the warranty.

Electrical devices and batteries may present hazards if used incorrectly. These may include injury, fire, electric shock, or damage to property. Always handle the device with care and keep it out of the reach of children.

This user manual provides the information required for safe use of the device. However, not all possible situations or hazards can be covered. Always use the device with caution and follow the instructions provided.

Residual risks may remain despite all safety measures. Follow all instructions and warnings in this user manual to reduce the risk of injury, damage, or malfunction.

If you have any questions that are not addressed in this user manual, please contact us.

4.1. Contraindications

Do not use the device:

- on open wounds, fractures, or severely injured body areas;
- on areas affected by acute inflammation or infection;
- if you have acute venous thrombosis or deep thrombophlebitis;
- if you suffer from pulmonary edema;
- if you have severe peripheral arterial occlusive disease (PAOD).

Consult a physician before use if you:

- are pregnant;
- have a pacemaker or other implanted electronic device;
- suffer from heart disease, circulatory disorders, or uncontrolled hypertension;
- have diabetes with reduced sensation or peripheral neuropathy;
- are undergoing cancer treatment;
- take anticoagulant medication;
- have any other medical condition that may be affected by compression massage.

4.2. General safety

- Do not use the Nymph 4-6-8 for any purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The Nymph 4-6-8 is designed and intended for household use and is not suitable for commercial or industrial use.
- Do not use the device in places where the use of electronic equipment is not allowed.
- The Nymph 4-6-8 is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Shocks, impacts, or falls, even from a low height, can damage the device.
- Do not place the Nymph 4-6-8 on an unstable surface. This may cause it to fall and result in a malfunction.
- Do not squeeze the cuff.
- Do not expose the Nymph 4-6-8 to excessive vibration, crushing forces, impacts, or other mechanical stress.
- Do not sit on the cuff.

- The device must be properly and securely connected. Follow the instructions to prevent any possible damage or injury.
- Use only the accessories or attachments supplied or recommended by the manufacturer for this device. Incorrect accessories or attachments may pose a risk to the user and can damage the Nymph 4-6-8.
- Do not insert any objects or fingers into openings.
- Do not apply excessive force when using the buttons on the Nymph 4-6-8.
- Do not touch the cuff with sharp objects.
- Do not apply excessive force to the display, and do not touch the display with sharp objects.
- Never place objects on the Nymph 4-6-8.
- Do not leave the switched-on Nymph 4-6-8 unattended. Close supervision is necessary when using near young children.
- Do not use the Nymph 4-6-8 near strong magnetic fields, e.g. motors, transformers, mobile phones, etc.
- Do not use the Nymph 4-6-8 in dusty environments.
- If it is no longer possible to operate the Nymph 4-6-8 safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - is visibly damaged;
 - is no longer working properly;
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions;
 - or has been subjected to serious transport-related stresses.

4.3. Users

- The Nymph 4-6-8 is not a toy. Keep it out of reach of children and pets.
- The device may only be used by adults. The cuffs are designed for adult users only. Using them on children may result in injury.
- Do not allow persons who are not familiar with the operation of the Nymph 4-6-8 or with these instructions to use the device.
- The device may only be used by persons who understand these instructions and are aware of the potential hazards.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children.

- Do not operate the Nymph 4-6-8 when you are tired, distracted, or under the influence of alcohol or medication.

4.4. Electrical safety

- You must not modify, repair yourself, or disassemble the Nymph 4-6-8. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Do not use any other mains plug for this device. This can cause failure and/or damage.
- Ensure your mains outlet supplies the correct power voltage to avoid damage to the device.
- The mains outlet must be located near the Nymph 4-6-8 and be easily accessible.
- To reduce energy consumption and potential safety risks, always unplug the device when it is not in use, during cleaning or maintenance, or if a fault occurs. The device remains connected to the mains as long as it is plugged in.
- Do not turn the Nymph 4-6-8 on and off by plugging and unplugging it. Always use the ON/OFF button.
- Never force the mains plug of the power cord into a mains outlet. If it does not fit easily into the mains outlet, stop using it. Always ensure that the mains plug of your device is properly connected to the mains outlet.
- If the power fails during use, turn off the device immediately and pull the mains plug from the mains outlet.
- If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, switch off the Nymph 4-6-8 immediately and remove the mains plug from the mains outlet. In these cases, the Nymph 4-6-8 should not be used until it has been inspected by the manufacturer or a similarly qualified person. Never inhale smoke from a potential device fire. If you have inhaled smoke, however, consult a doctor. The inhalation of smoke can be harmful.
- In the event of a fire, disconnect the power supply if this can be done safely. Use suitable fire-fighting equipment and keep a safe distance from the device.
- For safety reasons, always unplug the device in case of a thunderstorm.

4.5. Power cord

- Fully unwind the power cord before use.
- Do not modify the power cord.
- Check the power cord periodically for damage. Never use the power cord if there are any signs of damage.
- To prevent risks, damaged power cords may only be replaced by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Do not touch the power cord if it is damaged. A damaged power cord can cause a deadly electric shock. First, power down the respective mains outlet (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains outlet. Never use the device if the power cord is damaged.
- Never pull the mains plug from the mains outlet by pulling at the power cord. Always pull it from the mains outlet using the intended grips.
- Do not carry or pull the Nymph 4-6-8 by its power cord.
- Never wrap the power cord around the device. This will cause the cord to wear prematurely and break.
- Ensure that you do not trip over the power cord.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter.
- The power cord should not be kinked, trapped, or twisted.
- Ensure that the power cord is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Never tie a knot in the power cord.
- Untwist the power cord periodically if it becomes twisted due to use.
- Avoid excessive thermal stress on the power cord from extreme heat or cold.
- If using an extension cord attached to the mains outlet, ensure that the total electric power consumption of connected devices does not exceed the rated capacity.
- Children can become entangled while playing with cords, posing a strangulation hazard. Cords are not toys.

4.6. Heat & ventilation

- The Nymph 4-6-8 may become warm during operation. This is normal.
- Do not cover the device or the ventilation holes while it is in operation, as this may cause the Nymph 4-6-8 to overheat. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Ensure that the ventilation around the Nymph 4-6-8 is good during use.
- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The Nymph 4-6-8 and remote control are designed to work best in normal ambient temperatures between 0 °C and 35 °C and to be stored at temperatures between 0 °C and 45 °C. The Nymph 4-6-8 and the remote control may be damaged, and their lifespan may be shortened if the devices are used or stored outside this temperature range. Do not subject your devices to dramatic changes in temperature. Do not store your devices in a hot car or direct sunlight for extended periods. Do not place the devices near a window (especially in the summer).

4.7. Water

- This device is not waterproof. Exposure to water may result in electric shock, short circuits, or permanent damage.
- Never use the Nymph 4-6-8 with moist hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Never touch the plug with moist hands while connecting or disconnecting it from the mains outlet. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the Nymph 4-6-8 in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not use in wet environments. Do not immerse the device, power cord, plug, cuff or remote control in any liquid. Never pour liquids over or near the Nymph 4-6-8. There is a risk of electric shock or a short circuit. If liquid does get into the housing, unplug it immediately and then turn off the Nymph 4-6-8.
- Do not reach for the device if it has fallen into the water. Immediately unplug it from the mains outlet and only then remove it from the water.
- Ensure that the Nymph 4-6-8 is placed on a dry surface.

4.8. Battery safety (remote control)

- Do not place the remote control near a fire or in direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or explosion of the battery.
- Do not attempt to pierce, modify or disassemble the battery, as this may result in fire, explosion, chemical leakage, or serious injury.
- Do not use a battery that is damaged or deformed.
- Do not use your remote control if the battery begins to emit odour, starts to overheat, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from the battery. Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable gloves.
- The battery contains hazardous substances. Do not open the battery or insert any objects into it.
- Never throw the battery into a fire.
- When you handle the battery, ensure your hands, the product, and the battery are dry.
- Do not short-circuit. Short-circuiting may cause the battery to explode or leak.
- To avoid accidental short-circuiting of the battery after removal, do not let the battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap the battery in aluminium foil. Tape the battery terminals or put batteries separately in a plastic bag before you discard them.
- Be careful not to drop or bump the battery.
- In case of battery ingestion: immediately seek medical advice or contact your local poison control centre for treatment advice.
- Clean the battery contacts and also those of the device before battery installation.
- Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Examine your remote control and ensure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. If the battery compartment does not close securely, stop using the remote control and keep it away from children.
- Only replace the battery with the same size and the same type of battery.
- Use the battery within the recommended usage period.
- Prevent children or animals from coming into contact with the battery.

4.9. Residual Risks

Despite the implementation of all safety measures, certain residual risks may remain when using the Nymph 4-6-8.

- Temporary discomfort, skin irritation, redness, numbness, or pressure marks caused by prolonged use or excessive pressure settings.
- Discomfort or injury resulting from improper placement or incorrect fitting of the cuffs.
- Reduced blood circulation, pain, or physical discomfort caused by excessive treatment duration or unsuitable pressure settings.
- Electric shock, overheating, or fire hazards resulting from damaged cables, damaged components, improper repairs, exposure to liquids, or misuse of the device.
- Tripping hazards caused by hoses, cables, or connected garments during use or storage.
- Damage to the cuffs, hoses, connectors, or control unit caused by sharp objects, excessive bending, pulling, twisting, crushing, or improper storage.
- Risks associated with use by persons with contraindicated medical conditions, including circulatory disorders, thrombosis, severe hypertension, implanted medical devices, or other conditions listed in this manual.
- Risks associated with use by children, persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or persons unable to understand the instructions or communicate discomfort.

To minimise these risks, always follow all instructions and safety warnings provided in this manual.

4.10. Reasonably foreseeable misuse

The following uses are considered reasonably foreseeable misuse and must be avoided:

- Using the device for purposes other than intermittent pneumatic compression therapy using the supplied compression garments.
- Using the device on infants, children, pets, or persons unable to safely operate the device or communicate discomfort.
- Using the device while sleeping, unconscious, under the influence of alcohol, medication, or substances that may reduce awareness or sensitivity.
- Using the device with damaged cuffs, hoses, connectors, cables, plugs, or other components.
- Using the device in wet environments, near water, or with wet hands.
- Covering the control unit during operation or blocking the ventilation openings.
- Pulling, twisting, sharply bending, crushing, or stepping on hoses or power cables.
- Disconnecting the cuffs or hoses while the device is operating or pressurised.
- Using pressure settings, treatment durations, or programs that cause pain, numbness, or significant discomfort.
- Using the device despite known contraindications, medical conditions, injuries, or after medical advice not to use compression therapy devices.
- Attempting to open, modify, repair, or disassemble the device or accessories.
- Inserting foreign objects into the control unit, connectors, ventilation openings, or other openings of the device.
- Using non-approved accessories, replacement parts, power cables, or attachments.
- Standing, walking, or moving around while connected to the compression garments.
- Using the product outdoors or exposing it to direct sunlight, excessive heat, open flames, or freezing temperatures.

Such misuse may result in injury, fire hazards or damage to the device.

4.11. Medical considerations

This product is a Class IIa medical device intended for intermittent pneumatic compression therapy. It should only be used in accordance with its intended purpose and should not replace professional medical advice, diagnosis, monitoring, or treatment.

Consult a physician before using this device if you:

- suffer from circulatory disorders, vascular disease, varicose veins, diabetes, severe hypertension, or heart disease;
- have implanted medical devices such as a pacemaker;
- are pregnant or recently underwent surgery;
- experience chronic pain, numbness, reduced sensitivity, or skin conditions;
- are undergoing medical treatment or have any other medical concerns.

Do not use the device on injured, swollen, infected, inflamed, or sensitive body areas unless approved by a qualified healthcare professional.

Stop using the device immediately and seek medical advice if you experience pain, dizziness, numbness, skin discolouration, unusual swelling, breathing difficulties, or any other abnormal physical reaction during or after use.

Users are responsible for determining whether this product is suitable for their individual physical condition.

5. INTENDED USE

The Nymph 4-6-8 is intended for intermittent pneumatic compression therapy using inflatable compression garments for the legs, arms, waist or lower body. The device provides sequential air pressure compression.

The device is intended to support blood circulation and temporarily relieve minor muscle discomfort and fatigue.

**WARNING:**

Use this product only as described in this manual. Use outside the intended purpose or contrary to the instructions may result in reduced performance, damage to the device, or safety risks.

6. SCOPE OF DELIVERY

6.1. Contents

The following components are included in the scope of delivery:

- 1x Nymph 4-6-8
- 1x Remote control (without battery)
- 1x Air hose set
- 1x Cuff
- 1x Carrying bag
- 1x Shoulder strap for carrying bag
- 1x User manual

**NOTE:**

Due to transport and packaging requirements, some accessories may be supplied disassembled. Follow the assembly instructions carefully.

6.2. Unpacking

Remove everything from the packaging and check for damage. If any damage is detected, do not use the Nymph 4-6-8. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

After unpacking the product, verify that the delivery is complete and that all parts are in good condition. If a part is missing or damaged, please contact us.

Before use, remove all packaging materials.



NOTE:

This device is packaged to protect it during transport. Keep the original box and other packaging in a safe place to prevent damage to the device if you need to transport it in the future. If you do throw away the packaging, please ensure it is recycled properly.

6.3. Safety during unpacking

Do not leave packaging materials and accessories lying around carelessly during unpacking. They may become a dangerous plaything for children.



WARNING: Suffocation hazard

Keep plastic bags and foil out of the reach of babies and children to prevent suffocation. Thin foils can stick to the nose and mouth and obstruct breathing.





WARNING: Strangulation hazard

Cords and hoses longer than 22 cm can be harmful to babies and very young children.

Children may become entangled while playing with the power cord and hoses. Do not leave the accessories lying around during unpacking.



WARNING: Coin/button cell battery.

The remote control is delivered without the necessary button cell battery. Be careful when unpacking and/or installing batteries. Button cell batteries are small and very powerful. To kids, they might look like candy or coins, and can be swallowed very easily.

- Keep new and used button cell batteries out of reach of children.
- A swallowed button cell battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death.
- If you think a battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Dispose of used button cell batteries immediately.



7. TECHNICAL DATA



NOTE:

Due to continuous improvements to our product, the technical specifications may be changed without prior notice.

Product	Air pressure massage system		
Model	Nymph 4	Nymph 6	Nymph 8
Brand	Nymph		
Colour	Black		
Material	Hard plastic		
Number of air chambers	4	6	8
Number of programs	6 (A – F)		
Power	65 W		
Input voltage	220 – 240 V		
Frequency	50/60 Hz		
Protection class (device)	Class I 		
Fuse	T3.15A, 5 × 20 mm		
Power cable length	1.5 m		
Timer setting	1 – 90 min		
Pump output	20 – 25 l/min		
Pressure	30 – 240 mmHg (30 mmHg increments)		
Operating temperature	10 – 40 °C		
Storage temperature	10 – 40 °C		
Operating humidity	30 – 85 % RH		
Storage humidity	30 – 85 % RH		
Remote control power supply	CR2032 (button cell battery)		

IP rating	IP 21
Weight	2.3 kg
Dimensions	300 × 237 × 126 mm

Product identification:

Brand	Nymph		
Model	Nymph 4	Nymph 6	Nymph 8
OEM Manufacturer	Xiamen Weiyou Intelligent Technology Co., Ltd., Xiamen, China		
OEM Model	VU-NIPC02	VU-IPC04	VU-IPC06



NOTE:

The product identification and rating label is located on the device. This label contains important information such as the model number and electrical ratings.

MDR Compliance:

This product is a Class IIa medical device and complies with the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 (MDR), which establishes requirements for the safety, performance, and clinical evaluation of medical devices placed on the European market. Compliance demonstrates that the product meets the essential requirements for medical devices under EU law.

Notified Body:

Notified Body 0598 – SGS Fimko Oy
 Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
 Tel.: +358 9 696 361
www.sgs.fi
 Business ID 0634247-4

Authorised representative in the European Union (EU REP):

EU


REP

SUNGO Cert GmbH

Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf, Germany

8. PRODUCT OVERVIEW

8.1. The control unit

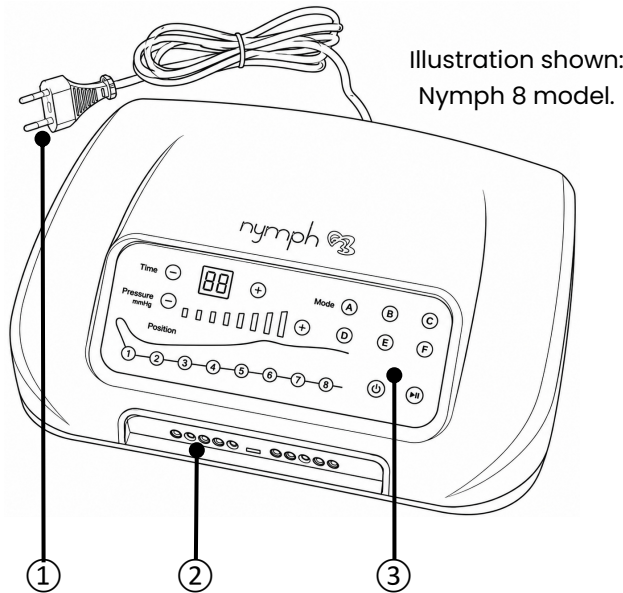

- ① Power cord
- ② Multi-port connector socket
- ③ Operating panel

8.2. The operating panel

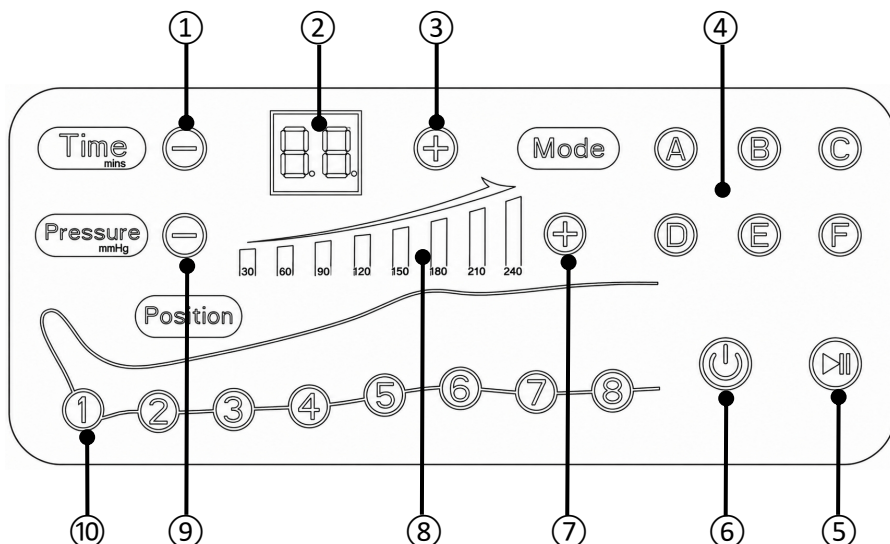


Illustration shown: Nymph 8 model.

- ① Subtract time button
- ② Remaining time indicator (1 - 90 minutes)
- ③ Add time button
- ④ Program mode buttons (A, B, C, D, E, F)
- ⑤ Start/Pause button
- ⑥ ON/OFF button
- ⑦ Add pressure button
- ⑧ Pressure indicator (8 levels: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 mmHg)
- ⑨ Subtract pressure button
- ⑩ Position/Chamber buttons
 - Nymph 4: 1, 2, 3, 4
 - Nymph 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Nymph 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

8.3. The remote control

- ① Subtract time button
- ② Add time button
- ③ Subtract pressure button
- ④ Add pressure button
- ⑤ Position/Chamber buttons
 - Nymph 4: 1, 2, 3, 4
 - Nymph 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Nymph 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- ⑥ Mode button
- ⑦ Start/Pause button


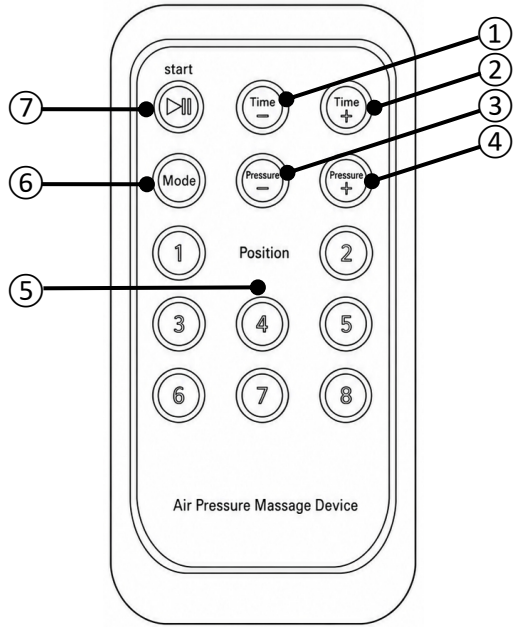


Illustration shown: Nymph 8 model.

9. MESSAGE PROGRAMS A–F

The air chambers inside the leg cuffs inflate and deflate according to the selected program. This creates a sequential compression massage designed to promote comfort and relaxation. The treatment time, pressure level, and additional settings can be adjusted at any time during the session.

- A** Normal
- B** Sequential squeeze
- C** Double wave
- D** Whole squeeze
- E** Sequential squeeze + double wave
- F** Normal + double wave + whole squeeze

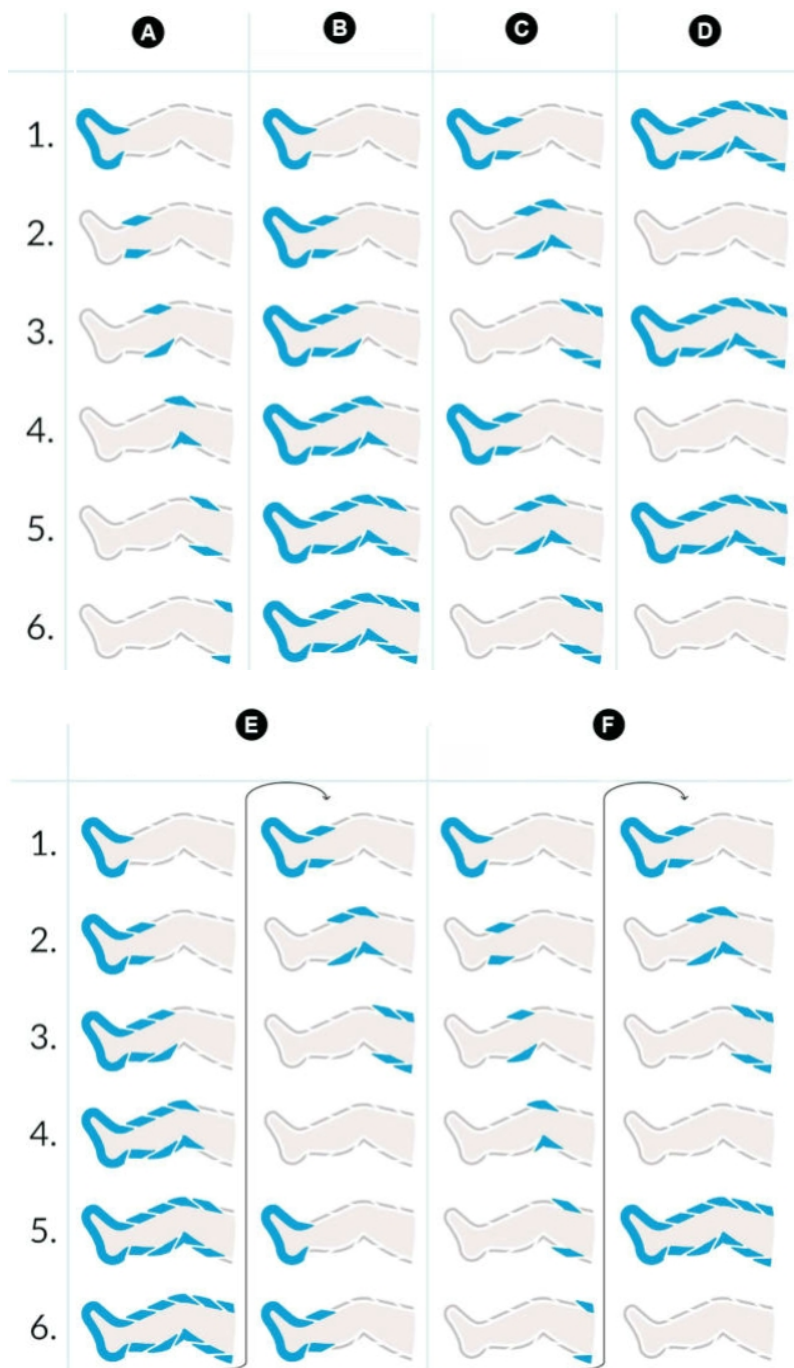

10. BENEFITS OF COMPRESSION MASSAGE

The device provides a sequential compression massage using multiple air chambers that inflate and deflate according to the selected program. This creates a gentle pressure massage designed to enhance comfort and relaxation.

Potential benefits of regular use may include:

- Relief from the feeling of tired or heavy legs after prolonged standing, sitting, or daily activities.
- Increased comfort and relaxation after physical activity or exercise.
- A soothing massage experience for the legs or arms.
- Temporary relief from muscle tension and physical fatigue.
- Improved comfort during periods of rest and recovery.



NOTES:

- The benefits described above are intended to support compression therapy and individual experiences may vary.
- This medical device is intended for intermittent pneumatic compression therapy as described in this manual. It is not intended to replace professional medical advice, diagnosis, or treatment.


11. OPERATION

11.1. Before first use



FIRST USE:

Open the filter cover and remove the transportation screw by turning it counterclockwise. The screw protects the control unit during transport and must not be reinstalled.

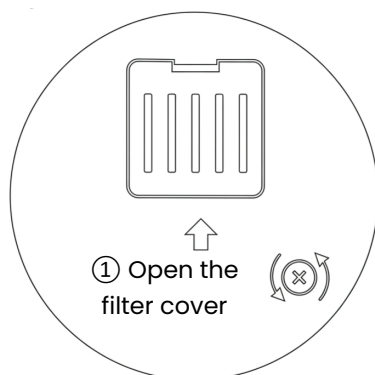


② Remove the transportation screw by turning it counterclockwise

If the remote control contains a battery insulation strip, remove it before first use. If the battery is not installed (for example, due to transport regulations), insert a CR2032 battery into the battery compartment.

11.2. Connecting the system


Step 1

Connect the power cord to an earthed 220–240 V mains outlet.

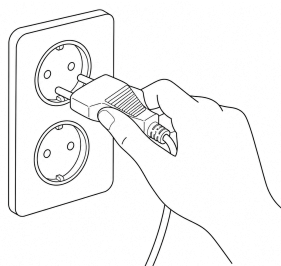

Step 2

Check whether the air hose is correctly connected to the cuff(s). If it is already connected, proceed to Step 3. If not, insert the hose pins into the connectors on the cuff(s).

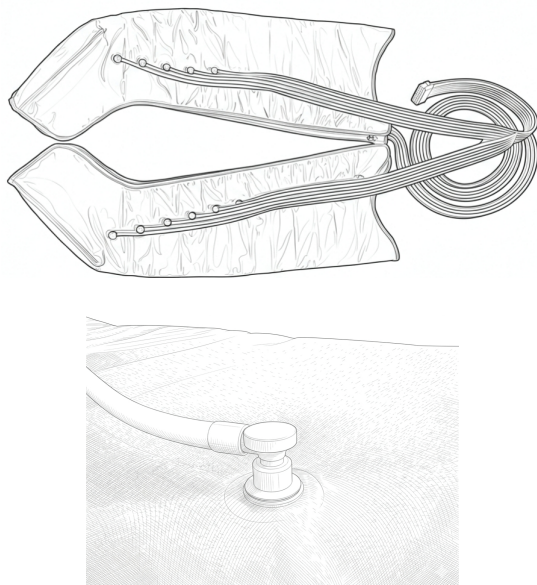

Step 3

Connect the main connector of the air hose to the control unit.

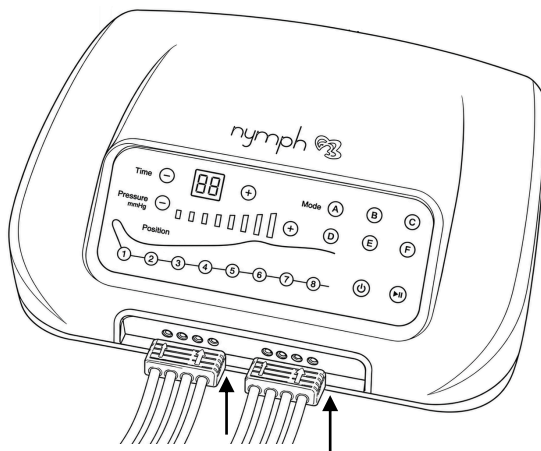


Illustration shown: Nymph 8 model.

Step 4

Check that all connections are secure and airtight.

Step 5

Put on the cuff(s).

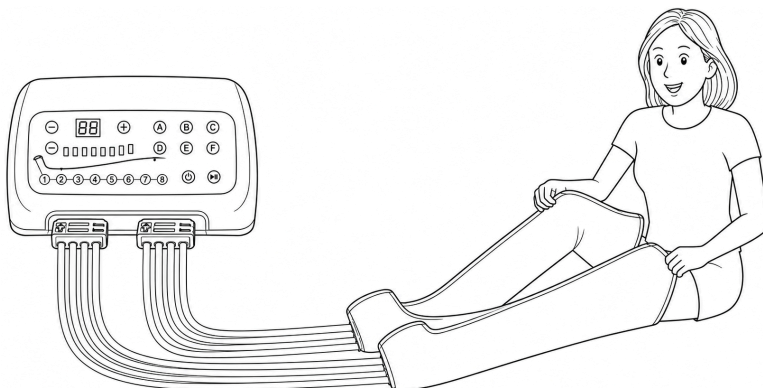


Illustration shown: Nymph 8 model.



NOTE:

It is recommended to switch on the device before fastening the cuffs.

11.3. Starting a treatment session

Step 6

Press the ON/OFF button to switch on the device.

Step 7

Set the desired pressure level by pressing the + and – buttons. The available pressure levels are 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, and 240 mmHg. It is recommended to start with a lower pressure setting during the first few sessions and gradually increase the pressure according to personal preference and comfort.



NOTE:

For first-time users, a pressure setting of 120 mmHg or 150 mmHg is recommended. Increase the pressure gradually if comfortable.

Step 8

Set the treatment time using the + and - buttons. The available range is 1–90 minutes. The default setting is 30 minutes. Press briefly to adjust the time in 1-minute increments or press and hold for rapid adjustment. The device switches off automatically when the timer reaches zero.

11.4. Selecting a program

Step 9

Select the desired program by pressing A, B, C, D, E or F.
(refer to the chapter “MASSAGE PROGRAMS A–F”)

11.5. Enabling and Disabling Chambers

Step 10

Enable or disable individual chambers by pressing the corresponding chamber number. By default, all chambers are enabled, and the indicator lights are on. Press a chamber number once to disable that chamber and switch off its indicator light. Press it again to re-enable the chamber and switch the indicator light back on. The indicator light of a chamber flashes while that chamber is inflating or deflating.

11.6. Starting the program

Step 11

Press the Start/Pause button to begin the treatment session. By default, the device is in pause mode, and the indicator light is green. Press the Start/Pause button to start the treatment. The indicator light changes to blue while the treatment is running.



NOTE:

At the start of treatment, the inflation time may be longer as the cuffs must be filled from a completely empty state.



CAUTION:

- Do not remove the cuffs while the device is operating. Always switch off the device before disconnecting or removing the cuffs.

- Stop treatment and consult your physician if pain, bruising, or irritation occurs during or after treatment.

Recommended session duration

For first-time users, it is recommended to start with a short session of approximately 10 to 20 minutes.

If comfortable, the session duration may be gradually increased during future uses according to personal preference and comfort.

Discontinue use immediately if discomfort, pain, dizziness, numbness, or any unusual reaction occurs.

11.7. After Use

The treatment session ends automatically when the timer reaches zero. You may also stop the session at any time by pressing the Start/Pause button or switching off the device.



CAUTION:

Always switch off the device before removing the cuffs or disconnecting any hoses.

After the device has been switched off, open and remove the cuffs. If required, gently press the air chambers by hand to release any remaining air and speed up deflation.

To disconnect the air hose assembly from the control unit, press the two release clips located on both sides of the main connector. While holding the clips, pull the connector straight out of the control unit. The cuffs and air hose should normally be stored together as one assembly. Avoid disconnecting the hose from the cuffs unnecessarily, as repeated disconnection may damage the hose connectors or pins.


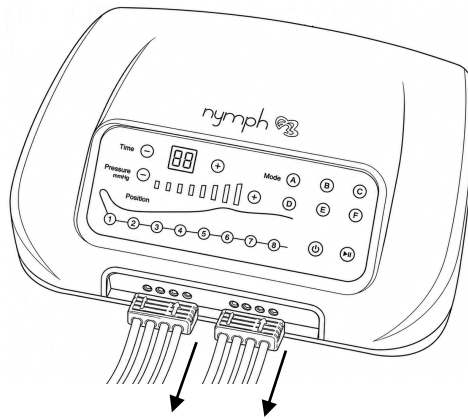


Illustration shown: Nymph 8 model.



NOTE:

For transportation or storage, the air hose may be disconnected from the cuffs to reduce the required storage space.

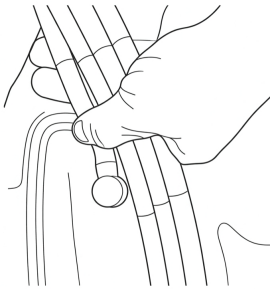

Step 1

Do not pull on the hose.



Step 2

Hold the connector pins and pull them straight out of the cuff connector.

12. USING THE REMOTE CONTROL

- First-time use: If the remote control contains a battery insulation strip, remove it before first use. If the battery is not installed (for example, due to transport regulations), insert a CR2032 battery into the battery compartment.
- Aim the remote control at the IR receiver located on the operating panel of the Nymph 4-6-8. For optimum performance, ensure that the remote control is aligned with the IR receiver. Use the buttons of the remote control to control the Nymph 4-6-8.
- The maximum range of the remote control unit is approximately 5 meters.
- If the remote control does not work properly, take the following steps:
 - Remove all obstacles between the remote control and the Nymph 4-6-8.
 - Reduce the distance between the remote control and the Nymph 4-6-8.
 - Replace the battery with a new one.
 - Contact us if the above does not solve the problem.



NOTES:

- Please remove the protective film from the remote control before use.
- The remote control provides access to all functions available on the Nymph 4-6-8 operating panel.

13. USING THE CUFFS

Preparing for use:

- For comfort and hygiene, wear light clothing underneath the compression garments. Clothing should be clean, comfortable, and free from buttons, zippers, or other hard objects that could cause discomfort during use.
- Remove watches, bracelets, rings, or other jewellery before using arm or leg garments.

Recommended positions:

- Place the control unit on a stable, flat surface where it can be easily reached during operation. Ensure that the air hoses are not twisted, kinked, or obstructed.
- Leg cuffs may be used while sitting or lying down. For increased comfort while sitting, the legs may be slightly elevated.
- Pants cuffs should be used while lying down on a bed, sofa, or similar flat surface. Using pants cuffs while sitting may cause folds in the cuffs that can affect inflation performance.
- Arm garments may be used while sitting or lying down with the arm supported in a comfortable position.
- During use, remain relaxed and avoid excessive movement that may interfere with the inflation and deflation cycle of the compression garments.



WARNING:

Do not walk, run, climb stairs, drive, or perform other activities while wearing leg cuffs or pants cuffs during operation. The cuffs restrict natural movement and may increase the risk of tripping, falling, loss of balance, or injury. Always remain seated or lying down while the cuffs are inflated and in use.



CAUTION:

Do not inflate a cuff unless it is properly worn on the intended body area. Do not operate the system with a cuff that is not being worn or with zippers left open. Doing so may affect performance and may damage the compression garment.

14. TROUBLESHOOTING

① The device does not turn on

1. Make sure the power cord is connected securely to the control unit and plugged into a suitable power outlet.
2. If the device still does not turn on, disconnect it from the power supply. Turn the device over and remove the fuse holder marked "FUSE" using a screwdriver. Check whether the fuse is intact.
3. If the fuse is intact, reinstall the fuse holder and contact customer service for assistance. If the fuse is defective, replace it with a slow-blow fuse (T3.15A, 5 × 20 mm).

② The cuffs inflate in the wrong order

1. Make sure the multi-port connector is inserted into the control unit in the correct orientation. The connector is installed correctly when the locking tabs align with the openings located above the air outlets.

③ The control unit is unusually loud

1. Make sure the transportation screw has been removed before operating the device.
2. Turn the device over and open the filter cover on the bottom of the unit.
3. Remove the transportation screw and dispose of it.
4. Restart the device and check whether the noise level has returned to normal.

15. CLEANING

- A clean, soft, dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the control unit.
- Do not wash the cuffs. Wipe gently with a dry cloth.
- Be careful not to put too much pressure on the display and buttons while cleaning.
- Do not use water for cleaning.
- Do not submerge the Nymph 4-6-8 in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the control unit with water to prevent water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances should you use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions, as these can penetrate the housing and impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.

16. MAINTENANCE & SERVICE

- The Nymph 4-6-8 is maintenance-free, except for cleaning.
- You may not modify, self-repair, or disassemble the Nymph 4-6-8.
- Use only original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Check regularly for damage and severe wear.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the Nymph 4-6-8 for maintenance. Removing the housing or improper assembly may cause electric shocks, damage, short circuits, or fire.
- If, for any reason, you open the housing, the warranty will become null and void. The Nymph 4-6-8 contains no user-serviceable parts. Only the battery from the remote control can be replaced.
- Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. For maintenance or service, please contact us first at info@nymph.be.

- For missing accessories such as the user manual or other items, contact us at the above-mentioned email address.
- In case of a defect, return the product in the original packaging to **NYMPH** with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

17. STORAGE

- We advise cleaning the Nymph 4-6-8 before long-term storage (see the chapter "CLEANING").
- Store the Nymph 4-6-8 preferably in its original packaging.
- Do not store wet parts, as mould or rust may develop.
- Store the Nymph 4-6-8 in a place not exposed to sunlight or humidity, and which is dust-free.
- Do not store the Nymph 4-6-8 in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Store the Nymph 4-6-8 beyond the reach of young children.
- Remove the battery from the remote control before long-term storage.
- Loosely coil the power cable but do not wrap it around the device.
- Fold the cuffs neatly and do not place heavy objects on top of them, as this may damage the cuffs or air chambers.
- For storage, place the cuffs (incl. tubes) on top of each other. Then roll them loosely together. For transportation or storage, the air hose may be disconnected from the cuffs to reduce the required storage space.

18. TRANSPORT

- Reinstall the transportation screw. The transportation screw is intended for transport only and must not be reinstalled during normal use.
- During transport:
 - Avoid unnecessary shocks and impacts.
 - Do not drop the Nymph 4-6-8.
 - Do not place heavy objects on top of it.
 - Protect the Nymph 4-6-8 from vibrations.
 - Protect the cuffs from puncture damage.
 - Use the original packaging whenever possible.
- After transport or storage at very cold temperatures, the Nymph 4-6-8 must be accustomed to room temperature for approximately 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

19. DISPOSAL & RECYCLING

This product has been manufactured using high-quality materials and components that can be reused and recycled. Please dispose of the product responsibly at the end of its service life.

19.1. Disposal of electrical and electronic equipment (WEEE)



Products marked with the crossed-out wheeled bin symbol are subject to separate collection in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) and applicable national legislation.

Electrical and electronic equipment must not be disposed of with unsorted household waste. Instead, take the device to:

- an authorised municipal collection point, or
- a retailer upon the purchase of an equivalent new product.

Correct separate collection helps prevent environmental harm and enables proper recycling of valuable materials.



NOTE:

Improper disposal may lead to penalties under national legislation.

19.2. France – Triman marking

If this product is sold in France, disposal instructions apply in accordance with the Triman legislation. Follow local collection guidance as indicated by the Triman logo and official French disposal instructions.



All packaging materials are recyclable. They must be sorted and disposed of in the appropriate recycling streams, in accordance with applicable French regulations and local collection instructions.



19.3. Germany (ElektroG §18(4))

For products sold in Germany, the following additional consumer information is required:

- Old electrical and electronic devices must be collected separately and not disposed of in household waste.
- Batteries and lamps that can be removed without damage must be taken out before disposal.
- Consumers may return old devices free of charge to municipal collection points.
- Retailer take-back obligations in Germany:
 - 1:1 take-back: When purchasing a new device of the same type, the old device must be accepted free of charge.

- 0:1 take-back: Small devices (external dimension < 25 cm) can be returned even without buying a new product, up to three units per type.
- Applies to physical retailers with $\geq 400 \text{ m}^2$ sales area for electrical/electronic goods, and to distance sellers whose storage/shipping areas for such goods cover $\geq 400 \text{ m}^2$.
- Consumers are responsible for deleting all personal data from devices prior to return.
- Germany reports annual collection and recycling quotas under the WEEE Directive.

19.4. Disposal of the batteries



The handling and disposal of batteries and rechargeable batteries are governed by Regulation (EU) 2023/1542 on batteries and waste batteries. This regulation is directly applicable in all EU member states and aims to ensure the safe, sustainable, and environmentally responsible use of batteries.

Consumers are legally obliged not to dispose of batteries in household waste. Instead, used batteries must be returned to designated collection points, as indicated by the crossed-out wheeled bin symbol, for proper recycling. Correct disposal helps to protect the environment and human health.

19.5. Disposal of packing material



Dispose of packaging materials in an environmentally sound manner. Follow the notes and recycling symbols on the packaging and ensure plastic bags, cardboard, and other materials are collected for recycling.

20. WARRANTY & LIABILITY

NYMPH guarantees that for two years from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. This warranty does not affect the consumer's statutory rights under applicable EU consumer protection laws.

The warranty applies to products used for personal purposes and not for commercial or rental purposes. **NYMPH**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. No refunds shall be given. Your replacement unit will be returned to you at no charge and will be covered under this warranty for the remainder of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- Negligent use or misuse of the product.
- Using with incorrect voltage or current.
- Damage resulting from falls or impacts.
- Water damage.
- Use contrary to the operating instructions.
- Disassembly, repair, or modification by anyone other than **NYMPH**.
- Damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft.
- Damage caused by incorrect maintenance and storage.
- Damage caused by incorrect assembly.
- Damage caused by incorrect connections.
- Accessories such as batteries and fuses.
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields.
- Normal wear and tear.

Damage caused by failure to follow this manual's instructions will void the warranty. We do not accept any liability for consequential damage. We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In such cases, the warranty becomes void.

NYMPH reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in the user manual, colours, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other non-commercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us.

Luftdruck-Massagesystem

Modell Nymph 4-6-8



Diese Anleitung gehört zum Nymph 4-6-8 und enthält wichtige Informationen zur Installation, Sicherheit, Entsorgung und Verwendung. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, auch wenn Sie mit dem Produkt vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass diese Anleitung beigelegt wird, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

Die Abbildungen in der Anleitung dienen nur zu Illustrationszwecken und können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. In diesem Fall ist **NYMPH** nicht verpflichtet, die Anleitung zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Verwenden Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.



WICHTIG – VOR GEBRAUCH LESEN

Dieses Gerät ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa und für die intermittierende pneumatische Kompressionstherapie bestimmt.

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß und beachten Sie alle Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung.

NYMPH übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Verluste, die aus einer Verwendung entgegen dieser Anleitung, der Nichtbeachtung von Kontraindikationen, Warnhinweisen oder Vorsichtsmaßnahmen oder einer Verwendung außerhalb des bestimmungsgemäßen Zwecks resultieren.

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von **NYMPH** entschieden haben. Diese Anleitung enthält die Informationen, die für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts erforderlich sind.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und entspricht den geltenden europäischen gesetzlichen Anforderungen.

	CE-Kennzeichnung Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung, die bestätigt, dass es den einschlägigen europäischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz entspricht. Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die geltenden gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Union erfüllt.
	RoHS-Konformität Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), welche die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten beschränkt. Die Konformität stellt sicher, dass die Konzentrationen von Stoffen wie Blei, Quecksilber und Cadmium unter den zulässigen Grenzwerten liegen.
EMC	EMV-Konformität Dieses Produkt entspricht der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) (2014/30/EU). Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät in seiner Umgebung ordnungsgemäß funktioniert, ohne elektromagnetische Störungen zu verursachen oder von solchen beeinträchtigt zu werden.
MDR	MDR-Konformität Dieses Produkt entspricht der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR), die Anforderungen an die Sicherheit, Leistungsfähigkeit und klinische Bewertung von Medizinprodukten festlegt, die auf dem europäischen Markt in Verkehr gebracht werden. Die Konformität bestätigt, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte gemäß dem EU-Recht erfüllt.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung sowie alle unterstützenden Prüfberichte sind auf Anfrage erhältlich.

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Kauf!

2. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

	HINWEIS: Enthält wichtige Informationen oder nützliche Hinweise zur Verwendung des Produkts.
	GEFAHR: Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
	WARNUNG: Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	ACHTUNG: Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Die Sicherheitssymbole ersetzen die schriftlichen Sicherheitshinweise nicht. Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise genau.

Symbole für Medizinprodukte:

Symbol	Bezeichnung des Symbols	Bedeutung
	Seriennummer (SN)	Gibt die Seriennummer des Herstellers zur Produktidentifikation an.

	Chargencode (LOT)	Gibt den Chargen- oder Loscode des Herstellers an.
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union (EU REP)	Gibt den bevollmächtigten Vertreter innerhalb der Europäischen Union an.
	Herstellungsdatum	Gibt das Herstellungsdatum des Medizinprodukts an.
	CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der benannten Stelle	Gibt die Konformität mit den geltenden EU-Rechtsvorschriften an. Die Nummer identifiziert die benannte Stelle.
	Anwendungsteil des Typs BF	Gibt ein Anwendungsteil des Typs BF an, das Schutz gegen elektrischen Schlag bietet.
	Symbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte	Gibt an, dass das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.
	Nur für den Gebrauch in Innenräumen	Gibt an, dass das Gerät ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt ist.
	Gerät der Schutzklasse II	Gibt Gerät der Schutzklasse II mit doppelter oder verstärkter Isolierung zum Schutz gegen elektrischen Schlag an.
IP21	Schutzart IP21	Gibt den Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 12,5 mm sowie den Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen an.
	Hersteller	Gibt den rechtlichen Hersteller des Produkts an.

3. TERMINOLOGIE



HINWEIS:

In dieser Anleitung bezieht sich der Begriff „Nymph 4-6-8“ gemeinsam auf die Modelle Nymph 4, Nymph 6 und Nymph 8. Sofern nicht anders angegeben, bezeichnet dieser Begriff das vollständige Produkt einschließlich der Steuereinheit (Gerät) und des mitgelieferten Zubehörs wie der Fernbedienung und der Manschette mit Verbindungsschlauch. Wenn einzelne Komponenten beschrieben werden, werden diese mit ihren jeweiligen Bezeichnungen bezeichnet.

4. SICHERHEITSHINWEISE



Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitsinformationen in dieser Anleitung sorgfältig. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Elektrische Geräte und Batterien können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren darstellen. Dazu gehören unter anderem Verletzungen, Brände, elektrische Schläge oder Sachschäden. Behandeln Sie das Gerät stets sorgfältig und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Diese Anleitung enthält die Informationen, die für eine sichere Verwendung des Geräts erforderlich sind. Es können jedoch nicht alle möglichen Situationen oder Gefahren abgedeckt werden. Verwenden Sie das Gerät stets mit Vorsicht und befolgen Sie die bereitgestellten Anweisungen.

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen können Restrisiken bestehen bleiben.

Befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung, um das Risiko von Verletzungen, Schäden oder Fehlfunktionen zu verringern.

Wenn Sie Fragen haben, die in dieser Anleitung nicht behandelt werden, kontaktieren Sie uns bitte.

4.1. Kontraindikationen

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- auf offenen Wunden, Frakturen oder schwer verletzten Körperbereichen;
- auf Körperbereichen mit akuten Entzündungen oder Infektionen;
- wenn Sie an akuter Venenthrombose oder tiefer Thrombophlebitis leiden;
- wenn Sie an Lungenödem leiden;
- wenn Sie an schwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK) leiden.

Konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt, wenn Sie:

- schwanger sind;
- einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes elektronisches Gerät tragen;
- an Herzerkrankungen, Durchblutungsstörungen oder unkontrolliertem Bluthochdruck leiden;
- an Diabetes mit eingeschränktem Empfindungsvermögen oder peripherer Neuropathie leiden;
- sich einer Krebsbehandlung unterziehen;
- gerinnungshemmende Medikamente einnehmen;
- an einer anderen Erkrankung leiden, die durch Kompressionsmassage beeinflusst werden könnte.

4.2. Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie den Nymph 4-6-8 nicht für andere Zwecke als den bestimmungsgemäßen Gebrauch (siehe Kapitel „BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH“).
- Der Nymph 4-6-8 wurde für den Gebrauch im Haushalt entwickelt und ist nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Nutzung elektronischer Geräte nicht erlaubt ist.

- Der Nymph 4-6-8 ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig. Stöße, Schläge oder Stürze, selbst aus geringer Höhe, können das Gerät beschädigen.
- Stellen Sie den Nymph 4-6-8 nicht auf eine instabile Oberfläche. Dies kann zum Herunterfallen des Geräts und zu Fehlfunktionen führen.
- Drücken Sie die Manschette nicht zusammen.
- Setzen Sie den Nymph 4-6-8 keinen übermäßigen Vibrationen, Druckkräften, Stößen oder anderen mechanischen Belastungen aus.
- Setzen Sie sich nicht auf die Manschette.
- Das Gerät muss ordnungsgemäß und sicher angeschlossen werden. Befolgen Sie die Anweisungen, um mögliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör oder Aufsätze, die vom Hersteller für dieses Gerät geliefert oder empfohlen wurden. Ungeeignetes Zubehör oder ungeeignete Aufsätze können ein Risiko für den Benutzer darstellen und den Nymph 4-6-8 beschädigen.
- Führen Sie keine Gegenstände oder Finger in Öffnungen ein.
- Wenden Sie beim Betätigen der Tasten des Nymph 4-6-8 keine übermäßige Kraft an.
- Berühren Sie die Manschette nicht mit scharfen Gegenständen.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Anzeige aus und berühren Sie die Anzeige nicht mit scharfen Gegenständen.
- Stellen Sie niemals Gegenstände auf den Nymph 4-6-8.
- Lassen Sie den eingeschalteten Nymph 4-6-8 nicht unbeaufsichtigt. Eine sorgfältige Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von kleinen Kindern verwendet wird.
- Verwenden Sie den Nymph 4-6-8 nicht in der Nähe starker Magnetfelder, z. B. von Motoren, Transformatoren oder Mobiltelefonen.
- Verwenden Sie den Nymph 4-6-8 nicht in staubiger Umgebung.
- Wenn ein sicherer Betrieb des Nymph 4-6-8 nicht mehr möglich ist, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und sichern Sie es gegen unbeabsichtigte Verwendung. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Gerät:
 - sichtbare Beschädigungen aufweist;
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert;
 - über längere Zeit unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde;
 - oder starken Transportbelastungen ausgesetzt war.

4.3. Benutzer

- Der Nymph 4-6-8 ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Das Gerät darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Die Manschetten sind ausschließlich für erwachsene Benutzer ausgelegt. Die Verwendung durch Kinder kann zu Verletzungen führen.
- Lassen Sie Personen, die mit der Bedienung des Nymph 4-6-8 oder mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Gerät nicht verwenden.
- Das Gerät darf nur von Personen verwendet werden, die diese Anweisungen verstehen und sich der möglichen Gefahren bewusst sind.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie den Nymph 4-6-8 nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen.

4.4. Elektrische Sicherheit

- Sie dürfen den Nymph 4-6-8 nicht verändern, selbst reparieren oder zerlegen. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Wartung, Änderungen und Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Hersteller, eine vom Hersteller autorisierte Fachwerkstatt oder eine ähnlich qualifizierte Person durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie keinen anderen Netzstecker für dieses Gerät. Dies kann zu Fehlfunktionen und/oder Schäden führen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose die richtige Netzspannung liefert, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Nymph 4-6-8 befinden und leicht zugänglich sein.
- Um den Energieverbrauch und mögliche Sicherheitsrisiken zu reduzieren, ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird, während der Reinigung oder Wartung oder wenn eine Störung auftritt. Das

Gerät bleibt mit dem Stromnetz verbunden, solange der Netzstecker eingesteckt ist.

- Schalten Sie den Nymph 4-6-8 nicht durch Ein- oder Ausstecken des Netzsteckers ein oder aus. Verwenden Sie immer die EIN/AUS-Taste.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels niemals mit Gewalt in eine Steckdose. Wenn er nicht leicht eingesteckt werden kann, verwenden Sie ihn nicht weiter. Stellen Sie immer sicher, dass der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß mit der Steckdose verbunden ist.
- Falls während der Verwendung die Stromversorgung ausfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Rauch entsteht oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, schalten Sie den Nymph 4-6-8 sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen darf der Nymph 4-6-8 nicht verwendet werden, bevor er vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person überprüft wurde. Atmen Sie niemals Rauch aus einem möglichen Gerätebrand ein. Sollten Sie dennoch Rauch eingeatmet haben, konsultieren Sie einen Arzt. Das Einatmen von Rauch kann gesundheitsschädlich sein.
- Trennen Sie im Brandfall die Stromversorgung, sofern dies sicher möglich ist. Verwenden Sie geeignete Feuerlöschmittel und halten Sie einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei Gewitter immer den Netzstecker.

4.5. Netzkabel

- Rollen Sie das Netzkabel vor der Verwendung vollständig ab.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Netzkabel vor.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Netzkabel niemals, wenn Anzeichen von Beschädigungen vorhanden sind.
- Um Risiken zu vermeiden, darf ein beschädigtes Netzkabel nur durch den Hersteller, eine vom Hersteller autorisierte Fachwerkstatt oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen tödlichen Stromschlag verursachen. Schalten Sie zuerst die betreffende Steckdose spannungsfrei (z. B. über den entsprechenden Leitungsschutzschalter) und ziehen Sie anschließend den Netzstecker vorsichtig aus der Steckdose. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

- Ziehen Sie den Netzstecker niemals aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen. Ziehen Sie ihn immer an den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Steckdose.
- Tragen oder ziehen Sie den Nymph 4-6-8 nicht am Netzkabel.
- Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät. Dadurch verschleißt das Kabel vorzeitig und kann brechen.
- Stellen Sie sicher, dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängen.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt oder verdreht werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht, gebogen, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanischen Belastungen ausgesetzt wird.
- Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel.
- Entdrehen Sie das Netzkabel regelmäßig, wenn es sich durch den Gebrauch verdreht hat.
- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch extreme Hitze oder Kälte.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, das an die Steckdose angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die gesamte Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte die zulässige Belastbarkeit nicht überschreitet.
- Kinder können sich beim Spielen in Kabeln verfangen, wodurch Strangulationsgefahr besteht. Kabel sind kein Spielzeug.

4.6. Wärme & Belüftung

- Der Nymph 4-6-8 kann während des Betriebs warm werden. Dies ist normal.
- Decken Sie das Gerät oder die Belüftungsöffnungen während des Betriebs nicht ab, da der Nymph 4-6-8 sonst überhitzen kann. Dies kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Sorgen Sie während der Verwendung für eine ausreichende Belüftung rund um den Nymph 4-6-8.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen fern (z. B. Heizungen oder anderen Wärmequellen). Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von offenen Flammen (z. B. brennenden Kerzen) oder auf heißen Oberflächen.
- Das Nymph 4-6-8 und die Fernbedienung sind für einen optimalen Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C sowie für eine Lagerung bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C ausgelegt. Das Nymph 4-

6-8 und die Fernbedienung können beschädigt werden, und ihre Lebensdauer kann verkürzt werden, wenn die Geräte außerhalb dieses Temperaturbereichs verwendet oder gelagert werden. Setzen Sie die Geräte keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aus. Lagern Sie die Geräte nicht über längere Zeit in einem heißen Fahrzeug oder in direktem Sonnenlicht. Stellen Sie die Geräte nicht in die Nähe eines Fensters (insbesondere im Sommer).

4.7. Wasser

- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Der Kontakt mit Wasser kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder dauerhaften Schäden führen.
- Verwenden Sie den Nymph 4-6-8 niemals mit feuchten Händen. Feuchtigkeit kann Stromschläge oder Kurzschlüsse verursachen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken oder herausziehen. Feuchtigkeit kann Stromschläge oder Kurzschlüsse verursachen.
- Verwenden Sie den Nymph 4-6-8 nicht in oder in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines anderen mit Wasser gefüllten Behälters, wie beispielsweise eines Waschbeckens.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung. Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel, den Netzstecker, die Manschette oder die Fernbedienung nicht in Flüssigkeiten ein. Gießen Sie niemals Flüssigkeiten über oder in die Nähe des Nymph 4-6-8. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses. Falls Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und schalten Sie anschließend den Nymph 4-6-8 aus.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie das Gerät erst danach aus dem Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass der Nymph 4-6-8 auf einer trockenen Oberfläche aufgestellt wird.

4.8. Batteriesicherheit (Fernbedienung)

- Legen Sie die Fernbedienung nicht in die Nähe von Feuer oder in direktes Sonnenlicht. Durch die Erwärmung des Geräts kann sich die Batterie zusätzlich erhitzen, wodurch sie platzen oder explodieren kann.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie zu durchstechen, zu verändern oder zu zerlegen, da dies zu Brand, Explosion, Austritt von Chemikalien oder schweren Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie keine beschädigte oder verformte Batterie.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht, wenn die Batterie Gerüche abgibt, überhitzt oder ausläuft.
- Berühren Sie keine ausgetretenen Stoffe und atmen Sie keine Dämpfe ein, die von der Batterie ausgehen. Auslaufende oder beschädigte Batterien können Verätzungen der Haut verursachen. Tragen Sie daher geeignete Handschuhe.
- Die Batterie enthält gefährliche Stoffe. Öffnen Sie die Batterie nicht und führen Sie keine Gegenstände ein.
- Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterie trocken sind, wenn Sie die Batterie handhaben.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss. Ein Kurzschluss kann dazu führen, dass die Batterie explodiert oder ausläuft.
- Vermeiden Sie nach dem Entfernen der Batterie einen unbeabsichtigten Kurzschluss, indem Sie die Batteriepole nicht mit Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarnadeln oder Ringen) in Kontakt bringen. Wickeln Sie die Batterie nicht in Aluminiumfolie ein. Kleben Sie die Batteriepole ab oder legen Sie Batterien vor der Entsorgung einzeln in einen Kunststoffbeutel.
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen und vermeiden Sie Stöße.
- Suchen Sie im Falle des Verschluckens einer Batterie sofort einen Arzt auf oder wenden Sie sich an die örtliche Giftnotrufzentrale.
- Reinigen Sie die Batteriekontakte und die Kontakte des Geräts vor dem Einsetzen der Batterie.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit der richtigen Polarität (+ und -) eingesetzt ist.
- Prüfen Sie die Fernbedienung und stellen Sie sicher, dass das Batteriefach ordnungsgemäß gesichert ist, z. B. dass die Schraube oder eine andere mechanische Befestigung fest angezogen ist. Falls das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht weiter und halten Sie sie von Kindern fern.

- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie derselben Größe und desselben Typs.
- Verwenden Sie die Batterie innerhalb der empfohlenen Nutzungsdauer.
- Verhindern Sie, dass Kinder oder Tiere mit der Batterie in Kontakt kommen.

4.9. Restrisiken

Trotz der Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen können bei der Verwendung des Nymph 4-6-8 bestimmte Restrisiken bestehen bleiben.

- Vorübergehende Beschwerden, Hautreizungen, Rötungen, Taubheitsgefühle oder Druckstellen infolge längerer Verwendung oder zu hoher Druckeinstellungen.
- Beschwerden oder Verletzungen infolge einer falschen Positionierung oder eines falschen Sitzes der Manschetten.
- Verminderte Durchblutung, Schmerzen oder körperliche Beschwerden infolge einer zu langen Behandlungsdauer oder ungeeigneter Druckeinstellungen.
- Stromschläge, Überhitzung oder Brandgefahr infolge beschädigter Kabel, beschädigter Komponenten, unsachgemäßer Reparaturen, Kontakt mit Flüssigkeiten oder Fehlgebrauch des Geräts.
- Stolpergefahr durch Schläuche, Kabel oder angeschlossene Manschetten während der Verwendung oder Lagerung.
- Beschädigungen an Manschetten, Schläuchen, Anschlüssen oder der Steuereinheit durch scharfe Gegenstände, übermäßiges Biegen, Ziehen, Verdrehen, Quetschen oder unsachgemäße Lagerung.
- Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung durch Personen mit medizinischen Kontraindikationen, einschließlich Durchblutungsstörungen, Thrombosen, schwerem Bluthochdruck, implantierten medizinischen Geräten oder anderen in dieser Anleitung genannten Erkrankungen.
- Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung durch Kinder, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die die Anweisungen nicht verstehen oder Beschwerden nicht mitteilen können.

Befolgen Sie stets alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, um diese Risiken zu minimieren.

4.10. Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch

Die folgenden Verwendungen gelten als vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch und müssen vermieden werden:

- Verwendung des Geräts für andere Zwecke als die intermittierende pneumatische Kompressionstherapie mit den mitgelieferten Kompressionsmanschetten.
- Verwendung des Geräts bei Säuglingen, Kindern, Haustieren oder Personen, die das Gerät nicht sicher bedienen oder Beschwerden nicht mitteilen können.
- Verwendung des Geräts während des Schlafens, bei Bewusstlosigkeit oder unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder anderen Substanzen, die das Bewusstsein oder die Empfindungsfähigkeit beeinträchtigen können.
- Verwendung des Geräts mit beschädigten Manschetten, Schläuchen, Anschlüssen, Kabeln, Steckern oder anderen Komponenten.
- Verwendung des Geräts in feuchter Umgebung, in der Nähe von Wasser oder mit nassen Händen.
- Abdecken der Steuereinheit während des Betriebs oder Blockieren der Belüftungsöffnungen.
- Ziehen, Verdrehen, starkes Biegen, Quetschen oder Betreten von Schläuchen oder Netzkabeln.
- Trennen der Manschetten oder Schläuche, während das Gerät in Betrieb oder unter Druck steht.
- Verwendung von Druckeinstellungen, Behandlungsdauern oder Programmen, die Schmerzen, Taubheitsgefühle oder erhebliche Beschwerden verursachen.
- Verwendung des Geräts trotz bekannter Kontraindikationen, Erkrankungen, Verletzungen oder ärztlicher Anweisung, keine Kompressionstherapiegeräte zu verwenden.
- Versuch, das Gerät oder Zubehör zu öffnen, zu verändern, zu reparieren oder zu zerlegen.
- Einführen von Fremdkörpern in die Steuereinheit, Anschlüsse, Belüftungsöffnungen oder andere Öffnungen des Geräts.
- Verwendung nicht zugelassener Zubehöerteile, Ersatzteile, Netzkabel oder Aufsätze.
- Stehen, Gehen oder Herumbewegen, während man mit den Kompressionsmanschetten verbunden ist.
- Verwendung des Produkts im Freien oder Aussetzen gegenüber direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Hitze, offenen Flammen oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Ein solcher Fehlgebrauch kann zu Verletzungen, Brandgefahr oder Schäden am Gerät führen.

4.11. Medizinische Hinweise

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa zur intermittierenden pneumatischen Kompressionstherapie. Es darf nur entsprechend seiner Zweckbestimmung verwendet werden und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose, Überwachung oder Behandlung.

Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts einen Arzt, wenn Sie:

- an Durchblutungsstörungen, Gefäßerkrankungen, Krampfadern, Diabetes, schwerem Bluthochdruck oder Herzerkrankungen leiden;
- implantierte medizinische Geräte wie einen Herzschrittmacher haben;
- schwanger sind oder sich kürzlich einer Operation unterzogen haben;
- unter chronischen Schmerzen, Taubheitsgefühlen, verminderter Empfindlichkeit oder Hauterkrankungen leiden;
- sich in medizinischer Behandlung befinden oder andere gesundheitliche Bedenken haben.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf verletzten, geschwollenen, infizierten, entzündeten oder empfindlichen Körperbereichen, es sei denn, dies wurde von einer qualifizierten medizinischen Fachkraft genehmigt.

Beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort und holen Sie medizinischen Rat ein, wenn während oder nach der Verwendung Schmerzen, Schwindel, Taubheitsgefühle, Hautverfärbungen, ungewöhnliche Schwellungen, Atembeschwerden oder andere ungewöhnliche körperliche Reaktionen auftreten.

Die Benutzer sind selbst dafür verantwortlich festzustellen, ob dieses Produkt für ihren individuellen körperlichen Zustand geeignet ist.

5. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Nymph 4-6-8 ist für die intermittierende pneumatische Kompressionstherapie mit aufblasbaren Kompressionsmanschetten für Beine, Arme, Taille oder den Unterkörper bestimmt. Das Gerät erzeugt eine sequentielle Luftdruckkompression.

Das Gerät dient zur Unterstützung der Durchblutung sowie zur vorübergehenden Linderung leichter Muskelbeschwerden und Ermüdungserscheinungen.



WARNUNG:

Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Eine Verwendung außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder entgegen den Anweisungen kann zu verminderter Leistung, Schäden am Gerät oder Sicherheitsrisiken führen.

6. LIEFERUMFANG

6.1. Inhalt

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

- 1x Nymph 4-6-8
- 1x Fernbedienung (ohne Batterie)
- 1x Luftschlauchset
- 1x Manschette
- 1x Tragetasche
- 1x Schultergurt für die Tragetasche
- 1x Anleitung



HINWEIS:

Aufgrund von Transport- und Verpackungsanforderungen können einige Zubehörteile zerlegt geliefert werden. Befolgen Sie die Montageanweisungen sorgfältig.

6.2. Auspacken

Entfernen Sie alle Teile aus der Verpackung und prüfen Sie diese auf Beschädigungen. Verwenden Sie den Nymph 4-6-8 nicht, wenn Beschädigungen festgestellt werden. Seien Sie beim Öffnen der Verpackung besonders vorsichtig, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Prüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob die Lieferung vollständig ist und sich alle Teile in einwandfreiem Zustand befinden. Kontaktieren Sie uns, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist.

Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliches Verpackungsmaterial.



HINWEIS:

Dieses Gerät wurde zum Schutz während des Transports verpackt. Bewahren Sie den Originalkarton und andere Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort auf, um Schäden am Gerät zu vermeiden, falls es zukünftig transportiert werden muss. Wenn Sie die Verpackung entsorgen, stellen Sie bitte sicher, dass sie ordnungsgemäß recycelt wird.

6.3. Sicherheit beim Auspacken

Lassen Sie Verpackungsmaterialien und Zubehör während des Auspackens nicht achtlos herumliegen. Sie können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



WARNUNG: Erstickungsgefahr

Halten Sie Plastiktüten und Folien außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Dünne Folien können an Nase und Mund haften bleiben und die Atmung behindern.





WARNUNG: Strangulationsgefahr

Kabel und Schläuche mit einer Länge von mehr als 22 cm können für Babys und sehr kleine Kinder gefährlich sein.

Kinder können sich beim Spielen im Netzkabel oder in den Schläuchen verfangen. Lassen Sie das Zubehör während des Auspackens nicht herumliegen.



WARNUNG: WARNUNG: Knopfzellenbatterie.

Die Fernbedienung wird ohne die erforderliche Knopfzellenbatterie geliefert. Seien Sie beim Auspacken und/oder Einsetzen von Batterien vorsichtig. Knopfzellenbatterien sind klein und sehr leistungsstark. Für Kinder können sie wie Süßigkeiten oder Münzen aussehen und leicht verschluckt werden.

- Bewahren Sie neue und gebrauchte Knopfzellenbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Eine verschluckte Knopfzellenbatterie kann bereits innerhalb von zwei Stunden innere Verätzungen verursachen und zum Tod führen.
- Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder in eine Körperöffnung eingeführt wurde.
- Entsorgen Sie gebrauchte Knopfzellenbatterien sofort.



7. TECHNISCHE DATEN



HINWEIS:

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Produkts können die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produkt	Luftkompressionsmassagesystem		
Modell	Nymph 4	Nymph 6	Nymph 8
Marke	Nymph		
Farbe	Schwarz		
Material	Hartkunststoff		
Anzahl der Luftkammern	4	6	8
Anzahl der Programme	6 (A - F)		
Leistung	65 W		
Eingangsspannung	220 - 240 V		
Frequenz	50/60 Hz		
Schutzklasse (Gerät)	Klasse I 		
Sicherung	T3.15A, 5 × 20 mm		
Netzkabellänge	1,5 m		
Timereinstellung	1 - 90 min		
Pumpenleistung	20 - 25 l/min		
Druck	30 - 240 mmHg (30 mmHg Schritte)		
Betriebstemperatur	10 - 40 °C		
Lagertemperatur	10 - 40 °C		
Betriebsfeuchtigkeit	30 - 85 % RH		
Lagerfeuchtigkeit	30 - 85 % RH		

Stromversorgung der Fernbedienung	CR2032 (Knopfzellenbatterie)
IP-Schutzart	IP 21
Gewicht	2,3 kg
Abmessungen	300 × 237 × 126 mm

Produktidentifikation:

Marke	Nymph		
Modell	Nymph 4	Nymph 6	Nymph 8
OEM-Hersteller	Xiamen Weiyu Intelligent Technology Co., Ltd., Xiamen, China		
OEM-Modell	VU-NIPC02	VU-IPC04	VU-IPC06



HINWEIS:

Das Produktidentifikations- und Typenschild befindet sich am Gerät. Dieses Schild enthält wichtige Informationen wie die Modellnummer und die elektrischen Kenndaten.

MDR-Konformität:

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa und entspricht der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR), die Anforderungen an die Sicherheit, Leistungsfähigkeit und klinische Bewertung von Medizinprodukten festlegt, die auf dem europäischen Markt in Verkehr gebracht werden. Die Konformität bestätigt, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte gemäß dem EU-Recht erfüllt.

Notified Body (Benannte Stelle):

Notified Body 0598 – SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland
Tel.: +358 9 696 361
www.sgs.fi
Unternehmens-ID 0634247-4

Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union (EU REP):



SUNGO Cert GmbH
Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf, Deutschland

8. PRODUKTTEILE

8.1. Die Steuereinheit

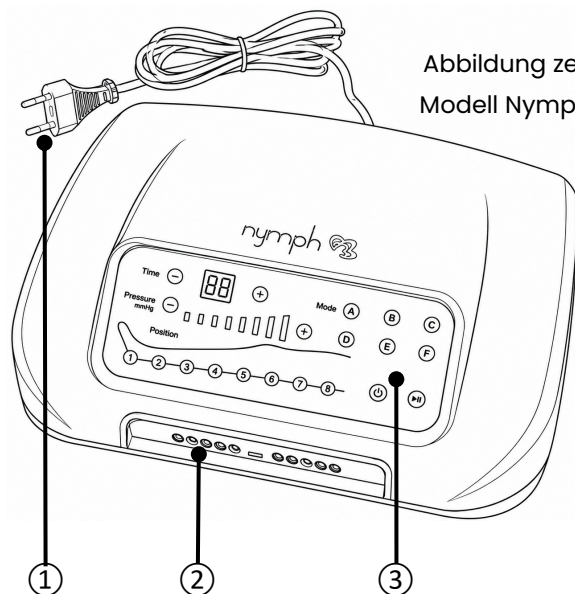


Abbildung zeigt:
Modell Nymph 8.

- ① Netzkabel
- ② Anschlussbuchse für Mehrfachstecker
- ③ Bedienfeld

8.2. Das Bedienfeld

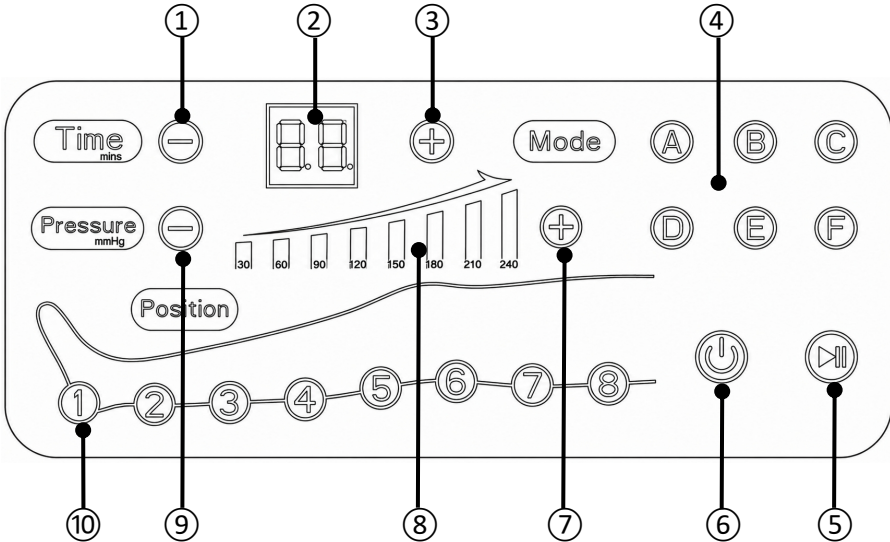


Abbildung zeigt: Modell Nymph 8.

- ① Taste zum Verringern der Zeit
- ② Anzeige der verbleibenden Zeit (1 – 90 Minuten)
- ③ Taste zum Erhöhen der Zeit
- ④ Programmtasten (A, B, C, D, E, F)
- ⑤ Start-/Pause-Taste
- ⑥ EIN/AUS-Taste
- ⑦ Taste zum Erhöhen des Drucks
- ⑧ Druckanzeige (8 Stufen: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 mmHg)
- ⑨ Taste zum Verringern des Drucks
- ⑩ Positions-/Kammertasten
 - Nymph 4: 1, 2, 3, 4
 - Nymph 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Nymph 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

8.3. Die Fernbedienung

- ① Taste zum Verringern der Zeit
- ② Taste zum Erhöhen der Zeit
- ③ Taste zum Verringern des Drucks
- ④ Taste zum Erhöhen des Drucks
- ⑤ Positions-/Kammertasten
 - Nymph 4: 1, 2, 3, 4
 - Nymph 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Nymph 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- ⑥ Modustaste
- ⑦ Start-/Pause-Taste


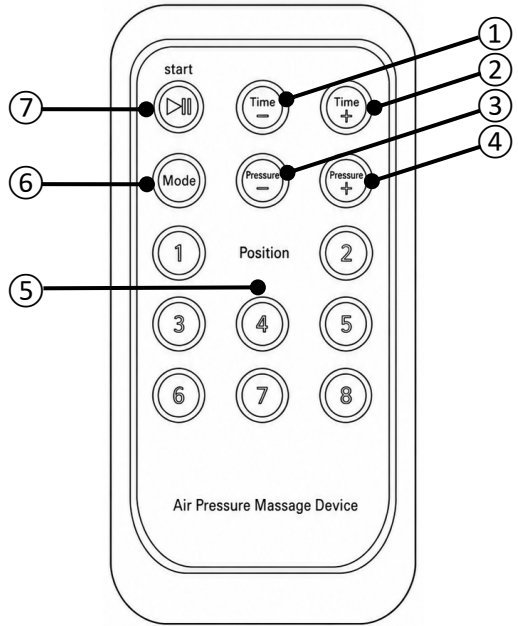


Abbildung zeigt: Modell Nymph 8.

9. MASSAGEPROGRAMME A–F

Die Luftkammern in den Beinmanschetten werden entsprechend dem ausgewählten Programm aufgeblasen und entleert. Dadurch entsteht eine sequentielle Kompressionsmassage, die darauf ausgelegt ist, Komfort und Entspannung zu fördern. Die Behandlungsdauer, die Druckstufe und zusätzliche Einstellungen können jederzeit während der Sitzung angepasst werden.

- A** Normal
- B** Sequentielle Kompression
- C** Doppelwelle
- D** Vollständige Kompression
- E** Sequentielle Kompression + Doppelwelle
- F** Normal + Doppelwelle + vollständige Kompression

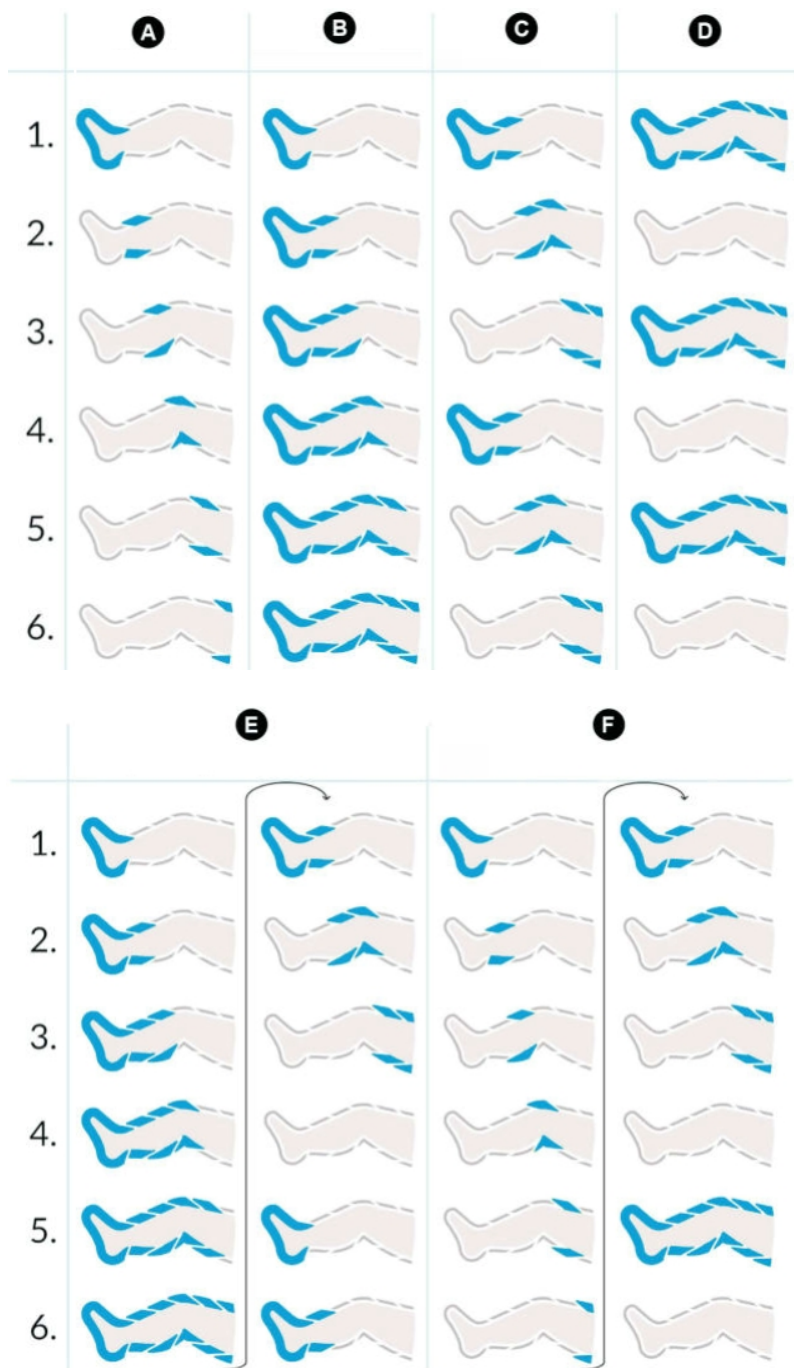

10. VORTEILE DER KOMPRESSIOMASSAGE

Das Gerät bietet eine sequentielle Kompressionsmassage mit mehreren Luftkammern, die entsprechend dem ausgewählten Programm aufgeblasen und entleert werden. Dadurch entsteht eine sanfte Druckmassage, die darauf ausgelegt ist, Komfort und Entspannung zu fördern.

Mögliche Vorteile einer regelmäßigen Anwendung sind:

- Linderung des Gefühls von müden oder schweren Beinen nach langem Stehen, Sitzen oder alltäglichen Aktivitäten.
- Mehr Komfort und Entspannung nach körperlicher Aktivität oder sportlicher Betätigung.
- Ein wohltuendes Massageerlebnis für Beine oder Arme.
- Vorübergehende Linderung von Muskelverspannungen und körperlicher Ermüdung.
- Mehr Komfort während Ruhe- und Erholungsphasen.



HINWEISE:

- Die oben beschriebenen Vorteile dienen der Unterstützung der Kompressionstherapie, und individuelle Erfahrungen können unterschiedlich sein.
- Dieses Medizinprodukt ist für die intermittierende pneumatische Kompressionstherapie bestimmt, wie in dieser Anleitung beschrieben. Es ersetzt keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung.


11. BEDIENUNG

11.1. Vor der ersten Verwendung



ERSTE VERWENDUNG:

Öffnen Sie die Filterabdeckung und entfernen Sie die Transportschraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Die Schraube schützt die Steuereinheit während des Transports und darf nicht wieder eingebaut werden.

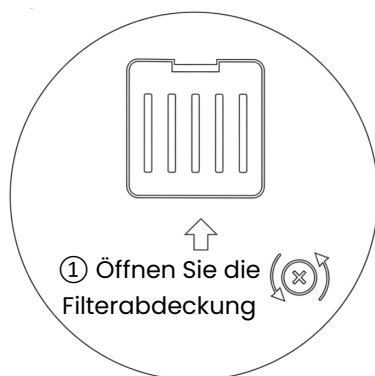


② Entfernen Sie die Transportschraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn

Falls die Fernbedienung mit einem Batterie-Isolierstreifen ausgestattet ist, entfernen Sie diesen vor der ersten Verwendung. Falls die Batterie nicht eingesetzt ist (zum Beispiel aufgrund von Transportvorschriften), setzen Sie eine CR2032-Batterie in das Batteriefach ein.

11.2. Anschließen des Systems



Schritt 1

Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete 220–240-V-Steckdose an.

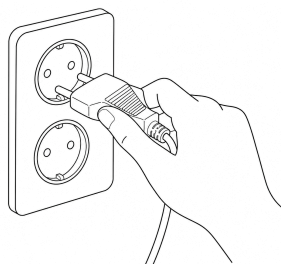

Schritt 2

Prüfen Sie, ob der Luftschlauch korrekt mit der/den Manschette(n) verbunden ist. Falls dies bereits der Fall ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Falls nicht, stecken Sie die Schlauchstifte in die Anschlüsse der Manschette(n).

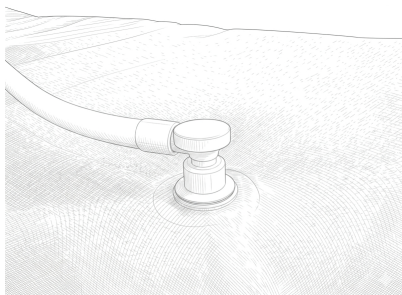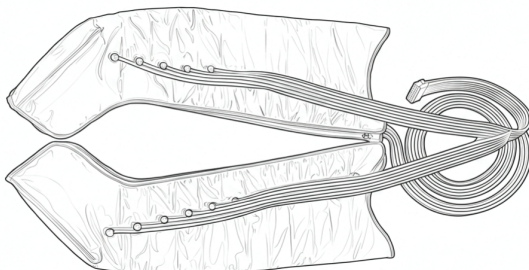

Schritt 3

Verbinden Sie den Hauptanschluss des Luftschlauchs mit der Steuereinheit.

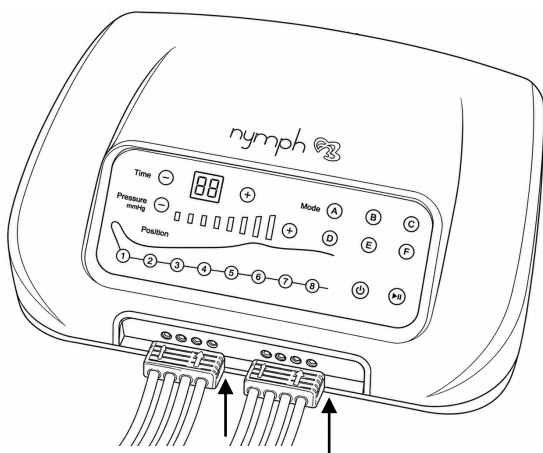


Abbildung zeigt: Modell Nymph 8.

Schritt 4

Prüfen Sie, ob alle Verbindungen fest sitzen und luftdicht sind.

Schritt 5

Legen Sie die Manschette(n) an.

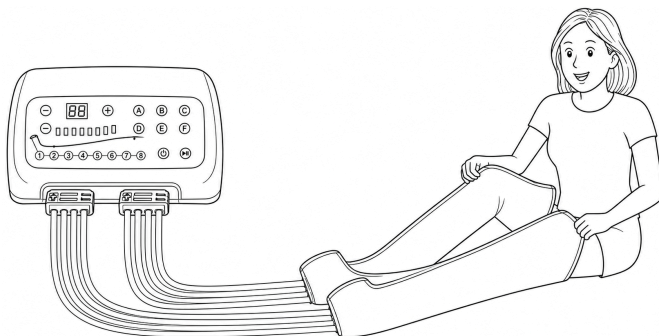


Abbildung zeigt: Modell Nymph 8.



HINWEIS:

Es wird empfohlen, das Gerät einzuschalten, bevor die Manschetten befestigt werden.

11.3. Starten einer Behandlungssitzung

Schritt 6

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Schritt 7

Stellen Sie den gewünschten Druck mit den Tasten + und – ein. Die verfügbaren Druckstufen sind 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 und 240 mmHg. Es wird empfohlen, während der ersten Anwendungen mit einer niedrigeren Druckeinstellung zu beginnen und den Druck entsprechend den persönlichen Vorlieben und dem Komfort schrittweise zu erhöhen.



HINWEIS:

Für Erstanwender wird eine Druckeinstellung von 120 mmHg oder 150 mmHg empfohlen. Erhöhen Sie den Druck schrittweise, wenn dies angenehm ist.

Schritt 8

Stellen Sie die Behandlungsdauer mit den Tasten + und - ein. Der verfügbare Bereich beträgt 1–90 Minuten. Die Standardeinstellung beträgt 30 Minuten. Drücken Sie kurz, um die Zeit in 1-Minuten-Schritten anzupassen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell zu ändern. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer null erreicht.

11.4. Auswahl eines Programms

Schritt 9

Wählen Sie das gewünschte Programm durch Drücken von A, B, C, D, E, oder F aus.

(siehe Kapitel „MESSAGEPROGRAMME A–F“)

11.5. Aktivieren und Deaktivieren von Kammern

Schritt 10

Aktivieren oder deaktivieren Sie einzelne Kammern durch Drücken der entsprechenden Kammernummer. Standardmäßig sind alle Kammern aktiviert und die Kontrollanzeigen leuchten. Drücken Sie eine Kammernummer einmal, um die betreffende Kammer zu deaktivieren und die Kontrollanzeige auszuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Kammer wieder zu aktivieren und die Kontrollanzeige wieder einzuschalten. Die Kontrollanzeige einer Kammer blinkt, während diese Kammer aufgeblasen oder entleert wird.

11.6. Starten des Programms

Schritt 11

Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um die Behandlungssitzung zu beginnen. Standardmäßig befindet sich das Gerät im Pausenmodus und die Kontrollleuchte leuchtet grün. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um die Behandlung zu starten. Während der Behandlung leuchtet die Kontrollleuchte blau.



HINWEIS:

Zu Beginn der Behandlung kann die Aufblaszeit länger sein, da die Manschetten aus einem vollständig entleerten Zustand gefüllt werden müssen.



ACHTUNG:

- Entfernen Sie die Manschetten nicht, während das Gerät in Betrieb ist. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Manschetten abnehmen oder trennen.
- Beenden Sie die Behandlung und konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn während oder nach der Behandlung Schmerzen, Blutergüsse oder Reizungen auftreten.

Empfohlene Sitzungsdauer

Für Erstanwender wird empfohlen, mit einer kurzen Sitzung von etwa 10 bis 20 Minuten zu beginnen.

Wenn die Anwendung angenehm ist, kann die Sitzungsdauer bei zukünftigen Anwendungen schrittweise entsprechend den persönlichen Vorlieben und dem persönlichen Komfort erhöht werden.

Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Beschwerden, Schmerzen, Schwindel, Taubheitsgefühle oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten.

11.7. Nach der Verwendung

Die Behandlungssitzung endet automatisch, wenn der Timer null erreicht. Sie können die Sitzung auch jederzeit durch Drücken der Start/Pause-Taste oder durch Ausschalten des Geräts beenden.



ACHTUNG:

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Manschetten entfernen oder Schläuche trennen.

Nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde, öffnen und entfernen Sie die Manschetten. Falls erforderlich, drücken Sie die Luftpumpen vorsichtig von Hand zusammen, um verbleibende Luft abzulassen und das Entleeren zu beschleunigen.

Um die Luftschlaucheinheit von der Steuereinheit zu trennen, drücken Sie die beiden Entriegelungsclips an beiden Seiten des Hauptanschlusses. Halten Sie die Clips gedrückt und ziehen Sie den Anschluss gerade aus der Steuereinheit heraus. Die Manschetten und der Luftschlauch sollten normalerweise als eine Einheit aufbewahrt werden. Vermeiden Sie es, den Schlauch unnötig von den Manschetten zu trennen, da wiederholtes Trennen die Schlauchanschlüsse oder Schlauchstifte beschädigen kann.

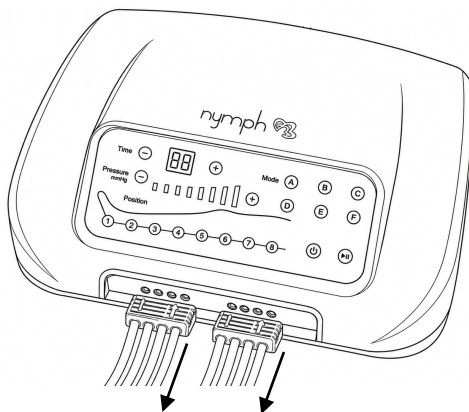
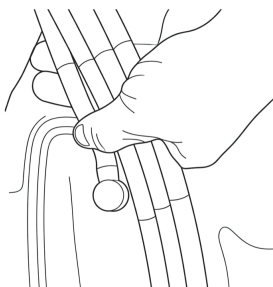


Abbildung zeigt: Modell Nymph 8.

**HINWEIS:**

Für den Transport oder die Lagerung kann der Luftschlauch von den Manschetten getrennt werden, um weniger Stauraum zu benötigen.

**Schritt 1**

Ziehen Sie nicht am Schlauch.

**Schritt 2**

Halten Sie die Anschlussstifte fest und ziehen Sie sie gerade aus dem Manschettenanschluss heraus.

12. VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

- Erste Verwendung: Falls die Fernbedienung mit einem Batterie-Isolierstreifen ausgestattet ist, entfernen Sie diesen vor der ersten Verwendung. Falls die Batterie nicht eingesetzt ist (zum Beispiel aufgrund von Transportvorschriften), setzen Sie eine CR2032-Batterie in das Batteriefach ein.
- Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger am Bedienfeld des Nymph 4-6-8. Für eine optimale Leistung stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den IR-Empfänger ausgerichtet ist. Verwenden Sie die Tasten der Fernbedienung, um den Nymph 4-6-8 zu steuern.
- Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 5 Meter.
- Falls die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte durch:
 - Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Nymph 4-6-8.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Nymph 4-6-8.
 - Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue Batterie.
 - Kontaktieren Sie uns, falls das Problem dadurch nicht behoben wird.



HINWEISE:

- Entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzfolie von der Fernbedienung.
- Die Fernbedienung bietet Zugriff auf alle Funktionen des Bedienfelds des Nymph 4-6-8.

13. VERWENDUNG DER MANSCHETTEN

Vorbereitung vor der Verwendung:

- Tragen Sie für Komfort und Hygiene leichte Kleidung unter den Kompressionsmanschetten. Die Kleidung sollte sauber, bequem und frei von Knöpfen, Reißverschlüssen oder anderen harten Gegenständen sein, die während der Verwendung Beschwerden verursachen könnten.
- Entfernen Sie Uhren, Armbänder, Ringe oder anderen Schmuck, bevor Sie Arm- oder Beinmanschetten verwenden.

Empfohlene Positionen:

- Stellen Sie die Steuereinheit auf eine stabile, ebene Fläche, die während des Betriebs leicht erreichbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Luftschläuche nicht verdreht, geknickt oder blockiert sind.
- Beinmanschetten können im Sitzen oder Liegen verwendet werden. Für zusätzlichen Komfort im Sitzen können die Beine leicht hochgelagert werden.
- Hosenmanschetten sollten im Liegen auf einem Bett, Sofa oder einer ähnlichen ebenen Fläche verwendet werden. Die Verwendung von Hosenmanschetten im Sitzen kann Falten in den Manschetten verursachen, die die Aufblasleistung beeinträchtigen können.
- Armmanschetten können im Sitzen oder Liegen verwendet werden, wobei der Arm in einer bequemen Position abgestützt wird.
- Bleiben Sie während der Verwendung entspannt und vermeiden Sie übermäßige Bewegungen, die den Aufblas- und Entleerungszyklus der Kompressionsmanschetten beeinträchtigen könnten.



WARNUNG:

Gehen Sie nicht, laufen Sie nicht, steigen Sie keine Treppen und führen Sie keine anderen Aktivitäten aus, während Sie Beinmanschetten oder Hosenmanschetten tragen und das Gerät in Betrieb ist. Die Manschetten schränken die natürliche Bewegungsfreiheit ein und können das Risiko von Stolpern, Stürzen, Gleichgewichtsverlust oder Verletzungen erhöhen. Bleiben Sie immer sitzen oder liegen, solange die Manschetten aufgeblasen sind und verwendet werden.

**ACHTUNG:**

Blasen Sie eine Manschette nur auf, wenn sie ordnungsgemäß am vorgesehenen Körperbereich getragen wird. Verwenden Sie das System nicht mit einer nicht getragenen Manschette oder mit geöffneten Reißverschlüssen. Dies kann die Leistung beeinträchtigen und die Kompressionsmanschette beschädigen.

14. FEHLERBEHEBUNG

① Das Gerät schaltet sich nicht ein

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest mit der Steuereinheit verbunden und an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist.
2. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschaltet, trennen Sie es von der Stromversorgung. Drehen Sie das Gerät um und entfernen Sie mit einem Schraubendreher den mit "FUSE" gekennzeichneten Sicherungshalter. Prüfen Sie, ob die Sicherung intakt ist.
3. Wenn die Sicherung intakt ist, setzen Sie den Sicherungshalter wieder ein und wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn die Sicherung defekt ist, ersetzen Sie sie durch eine träge Sicherung (T3.15A, 5 × 20 mm).

② Die Manschetten werden in der falschen Reihenfolge aufgeblasen

1. Stellen Sie sicher, dass der Mehrfachstecker in der richtigen Ausrichtung in die Steuereinheit eingesteckt ist. Der Stecker ist korrekt eingesetzt, wenn die Verriegelungslaschen mit den Öffnungen über den Luftauslässen ausgerichtet sind.

③ Die Steuereinheit ist ungewöhnlich laut

1. Stellen Sie sicher, dass die Transportschraube vor der Verwendung des Geräts entfernt wurde.
2. Drehen Sie das Gerät um und öffnen Sie die Filterabdeckung an der Unterseite der Einheit.
3. Entfernen Sie die Transportschraube und entsorgen Sie sie.
4. Starten Sie das Gerät neu und prüfen Sie, ob der Geräuschpegel wieder normal ist.

15. REINIGUNG

- Für die Reinigung der Außenseite der Steuereinheit wird ein sauberes, weiches und trockenes Tuch empfohlen.
- Waschen Sie die Manschetten nicht. Wischen Sie sie vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.
- Üben Sie beim Reinigen keinen zu starken Druck auf die Anzeige und die Tasten aus.
- Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung.
- Tauchen Sie den Nymph 4-6-8 nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Die Steuereinheit darf nicht mit Wasser abgespült werden, um zu verhindern, dass Wasser in den elektrischen Schaltkreis eindringt und Fehlfunktionen verursacht.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese in das Gehäuse eindringen und die Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie keine scheuernden Gegenstände zur Reinigung.
- Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

16. WARTUNG & SERVICE

- Der Nymph 4-6-8 ist wartungsfrei außer hinsichtlich der Reinigung.
- Sie dürfen den Nymph 4-6-8 nicht verändern, selbst reparieren oder zerlegen.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller empfohlene Teile.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen und starken Verschleiß.



WARNUNGEN:

- Versuchen Sie nicht, den Nymph 4-6-8 für Wartungsarbeiten zu öffnen. Das Entfernen des Gehäuses oder eine unsachgemäße Montage kann Stromschläge, Schäden, Kurzschlüsse oder Brände verursachen.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund das Gehäuse öffnen, erlischt die Garantie. Der Nymph 4-6-8 enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Nur die Batterie der Fernbedienung kann ausgetauscht werden.
- Wartung, Service und Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller, eine vom Hersteller autorisierte Fachwerkstatt oder eine ähnlich qualifizierte Person durchgeführt werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Wartung oder Service zuerst unter info@nymph.be.

- Kontaktieren Sie uns über die oben genannte E-Mail-Adresse, wenn Zubehörteile wie die Anleitung oder andere Teile fehlen.
- Senden Sie das Produkt im Falle eines Defekts in der Originalverpackung zusammen mit einer Fehlerbeschreibung, dem Kaufnachweis und sämtlichem Zubehör an **NYMPH** zurück.

17. LAGERUNG

- Wir empfehlen, die Nymph 4-6-8 vor einer längeren Lagerung zu reinigen (siehe Kapitel „REINIGUNG“).
- Bewahren Sie den Nymph 4-6-8 vorzugsweise in der Originalverpackung auf.
- Lagern Sie keine nassen Teile, da sich Schimmel oder Rost bilden kann.
- Lagern Sie das Nymph 4-6-8 an einem staubfreien Ort, der weder Sonnenlicht noch Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Lagern Sie den Nymph 4-6-8 nicht bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Bewahren Sie den Nymph 4-6-8 außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung vor einer längeren Lagerung.
- Wickeln Sie das Netzkabel locker auf, aber nicht um das Gerät herum.
- Falten Sie die Manschetten sorgfältig zusammen und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf, da dies die Manschetten oder Luftkammern beschädigen kann.
- Legen Sie die Manschetten (einschl. Schläuche) zur Lagerung übereinander. Rollen Sie sie anschließend locker zusammen. Für den Transport oder die Lagerung kann der Luftschlauch von den Manschetten getrennt werden, um weniger Stauraum zu benötigen.

18. TRANSPORT

- Setzen Sie die Transportschraube wieder ein. Die Transportschraube ist ausschließlich für den Transport vorgesehen und darf während des normalen Betriebs nicht wieder eingebaut werden.
- Während des Transports:
 - Vermeiden Sie unnötige Stöße und Erschütterungen.
 - Lassen Sie den Nymph 4-6-8 nicht fallen.
 - Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
 - Schützen Sie den Nymph 4-6-8 vor Vibrationen.
 - Schützen Sie die Manschetten vor Beschädigungen durch Durchstiche.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung.

- Nach einem Transport oder einer Lagerung bei sehr niedrigen Temperaturen muss sich der Nymph 4-6-8 aufgrund möglicher Kondensationsbildung etwa 30 Minuten an die Raumtemperatur anpassen. Danach kann das Gerät verwendet werden.

19. ENTSORGUNG & RECYCLING

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsvoll.

19.1. Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEE)



Mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnete Produkte unterliegen der getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (EEE) und den geltenden nationalen Vorschriften.

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät stattdessen zu:

- einer autorisierten kommunalen Sammelstelle oder
- einem Händler beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts.

Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung trägt dazu bei, Umweltschäden zu vermeiden und eine fachgerechte Wiederverwertung wertvoller Materialien zu ermöglichen.



HINWEIS:

Eine unsachgemäße Entsorgung kann nach nationalem Recht zu Sanktionen führen.

19.2. Frankreich – Triman-Kennzeichnung

Wird dieses Produkt in Frankreich verkauft, gelten die Entsorgungsanweisungen gemäß der Triman-Gesetzgebung. Befolgen Sie die örtlichen Sammelhinweise, wie sie durch das Triman-Logo und die offiziellen französischen Entsorgungsanweisungen angegeben werden.



Alle Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Sie müssen entsprechend den geltenden französischen Vorschriften und den örtlichen Sammelanweisungen sortiert und den geeigneten Recyclingströmen zugeführt werden.




19.3. Deutschland (ElektroG §18(4))

Für in Deutschland verkaufte Produkte sind die folgenden zusätzlichen Verbraucherinformationen erforderlich:

- Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Batterien und Lampen, die ohne Beschädigung entfernt werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen werden.
- Verbraucher können Altgeräte kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
- Rücknahmepflichten für Händler in Deutschland:

- 1:1-Rücknahme: Beim Kauf eines neuen Geräts derselben Art muss das Altgerät kostenlos zurückgenommen werden.
- 0:1-Rücknahme: Kleingeräte (Außenmaß < 25 cm) können auch ohne Neukauf zurückgegeben werden, bis zu drei Geräte pro Geräteart.
- Gilt für stationäre Händler mit einer Verkaufsfläche von $\geq 400 \text{ m}^2$ für Elektro- und Elektronikgeräte sowie für Fernabsatzhändler, deren Lager- oder Versandflächen für solche Waren $\geq 400 \text{ m}^2$ betragen.
- Verbraucher sind dafür verantwortlich, alle personenbezogenen Daten von den Geräten zu löschen, bevor sie diese zurückgeben.
- Deutschland meldet jährlich Sammel- und Recyclingquoten gemäß der WEEE-Richtlinie.

19.4. Entsorgung von Batterien

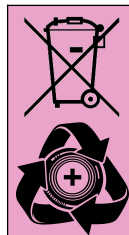

Der Umgang mit und die Entsorgung von Batterien und Akkus werden durch die Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien geregelt. Diese Verordnung gilt unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten und soll die sichere, nachhaltige und umweltgerechte Nutzung von Batterien gewährleisten.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien nicht über den Hausmüll zu entsorgen. Stattdessen müssen gebrauchte Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden, die durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet sind, damit sie ordnungsgemäß recycelt werden können. Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

19.5. Entsorgung von Verpackungsmaterial



Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien auf umweltgerechte Weise. Beachten Sie die Hinweise und Recyclingsymbole auf der Verpackung und stellen Sie sicher, dass Plastiktüten, Karton und andere Materialien dem Recycling zugeführt werden.

20. GARANTIE & HAFTUNG

NYMPH garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie berührt nicht die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gemäß den geltenden EU-Verbraucherschutzgesetzen.

Die Garantie gilt für Produkte, die für private Zwecke verwendet werden, und nicht für gewerbliche Zwecke oder Vermietung. **NYMPH** wird nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder jedes Produktteil, das sich während der Garantiezeit als defekt erweist, ersetzen oder reparieren. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder generalüberholtes Produkt bzw. Bauteil. Falls das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann ein Ersatz durch ein ähnliches Produkt mit gleichem oder höherem Wert erfolgen. Eine Rückerstattung wird nicht gewährt. Ihr Ersatzgerät wird Ihnen kostenlos zurückgesendet und bleibt für die verbleibende Garantiezeit durch diese Garantie abgedeckt.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer ab dem Datum des Erstkaufs und ist nicht übertragbar. Für Garantieleistungen ist ein Kaufnachweis erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht für:

- Fahrlässige Verwendung oder missbräuchliche Nutzung des Produkts.
- Verwendung mit falscher Spannung oder Stromstärke.
- Schäden durch Stürze oder Stöße.
- Wasserschäden.
- Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung.
- Demontage, Reparatur oder Veränderung durch andere Personen als **NYMPH**.
- Schäden durch Unfälle oder Katastrophen wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Krieg, Vandalismus oder Diebstahl.
- Schäden durch unsachgemäße Wartung und Lagerung.
- Schäden durch unsachgemäße Montage.
- Schäden durch unsachgemäße Anschlüsse.
- Zubehör wie Batterien und Sicherungen.
- Einwirkung ungünstiger äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischer Felder.
- Normaler Verschleiß.

Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden. Wir übernehmen keine Haftung für Sachschäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

NYMPH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung Änderungen an der Anleitung, den Farben, Spezifikationen, dem Zubehör, den Materialien und den Modellen vorzunehmen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, verbreitet oder übertragen werden, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderer elektronischer oder mechanischer Verfahren, außer im Fall kurzer Zitate in kritischen Rezensionen und bestimmter anderer nichtkommerzieller Nutzungen, die durch das Urheberrecht gestattet sind. Kontaktieren Sie uns für Genehmigungsanfragen.

Système de massage par pression d'air

Modèle Nymph 4-6-8



Ce manuel d'utilisation accompagne le Nymph 4-6-8 et contient des informations importantes concernant l'installation, la sécurité, l'élimination et l'utilisation. Lisez attentivement ce manuel et suivez les instructions afin de garantir une utilisation sûre et correcte du produit.

Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure, même si vous connaissez déjà le produit. Veillez à transmettre ce manuel d'utilisation lorsque vous remettez le produit à un tiers.

Les images figurant dans le manuel d'utilisation sont fournies à titre illustratif uniquement et peuvent différer légèrement du produit réel. Dans ce cas, **NYMPH** n'est pas tenu de mettre à jour ou de réviser le manuel d'utilisation. Référez-vous au produit réel.



IMPORTANT – À LIRE AVANT UTILISATION

Cet appareil est un dispositif médical de classe IIa destiné à la thérapie par compression pneumatique intermittente.

Utilisez cet appareil uniquement conformément à son utilisation prévue et respectez toutes les contre-indications, les avertissements et les précautions décrits dans ce manuel d'utilisation.

NYMPH décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de perte résultant d'une utilisation non conforme au présent manuel d'utilisation, du non-respect des contre-indications, des avertissements ou des précautions, ou d'une utilisation en dehors de l'usage prévu.

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un produit **NYMPH**. Ce manuel d'utilisation contient les informations nécessaires pour garantir une utilisation sûre et correcte du produit.

Ce produit porte le marquage CE et est conforme aux exigences réglementaires européennes applicables.

	Marquage CE Ce produit porte le marquage CE, indiquant qu'il est conforme aux directives européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Le marquage CE constitue une déclaration du fabricant attestant que le produit satisfait aux exigences légales applicables de l'Union européenne.
	Conformité RoHS Ce produit est conforme à la directive RoHS (2011/65/UE), qui limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Cette conformité garantit que les niveaux de substances telles que le plomb, le mercure et le cadmium restent inférieurs aux seuils maximaux autorisés.
EMC	Conformité CEM Ce produit est conforme à la directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) (2014/30/UE), qui garantit que l'appareil fonctionne correctement dans son environnement sans provoquer ni subir d'interférences électromagnétiques.
MDR	Conformité au MDR Ce produit est conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR), qui établit les exigences en matière de sécurité, de performances et d'évaluation clinique des dispositifs médicaux mis sur le marché européen. Cette conformité démontre que le produit satisfait aux exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux conformément à la législation de l'Union européenne.

La déclaration UE de conformité complète ainsi que tous les rapports d’essais justificatifs sont disponibles sur demande.

Si vous avez des questions, des remarques ou des problèmes lors de l’utilisation du produit, veuillez nous contacter.

Nous espérons que vous apprécierez votre achat !

2. EXPLICATION DES SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d’utilisation :

	REMARQUE : Fournit des informations importantes ou des conseils utiles concernant l’utilisation du produit.
	DANGER : Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT : Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
	ATTENTION : Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

Les symboles de sécurité ne remplacent pas les consignes de sécurité écrites. Lisez et respectez scrupuleusement les consignes de sécurité.

Symboles des dispositifs médicaux :

Symbole	Nom du symbole	Signification
	Numéro de série (SN)	Indique le numéro de série du fabricant pour l’identification du produit.

	Code de lot (LOT)	Indique le code de lot du fabricant.
	Mandataire autorisé dans l'Union européenne (EU REP)	Indique le mandataire autorisé au sein de l'Union européenne.
	Date de fabrication	Indique la date de fabrication du dispositif médical.
	Marquage CE avec numéro de l'organisme notifié	Indique la conformité à la législation européenne applicable. Le numéro identifie l'organisme notifié.
	Partie appliquée de type BF	Indique une partie appliquée de type BF assurant une protection contre les chocs électriques.
	Symbole des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	Indique que l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Éliminez le produit conformément aux réglementations locales relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
	Utilisation en intérieur uniquement	Indique que l'appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
	Appareil de classe II	Indique un appareil de classe II doté d'une isolation double ou renforcée assurant une protection contre les chocs électriques.
IP21	Indice de protection IP21	Indique une protection contre les corps solides étrangers de plus de 12,5 mm et contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
	Fabricant	Indique le fabricant légal du produit.

3. TERMINOLOGIE



REMARQUE :

Dans ce manuel d'utilisation, le terme « Nymph 4-6-8 » désigne collectivement les modèles Nymph 4, Nymph 6 et Nymph 8. Sauf indication contraire, ce terme désigne le produit complet, y compris l'unité de commande (appareil) et les accessoires fournis tels que la télécommande et le manchon avec tuyau de raccordement. Lorsque des composants individuels sont décrits, ils sont désignés par leur nom spécifique.

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Respectez attentivement les instructions et les informations de sécurité figurant dans ce manuel d'utilisation. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Les dommages ou blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ces instructions ne sont pas couverts par la garantie.

Les appareils électriques et les batteries peuvent présenter des dangers lorsqu'ils sont utilisés de manière incorrecte. Ces dangers peuvent notamment inclure des blessures, un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels. Manipulez toujours l'appareil avec précaution et maintenez-le hors de portée des enfants.

Ce manuel d'utilisation contient les informations nécessaires à une utilisation sûre de l'appareil. Toutefois, il n'est pas possible de couvrir toutes les situations ou tous les dangers potentiels. Utilisez toujours l'appareil avec prudence et respectez les instructions fournies.

Des risques résiduels peuvent subsister malgré toutes les mesures de sécurité. Respectez toutes les instructions et tous les avertissements figurant dans ce manuel d'utilisation afin de réduire les risques de

blesseure, de dommage ou de dysfonctionnement.

Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées dans ce manuel d'utilisation, veuillez nous contacter.

4.1. Contre-indications

N'utilisez pas l'appareil :

- sur des plaies ouvertes, des fractures ou des zones du corps gravement blessées ;
- sur des zones affectées par une inflammation aiguë ou une infection ;
- si vous souffrez de thrombose veineuse aiguë ou de thrombophlébite profonde ;
- si vous souffrez d'un œdème pulmonaire ;
- si vous souffrez d'une maladie artérielle périphérique sévère.

Consultez un médecin avant utilisation si vous :

- êtes enceinte ;
- portez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif électronique implanté ;
- souffrez d'une maladie cardiaque, de troubles circulatoires ou d'hypertension non contrôlée ;
- êtes atteint(e) de diabète avec perte de sensibilité ou neuropathie périphérique ;
- suivez un traitement contre le cancer ;
- prenez des médicaments anticoagulants ;
- présentez toute autre affection médicale susceptible d'être influencée par le massage par compression.

4.2. Sécurité générale

- N'utilisez pas le Nymph 4-6-8 à d'autres fins que son utilisation prévue (voir le chapitre « UTILISATION PRÉVUE »).
- Le Nymph 4-6-8 est conçu et destiné à un usage domestique et ne convient pas à un usage commercial ou industriel.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où l'utilisation d'équipements électroniques est interdite.

- Le Nymph 4-6-8 est destiné uniquement à une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Les chocs, impacts ou chutes, même de faible hauteur, peuvent endommager l'appareil.
- Ne placez pas le Nymph 4-6-8 sur une surface instable. Cela pourrait provoquer sa chute et entraîner un dysfonctionnement.
- Ne comprimez pas le manchon.
- N'exposez pas le Nymph 4-6-8 à des vibrations excessives, à des forces d'écrasement, à des impacts ou à d'autres contraintes mécaniques.
- Ne vous asseyez pas sur le manchon.
- L'appareil doit être correctement et solidement raccordé. Respectez les instructions afin d'éviter tout dommage ou toute blessure.
- Utilisez uniquement les accessoires ou les pièces complémentaires fournis ou recommandés par le fabricant pour cet appareil. Des accessoires ou pièces complémentaires inadaptés peuvent présenter un risque pour l'utilisateur et endommager le Nymph 4-6-8.
- N'insérez aucun objet ni aucun doigt dans les ouvertures.
- N'exercez pas une force excessive lors de l'utilisation des boutons du Nymph 4-6-8.
- Ne touchez pas le manchon avec des objets pointus.
- N'exercez pas une force excessive sur l'écran et ne touchez pas l'écran avec des objets pointus.
- Ne placez jamais d'objets sur le Nymph 4-6-8.
- Ne laissez pas le Nymph 4-6-8 sous tension sans surveillance. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité de jeunes enfants.
- N'utilisez pas le Nymph 4-6-8 à proximité de champs magnétiques puissants, tels que des moteurs, des transformateurs ou des téléphones mobiles.
- N'utilisez pas le Nymph 4-6-8 dans un environnement poussiéreux.
- S'il n'est plus possible d'utiliser le Nymph 4-6-8 en toute sécurité, mettez l'appareil hors service et empêchez toute utilisation accidentelle. Une utilisation sûre ne peut plus être garantie si l'appareil :
 - est visiblement endommagé ;
 - ne fonctionne plus correctement ;
 - a été stocké pendant une longue période dans de mauvaises conditions ambiantes ;
 - ou a été soumis à d'importantes contraintes liées au transport.

4.3. Utilisateurs

- Le Nymph 4-6-8 n'est pas un jouet. Maintenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- L'appareil ne peut être utilisé que par des adultes. Les manchons sont conçus uniquement pour des utilisateurs adultes. Leur utilisation par des enfants peut entraîner des blessures.
- Ne laissez pas des personnes qui ne sont pas familiarisées avec le fonctionnement du Nymph 4-6-8 ou avec les présentes instructions utiliser l'appareil.
- L'appareil ne peut être utilisé que par des personnes qui comprennent ces instructions et sont conscientes des dangers potentiels.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- N'utilisez pas le Nymph 4-6-8 lorsque vous êtes fatigué(e), distrait(e) ou sous l'influence de l'alcool ou de médicaments.

4.4. Sécurité électrique

- Vous ne devez pas modifier, réparer vous-même ou démonter le Nymph 4-6-8. Cela pourrait endommager l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations ne peuvent être effectués que par le fabricant, un atelier professionnel désigné par le fabricant ou une personne possédant des qualifications équivalentes.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil s'il présente des signes de détérioration.
- N'utilisez aucune autre fiche secteur pour cet appareil. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement et/ou des dommages.
- Assurez-vous que votre prise secteur fournit la tension correcte afin d'éviter tout dommage à l'appareil.
- La prise secteur doit être située à proximité du Nymph 4-6-8 et être facilement accessible.
- Afin de réduire la consommation d'énergie et les risques potentiels pour la sécurité, débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, pendant le

nettoyage ou l'entretien, ou en cas de dysfonctionnement. L'appareil reste raccordé au réseau électrique tant que la fiche secteur est branchée.

- Ne mettez pas le Nymph 4-6-8 en marche ou à l'arrêt en branchant ou en débranchant la fiche secteur. Utilisez toujours le bouton MARCHE/ARRÊT.
- Ne forcez jamais la fiche du câble d'alimentation dans une prise secteur. Si elle ne s'insère pas facilement dans la prise, cessez de l'utiliser. Assurez-vous toujours que la fiche de l'appareil est correctement branchée dans la prise secteur.
- En cas de coupure de courant pendant l'utilisation, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise.
- Si de la fumée se dégage ou si des bruits ou odeurs inhabituels apparaissent, éteignez immédiatement le Nymph 4-6-8 et débranchez la fiche secteur de la prise. Dans ces cas, le Nymph 4-6-8 ne doit pas être utilisé avant d'avoir été inspecté par le fabricant ou une personne possédant des qualifications équivalentes. N'inhalez jamais la fumée provenant d'un éventuel incendie de l'appareil. Si vous avez néanmoins inhalé de la fumée, consultez un médecin. L'inhalation de fumée peut être dangereuse.
- En cas d'incendie, coupez l'alimentation électrique si cela peut être fait en toute sécurité. Utilisez un équipement de lutte contre l'incendie approprié et maintenez une distance de sécurité par rapport à l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours l'appareil en cas d'orage.

4.5. Câble d'alimentation

- Déroulez complètement le câble d'alimentation avant utilisation.
- Ne modifiez pas le câble d'alimentation.
- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. N'utilisez jamais le câble d'alimentation s'il présente des signes de détérioration.
- Afin d'éviter tout risque, un câble d'alimentation endommagé ne peut être remplacé que par le fabricant, un atelier professionnel désigné par le fabricant ou une personne possédant des qualifications équivalentes.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation s'il est endommagé. Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique mortel. Coupez d'abord l'alimentation de la prise concernée (par exemple à l'aide du disjoncteur correspondant), puis retirez soigneusement la fiche secteur de la prise. N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé.

- Ne retirez jamais la fiche secteur de la prise en tirant sur le câble d'alimentation. Retirez toujours la fiche en la saisissant par les zones prévues à cet effet.
- Ne portez pas et ne tirez pas le Nymph 4-6-8 par son câble d'alimentation.
- N'enroulez jamais le câble d'alimentation autour de l'appareil. Cela entraînerait une usure prématurée du câble et pourrait le casser.
- Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le câble d'alimentation.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être plié, coincé ou tordu.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas écrasé, plié, endommagé par des arêtes vives ou soumis à des contraintes mécaniques.
- Ne faites jamais de nœud dans le câble d'alimentation.
- Détordez régulièrement le câble d'alimentation s'il se vrille à cause de l'utilisation.
- Évitez toute contrainte thermique excessive sur le câble d'alimentation due à une chaleur ou un froid extrêmes.
- Si vous utilisez une rallonge raccordée à la prise secteur, assurez-vous que la consommation électrique totale des appareils connectés ne dépasse pas la capacité nominale de la rallonge.
- Les enfants peuvent s'emmêler dans les câbles lorsqu'ils jouent, ce qui présente un risque de strangulation. Les câbles ne sont pas des jouets.

4.6. Chaleur & ventilation

- Le Nymph 4-6-8 peut devenir chaud pendant son fonctionnement. Cela est normal.
- Ne couvrez pas l'appareil ni les ouvertures de ventilation pendant son fonctionnement, car cela pourrait provoquer une surchauffe du Nymph 4-6-8. Cela présente un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Assurez-vous que la ventilation autour du Nymph 4-6-8 est suffisante pendant l'utilisation.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des endroits où la température ambiante est relativement élevée (par exemple les poêles ou autres sources de chaleur). N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes nues (telles que des bougies allumées) ni sur des surfaces chaudes.
- Le Nymph 4-6-8 et la télécommande sont conçus pour fonctionner de manière optimale à des températures ambiantes normales comprises entre

0 °C et 35 °C et pour être stockés à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C. Le Nymph 4-6-8 et la télécommande peuvent être endommagés et leur durée de vie peut être réduite si les appareils sont utilisés ou stockés en dehors de cette plage de températures. N'exposez pas les appareils à des variations brusques de température. Ne stockez pas les appareils dans une voiture chaude ou en plein soleil pendant de longues périodes. Ne placez pas les appareils près d'une fenêtre (en particulier en été).

4.7. Eau

- Cet appareil n'est pas étanche. L'exposition à l'eau peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou des dommages permanents.
- N'utilisez jamais le Nymph 4-6-8 avec les mains humides. L'humidité peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit.
- Ne touchez jamais la fiche avec les mains humides lorsque vous la branchez ou la débranchez de la prise secteur. L'humidité peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit.
- N'utilisez pas le Nymph 4-6-8 dans ou à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou de tout autre récipient rempli d'eau, tel qu'un évier.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche, le manchon ou la télécommande dans un liquide. Ne versez jamais de liquide sur ou à proximité du Nymph 4-6-8. Il existe un risque de choc électrique ou de court-circuit. Si du liquide pénètre dans le boîtier, débranchez immédiatement la fiche secteur puis éteignez le Nymph 4-6-8.
- Ne saisissez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise et retirez l'appareil de l'eau uniquement après cela.
- Assurez-vous que le Nymph 4-6-8 est placé sur une surface sèche.

4.8. Sécurité des batteries (télécommande)

- Ne placez pas la télécommande près d'un feu ou en plein soleil. L'échauffement de l'appareil peut entraîner un échauffement supplémentaire de la pile, ce qui peut provoquer son éclatement ou son explosion.
- N'essayez pas de percer, de modifier ou de démonter la pile, car cela peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite de produits chimiques ou des blessures graves.
- N'utilisez pas de pile endommagée ou déformée.
- N'utilisez pas la télécommande si la pile commence à dégager une odeur, à surchauffer ou à fuir.
- Ne touchez pas les substances qui se sont échappées de la pile et n'inhalez pas les vapeurs qu'elle émet. Les piles qui fuient ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures chimiques de la peau. Portez donc des gants appropriés.
- La pile contient des substances dangereuses. N'ouvrez pas la pile et n'y introduisez aucun objet.
- Ne jetez jamais la pile au feu.
- Lorsque vous manipulez la pile, assurez-vous que vos mains, le produit et la pile sont secs.
- Ne provoquez pas de court-circuit. Un court-circuit peut provoquer l'explosion de la pile ou une fuite.
- Après avoir retiré la pile, évitez tout court-circuit accidentel en empêchant les bornes de la pile d'entrer en contact avec des objets métalliques (par exemple des pièces de monnaie, des épingles à cheveux ou des bagues). N'enveloppez pas la pile dans du papier aluminium. Recouvrez les bornes de la pile avec du ruban adhésif ou placez les piles séparément dans un sac en plastique avant de les jeter.
- Veillez à ne pas faire tomber la pile et à éviter les chocs.
- En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin ou contactez votre centre antipoison local.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que la pile est correctement installée en respectant la polarité (+ et -).
- Vérifiez la télécommande et assurez-vous que le compartiment à pile est correctement fermé, par exemple que la vis ou tout autre dispositif de fixation mécanique est bien serré. Si le compartiment à pile ne se ferme pas

correctement, cessez d'utiliser la télécommande et gardez-la hors de portée des enfants.

- Remplacez la pile uniquement par une pile de même taille et de même type.
- Utilisez la pile pendant la durée d'utilisation recommandée.
- Empêchez les enfants ou les animaux d'entrer en contact avec la pile.

4.9. Risques résiduels

Malgré la mise en œuvre de toutes les mesures de sécurité, certains risques résiduels peuvent subsister lors de l'utilisation du Nymph 4-6-8.

- Inconfort temporaire, irritation cutanée, rougeurs, engourdissements ou marques de pression causés par une utilisation prolongée ou des réglages de pression excessifs.
- Inconfort ou blessures résultant d'un mauvais positionnement ou d'un ajustement incorrect des manchons.
- Réduction de la circulation sanguine, douleur ou inconfort physique causés par une durée de traitement excessive ou des réglages de pression inadaptés.
- Risques de choc électrique, de surchauffe ou d'incendie résultant de câbles endommagés, de composants endommagés, de réparations inappropriées, d'une exposition à des liquides ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil.
- Risques de trébuchement causés par les tuyaux, les câbles ou les manchons raccordés pendant l'utilisation ou le stockage.
- Dommages aux manchons, aux tuyaux, aux connecteurs ou à l'unité de commande causés par des objets pointus, une flexion excessive, une traction, une torsion, un écrasement ou un stockage inapproprié.
- Risques liés à l'utilisation par des personnes présentant des contre-indications médicales, notamment des troubles circulatoires, une thrombose, une hypertension sévère, des dispositifs médicaux implantés ou d'autres affections mentionnées dans ce manuel.
- Risques liés à l'utilisation par des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes incapables de comprendre les instructions ou de signaler un inconfort.

Afin de réduire ces risques au minimum, respectez toujours toutes les instructions et tous les avertissements de sécurité figurant dans ce manuel.

4.10. Mauvaise utilisation raisonnablement prévisible

Les utilisations suivantes sont considérées comme une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible et doivent être évitées :

- Utilisation de l'appareil à des fins autres que la thérapie par compression pneumatique intermittente avec les manchons de compression fournis.
- Utiliser l'appareil sur des nourrissons, des enfants, des animaux domestiques ou des personnes incapables d'utiliser l'appareil en toute sécurité ou de signaler un inconfort.
- Utiliser l'appareil pendant le sommeil, en cas d'inconscience, ou sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou d'autres substances susceptibles de réduire la vigilance ou la sensibilité.
- Utiliser l'appareil avec des manchons, tuyaux, connecteurs, câbles, fiches ou autres composants endommagés.
- Utiliser l'appareil dans un environnement humide, à proximité de l'eau ou avec les mains mouillées.
- Couvrir l'unité de commande pendant son fonctionnement ou bloquer les ouvertures de ventilation.
- Tirer, tordre, plier fortement, écraser ou marcher sur les tuyaux ou les câbles d'alimentation.
- Déconnecter les manchons ou les tuyaux pendant que l'appareil fonctionne ou est sous pression.
- Utiliser des réglages de pression, des durées de traitement ou des programmes provoquant une douleur, un engourdissement ou un inconfort important.
- Utiliser l'appareil malgré des contre-indications connues, des problèmes médicaux, des blessures ou un avis médical déconseillant l'utilisation d'appareils de compression.
- Tenter d'ouvrir, de modifier, de réparer ou de démonter l'appareil ou ses accessoires.
- Introduire des corps étrangers dans l'unité de commande, les connecteurs, les ouvertures de ventilation ou toute autre ouverture de l'appareil.
- Utiliser des accessoires, pièces de rechange, câbles d'alimentation ou équipements non approuvés.
- Se tenir debout, marcher ou se déplacer tout en étant raccordé aux manchons de compression.

- Utiliser le produit à l'extérieur ou l'exposer à la lumière directe du soleil, à une chaleur excessive, à des flammes nues ou à des températures inférieures au point de congélation.

Une telle mauvaise utilisation peut entraîner des blessures, un risque d'incendie ou des dommages à l'appareil.

4.11. Considérations médicales

Ce produit est un dispositif médical de classe IIa destiné à la thérapie par compression pneumatique intermittente. Il doit uniquement être utilisé conformément à sa destination prévue et ne remplace pas un avis médical professionnel, un diagnostic, un suivi médical ou un traitement.

Consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil si vous :

- souffrez de troubles circulatoires, de maladies vasculaires, de varices, de diabète, d'hypertension sévère ou d'une maladie cardiaque ;
- portez des dispositifs médicaux implantés tels qu'un stimulateur cardiaque ;
- êtes enceinte ou avez récemment subi une intervention chirurgicale ;
- souffrez de douleurs chroniques, d'engourdissements, d'une sensibilité réduite ou de problèmes de peau ;
- suivez un traitement médical ou avez d'autres préoccupations médicales.

N'utilisez pas l'appareil sur des zones du corps blessées, gonflées, infectées, enflammées ou sensibles, sauf autorisation d'un professionnel de santé qualifié.

Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si vous ressentez une douleur, des étourdissements, un engourdissement, une décoloration de la peau, un gonflement inhabituel, des difficultés respiratoires ou toute autre réaction physique anormale pendant ou après l'utilisation.

Les utilisateurs sont responsables de déterminer si ce produit est adapté à leur condition physique individuelle.

5. UTILISATION PRÉVUE

Le Nymph 4-6-8 est destiné à la thérapie par compression pneumatique intermittente à l'aide de manchons de compression gonflables pour les jambes, les bras, la taille ou le bas du corps. L'appareil assure une compression séquentielle par pression d'air.

L'appareil est destiné à favoriser la circulation sanguine et à procurer un soulagement temporaire des légères douleurs musculaires et de la fatigue.



AVERTISSEMENT :

Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce manuel. Une utilisation en dehors de l'utilisation prévue ou contraire aux instructions peut entraîner une réduction des performances, des dommages à l'appareil ou des risques pour la sécurité.

6. CONTENU DE LA LIVRAISON

6.1. Contenu

Les composants suivants sont inclus dans le contenu de la livraison :

- 1x Nymph 4-6-8
- 1x Télécommande (sans pile)
- 1x Ensemble de tuyaux d'air
- 1x Manchon
- 1x Sac de transport
- 1x Bandoulière pour le sac de transport
- 1x Manuel d'utilisation



REMARQUE :

En raison des exigences de transport et d'emballage, certains accessoires peuvent être livrés démontés. Suivez attentivement les instructions de montage.

6.2. Déballage

Retirez tous les éléments de l'emballage et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés. N'utilisez pas le Nymph 4-6-8 si un dommage est constaté. Soyez très prudent lors de l'ouverture de l'emballage afin d'éviter d'endommager le produit.

Après avoir déballé le produit, vérifiez que la livraison est complète et que tous les composants sont en bon état. Si un composant est manquant ou endommagé, veuillez nous contacter.

Retirez tous les matériaux d'emballage avant utilisation.



REMARQUE :

Cet appareil est emballé afin de le protéger pendant le transport. Conservez la boîte d'origine et les autres matériaux d'emballage dans un endroit sûr afin d'éviter tout dommage à l'appareil si vous devez le transporter ultérieurement. Si vous jetez l'emballage, veillez à le recycler correctement.

6.3. Sécurité lors du déballage

Ne laissez pas les matériaux d'emballage et les accessoires traîner sans surveillance pendant le déballage. Ils peuvent devenir des objets dangereux pour les enfants.



AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement

Gardez les sacs en plastique et les films d'emballage hors de portée des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement. Les films minces peuvent adhérer au nez et à la bouche et gêner la respiration.





AVERTISSEMENT : Risque de strangulation

Les câbles et tuyaux d'une longueur supérieure à 22 cm peuvent être dangereux pour les bébés et les très jeunes enfants.

Les enfants peuvent s'emmêler dans le câble d'alimentation et les tuyaux lorsqu'ils jouent. Ne laissez pas les accessoires traîner pendant le déballage.



AVERTISSEMENT : Pile bouton.

La télécommande est fournie sans la pile bouton nécessaire. Soyez prudent lors du déballage et/ou de l'installation des piles. Les piles bouton sont petites et très puissantes. Pour les enfants, elles peuvent ressembler à des bonbons ou à des pièces de monnaie et être facilement avalées.

- Conservez les piles bouton neuves et usagées hors de portée des enfants.
- L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement deux heures et entraîner la mort.
- Consultez immédiatement un médecin si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite dans une partie du corps.
- Éliminez immédiatement les piles bouton usagées.



7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**REMARQUE :**
En raison de l'amélioration continue de notre produit, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Produit	Système de massage par compression d'air		
Modèle	Nymph 4	Nymph 6	Nymph 8
Marque	Nymph		
Couleur	Noir		
Matériau	Plastique rigide		
Nombre de chambres à air	4	6	8
Nombre de programmes	6 (A – F)		
Puissance	65 W		
Tension d'entrée	220 – 240 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Classe de protection (appareil)	Classe I 		
Fusible	T3.15A, 5 × 20 mm		
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m		
Réglage de la minuterie	1 – 90 min		
Débit de la pompe	20 – 25 l/min		
Pression	30 – 240 mmHg (incréments de 30 mmHg)		
Température de fonctionnement	10 – 40 °C		
Température de stockage	10 – 40 °C		
Humidité de fonctionnement	30 – 85 % RH		
Humidité de stockage	30 – 85 % RH		

Alimentation de la télécommande	CR2032 (pile bouton)
Indice de protection IP	IP 21
Poids	2,3 kg
Dimensions	300 × 237 × 126 mm

Identification du produit :

Marque	Nymph		
Modèle	Nymph 4	Nymph 6	Nymph 8
Fabricant OEM	Xiamen Weiyou Intelligent Technology Co., Ltd., Xiamen, China		
Modèle OEM	VU-NIPC02	VU-IPC04	VU-IPC06



REMARQUE :

L'étiquette d'identification et de caractéristiques du produit est située sur l'appareil. Cette étiquette contient des informations importantes telles que le numéro de modèle et les caractéristiques électriques.

Conformité au MDR :

Ce produit est un dispositif médical de classe IIa et est conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR), qui établit les exigences en matière de sécurité, de performances et d'évaluation clinique des dispositifs médicaux mis sur le marché européen. Cette conformité démontre que le produit satisfait aux exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux conformément à la législation de l'Union européenne.

Notified Body (Organisme notifié) :

Notified Body 0598 – SGS Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlande

Tél. : +358 9 696 361

www.sgs.fi

Numéro d'entreprise 0634247-4

Mandataire autorisé dans l'Union européenne (EU REP) :



SUNGO Cert GmbH

Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf, Allemagne

8. PIÈCES DU PRODUIT

8.1. L'unité de commande

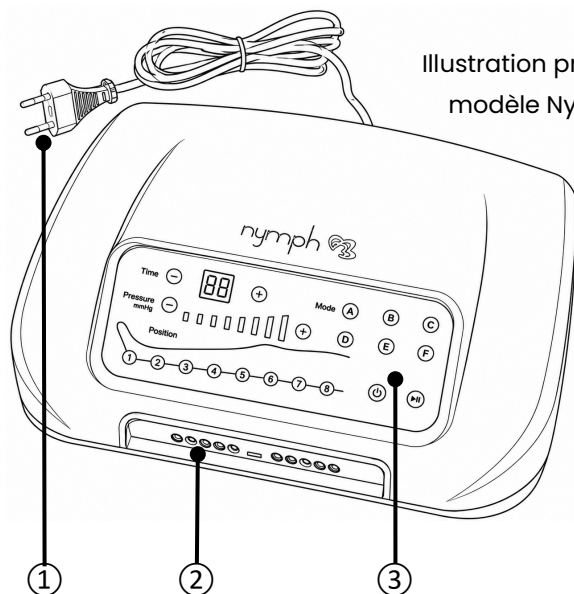


Illustration présentée :
modèle Nymph 8.

- ① Câble d'alimentation
- ② Prise du connecteur multiport
- ③ Panneau de commande

8.2. Le panneau de commande

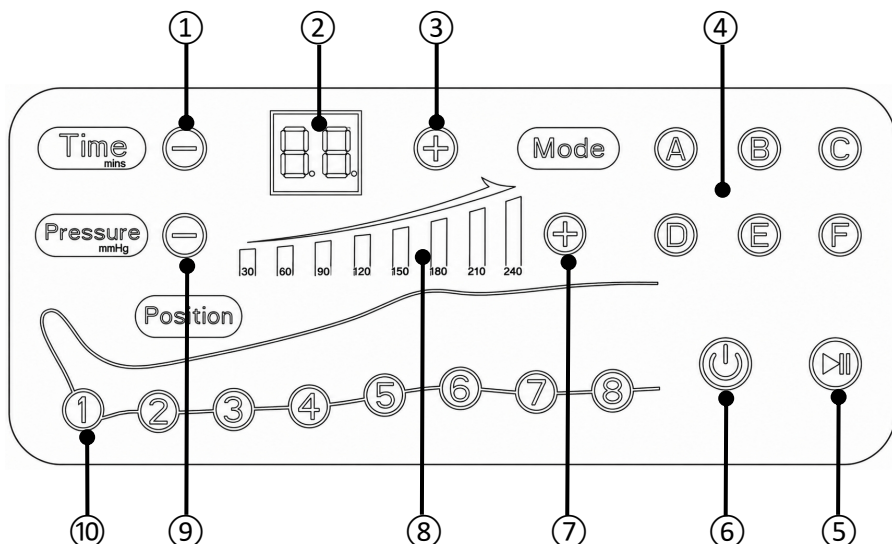


Illustration présentée : modèle Nymph 8.

- ① Bouton de diminution du temps
- ② Indicateur du temps restant (1 - 90 minutes)
- ③ Bouton d'augmentation du temps
- ④ Boutons de programme (A, B, C, D, E, F)
- ⑤ Bouton Marche/Pause
- ⑥ Bouton MARCHE/ARRÊT
- ⑦ Bouton d'augmentation de la pression
- ⑧ Indicateur de pression (8 niveaux : 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 mmHg)
- ⑨ Bouton de diminution de la pression
- ⑩ Boutons de position/chambre
 - Nymph 4: 1, 2, 3, 4
 - Nymph 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Nymph 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

8.3. La télécommande

- ① Bouton de diminution du temps
- ② Bouton d'augmentation du temps
- ③ Bouton de diminution de la pression
- ④ Bouton d'augmentation de la pression
- ⑤ Boutons de position/chambre
 - Nymph 4 : 1, 2, 3, 4
 - Nymph 6 : 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Nymph 8 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- ⑥ Bouton de mode
- ⑦ Bouton Marche/Pause


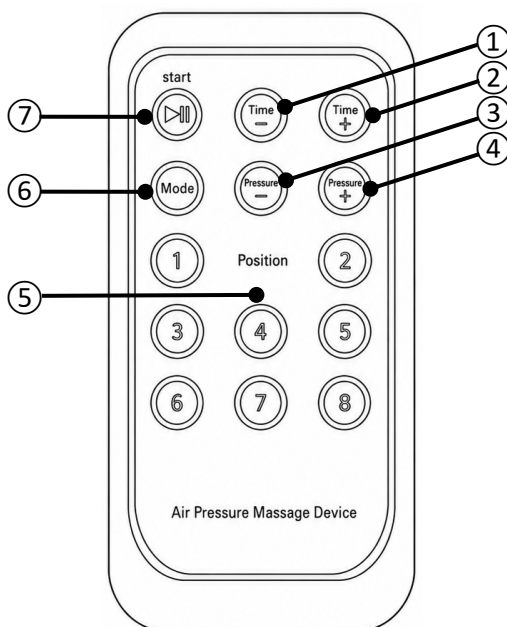


Illustration présentée : modèle Nymph 8.

9. PROGRAMMES DE MASSAGE A-F

Les chambres à air à l'intérieur des manchons de jambes se gonflent et se dégonflent selon le programme sélectionné. Cela crée un massage par compression séquentielle conçu pour favoriser le confort et la relaxation. La durée du traitement, le niveau de pression et les réglages supplémentaires peuvent être ajustés à tout moment pendant la séance.

- A** Normal
- B** Compression séquentielle
- C** Double vague
- D** Compression complète
- E** Compression séquentielle + double vague
- F** Normal + double vague + compression complète

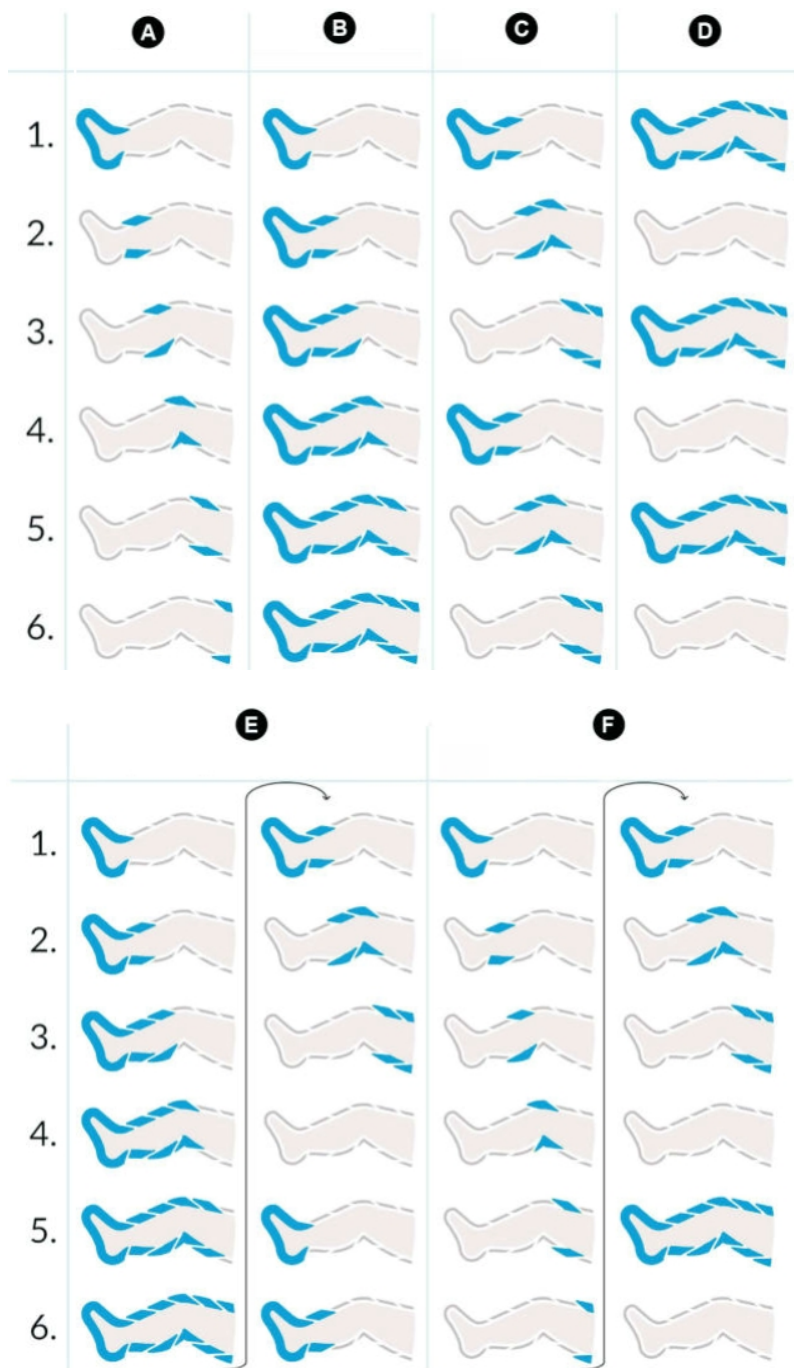

10. BIENFAITS DU MASSAGE PAR COMPRESSION

L'appareil fournit un massage par compression séquentielle à l'aide de plusieurs chambres à air qui se gonflent et se dégonflent selon le programme sélectionné. Cela crée un massage doux par pression conçu pour améliorer le confort et la relaxation.

Les bénéfices potentiels d'une utilisation régulière peuvent inclure :

- Un soulagement de la sensation de jambes fatiguées ou lourdes après une position debout prolongée, une position assise prolongée ou les activités quotidiennes.
- Une amélioration du confort et de la relaxation après une activité physique ou un exercice.
- Une expérience de massage apaisante pour les jambes ou les bras.
- Un soulagement temporaire des tensions musculaires et de la fatigue physique.
- Une amélioration du confort pendant les périodes de repos et de récupération..



REMARQUES :

- Les avantages décrits ci-dessus visent à soutenir la thérapie par compression et les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre.
- Ce dispositif médical est destiné à la thérapie par compression pneumatique intermittente telle que décrite dans ce manuel d'utilisation. Il ne remplace pas un avis médical, un diagnostic ou un traitement professionnel.


11. UTILISATION

11.1. Avant la première utilisation



PREMIÈRE UTILISATION :

Ouvrez le couvercle du filtre et retirez la vis de transport en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette vis protège l'unité de commande pendant le transport et ne doit pas être réinstallée.

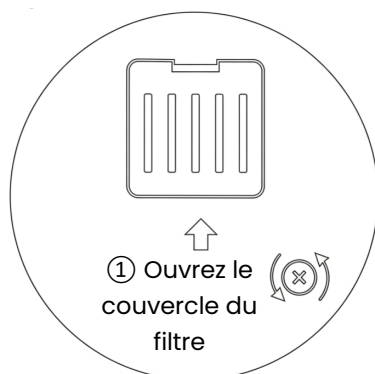


Si la télécommande est équipée d'une languette d'isolation des batteries, retirez-la avant la première utilisation. Si la pile n'est pas installée (par exemple en raison des réglementations relatives au transport), insérez une pile CR2032 dans le compartiment à pile.

11.2. Raccordement du système



Étape 1

Raccordez le câble d'alimentation à une prise secteur avec mise à la terre de 220–240 V.

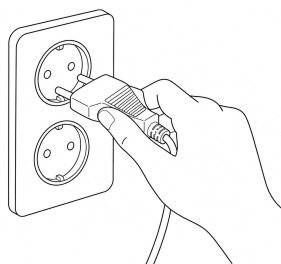

Étape 2

Vérifiez que le tuyau d'air est correctement raccordé au(x) manchon(s). S'il est déjà raccordé, passez à l'étape 3. Dans le cas contraire, insérez les broches du tuyau dans les connecteurs du/des manchon(s).

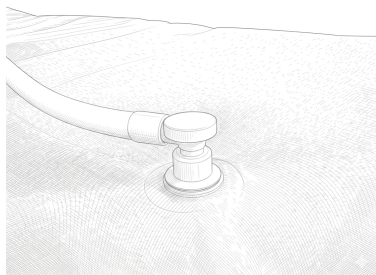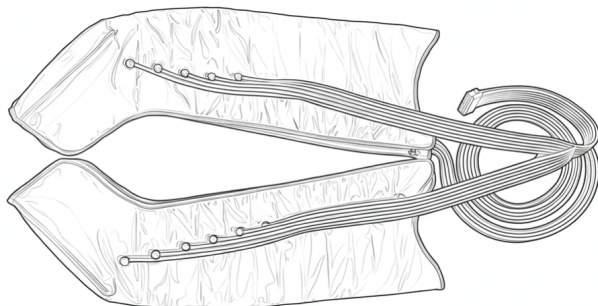

Étape 3

Raccordez le connecteur principal du tuyau d'air à l'unité de commande.

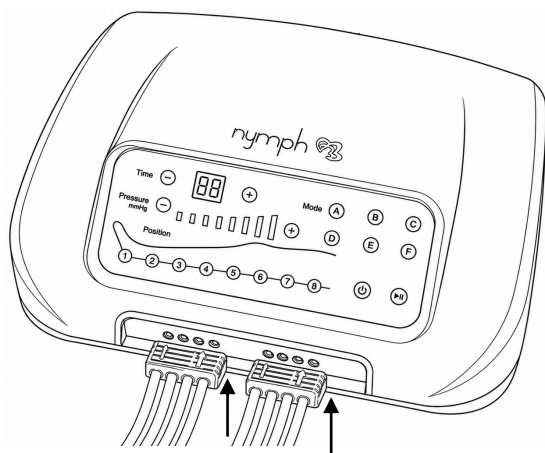


Illustration présentée : modèle Nymph 8.

Étape 4

Vérifiez que tous les raccordements sont correctement fixés et étanches à l'air.

Étape 5

Mettez le(s) manchon(s).

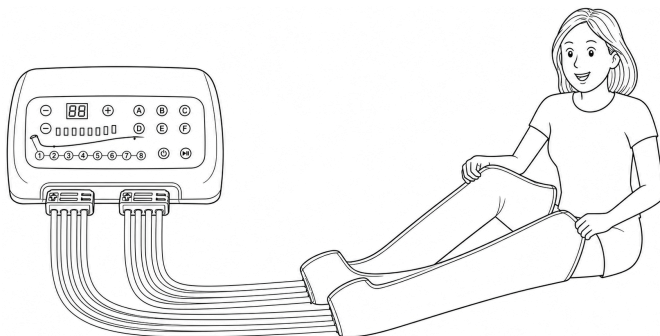


Illustration présentée : modèle Nymph 8.



REMARQUE :

Il est recommandé de mettre l'appareil sous tension avant de fixer les manchons.

11.3. Démarrage d'une séance de traitement

Étape 6

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre l'appareil en marche.

Étape 7

Réglez le niveau de pression souhaité à l'aide des boutons + et -. Les niveaux de pression disponibles sont 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 et 240 mmHg. Il est recommandé de commencer avec un réglage de pression plus faible lors des premières séances et d'augmenter progressivement la pression selon les préférences personnelles et le niveau de confort.



REMARQUE :

Pour les personnes utilisant l'appareil pour la première fois, un réglage de pression de 120 mmHg ou 150 mmHg est recommandé. Augmentez progressivement la pression si cela reste confortable.

Étape 8

Réglez la durée du traitement à l'aide des boutons + et -. La plage de réglage disponible est de 1 à 90 minutes. Le réglage par défaut est de 30 minutes. Appuyez brièvement pour ajuster la durée par incréments de 1 minute ou maintenez le bouton enfoncé pour un réglage rapide. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la minuterie atteint zéro.

11.4. Sélection d'un programme

Étape 9

Sélectionnez le programme souhaité en appuyant sur A, B, C, D, E, ou F. (voir le chapitre « PROGRAMMES DE MASSAGE A-F »)

11.5. Activation et désactivation des chambres

Étape 10

Activez ou désactivez les chambres individuelles en appuyant sur le numéro de chambre correspondant. Par défaut, toutes les chambres sont activées et les voyants sont allumés. Appuyez une fois sur un numéro de chambre pour désactiver cette chambre et éteindre son voyant. Appuyez de nouveau pour réactiver la chambre et rallumer le voyant. Le voyant d'une chambre clignote pendant que cette chambre se gonfle ou se dégonfle.

11.6. Démarrage du programme

Étape 11

Appuyez sur le bouton Marche/Pause pour démarrer la séance de traitement. Par défaut, l'appareil est en mode pause et le voyant est vert. Appuyez sur le bouton Marche/Pause pour démarrer le traitement. Le voyant devient bleu pendant le traitement.



REMARQUE :

Au début du traitement, le temps de gonflage peut être plus long, car les manchons doivent être remplis à partir d'un état complètement dégonflé.



ATTENTION :

- Ne retirez pas les manchons pendant que l'appareil fonctionne. Éteignez toujours l'appareil avant de déconnecter ou de retirer les manchons.
- Arrêtez le traitement et consultez votre médecin si une douleur, des ecchymoses ou une irritation apparaissent pendant ou après le traitement.

Durée de séance recommandée

Pour les nouveaux utilisateurs, il est recommandé de commencer par une courte séance d'environ 10 à 20 minutes.

Si cela est confortable, la durée de la séance peut être progressivement augmentée lors des utilisations suivantes en fonction des préférences personnelles et du niveau de confort.

Cessez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort, de douleur, d'étourdissements, d'engourdissement ou de toute autre réaction inhabituelle.

11.7. Après utilisation

La séance de traitement se termine automatiquement lorsque la minuterie atteint zéro. Vous pouvez également arrêter la séance à tout moment en appuyant sur le bouton Démarrer/Pause ou en éteignant l'appareil.



ATTENTION :

Éteignez toujours l'appareil avant de retirer les manchons ou de déconnecter les tuyaux.

Une fois l'appareil éteint, ouvrez et retirez les manchons. Si nécessaire, pressez doucement les chambres à air à la main afin d'évacuer l'air restant et d'accélérer le dégonflage.

Pour déconnecter l'ensemble de tuyaux d'air de l'unité de commande, appuyez sur les deux clips de déverrouillage situés de chaque côté du connecteur principal. Tout en maintenant les clips enfoncés, tirez le connecteur bien droit hors de l'unité de commande. Les manchons et le tuyau d'air doivent normalement être rangés ensemble comme un seul ensemble. Évitez de déconnecter inutilement le tuyau des manchons, car des déconnexions répétées peuvent endommager les connecteurs ou les broches du tuyau.

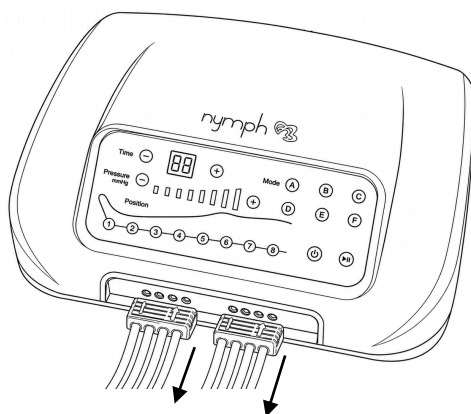
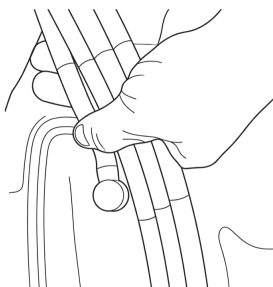


Illustration présentée : modèle Nymph 8.

**REMARQUE :**

Pour le transport ou le stockage, le tuyau d'air peut être déconnecté des manchons afin de réduire l'espace de stockage nécessaire.

**Étape 1**

Ne tirez pas sur le tuyau.

**Étape 2**

Tenez les broches du connecteur et tirez-les bien droit hors du connecteur du manchon.

12. UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Première utilisation : Si la télécommande comporte une languette isolante pour la pile, retirez-la avant la première utilisation. Si la pile n'est pas installée (par exemple en raison des réglementations relatives au transport), insérez une pile CR2032 dans le compartiment à pile.
- Dirigez la télécommande vers le récepteur IR situé sur le panneau de commande du Nymph 4-6-8. Pour des performances optimales, assurez-vous que la télécommande est correctement alignée avec le récepteur IR. Utilisez les boutons de la télécommande pour commander le Nymph 4-6-8.
- La portée maximale de la télécommande est d'environ 5 mètres.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, procédez comme suit :
 - Retirez tout obstacle entre la télécommande et le Nymph 4-6-8.
 - Réduisez la distance entre la télécommande et le Nymph 4-6-8.
 - Remplacez la pile par une pile neuve.
 - Contactez-nous si le problème n'est pas résolu après ces étapes.



REMARQUES :

- Retirez le film de protection de la télécommande avant utilisation.
- La télécommande permet d'accéder à toutes les fonctions disponibles sur le panneau de commande du Nymph 4-6-8.

13. UTILISATION DES MANCHONS

Préparation à l'utilisation :

- Pour le confort et l'hygiène, portez des vêtements légers sous les manchons de compression. Les vêtements doivent être propres, confortables et exempts de boutons, fermetures éclair ou autres objets rigides susceptibles de provoquer une gêne pendant l'utilisation.
- Retirez les montres, bracelets, bagues ou autres bijoux avant d'utiliser les manchons de bras ou de jambes.

Positions recommandées :

- Placez l'unité de commande sur une surface stable et plane facilement accessible pendant l'utilisation. Assurez-vous que les tuyaux d'air ne sont ni tordus, ni pliés, ni obstrués.
- Les manchons de jambes peuvent être utilisés en position assise ou allongée. Pour plus de confort en position assise, les jambes peuvent être légèrement surélevées.
- Les manchons de pantalon doivent être utilisés en position allongée sur un lit, un canapé ou une surface plane similaire. L'utilisation des manchons de pantalon en position assise peut provoquer des plis susceptibles d'affecter les performances de gonflage.
- Les manchons de bras peuvent être utilisés en position assise ou allongée, avec le bras soutenu dans une position confortable.
- Pendant l'utilisation, restez détendu et évitez les mouvements excessifs susceptibles d'interférer avec le cycle de gonflage et de dégonflage des manchons de compression.



AVERTISSEMENT :

Ne marchez pas, ne courez pas, ne montez pas les escaliers, ne conduisez pas et n'effectuez aucune autre activité lorsque vous portez des manchons de jambes ou des manchons de pantalon pendant le fonctionnement. Les manchons limitent les mouvements naturels et peuvent augmenter le risque de trébuchement, de chute, de perte d'équilibre ou de blessure. Restez toujours assis ou allongé lorsque les manchons sont gonflés et en cours d'utilisation.

**ATTENTION :**

Ne gonflez pas un manchon s'il n'est pas correctement porté sur la zone du corps prévue. N'utilisez pas le système avec un manchon qui n'est pas porté ou dont les fermetures éclair sont ouvertes. Cela peut affecter les performances et endommager le manchon de compression.

14. DÉPANNAGE

① L'appareil ne s'allume pas

1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement raccordé à l'unité de commande et branché sur une prise secteur appropriée.
2. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, débranchez-le de l'alimentation électrique. Retournez l'appareil et retirez le porte-fusible marqué « FUSE » à l'aide d'un tournevis. Vérifiez que le fusible est intact.
3. Si le fusible est intact, remettez le porte-fusible en place et contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide. Si le fusible est défectueux, remplacez-le par un fusible temporisé (T3.15A, 5 × 20 mm).

② Les manchons se gonflent dans le mauvais ordre

1. Assurez-vous que le connecteur multiports est inséré dans l'unité de commande dans le bon sens. Le connecteur est correctement installé lorsque les languettes de verrouillage sont alignées avec les ouvertures situées au-dessus des sorties d'air.

③ L'unité de commande est anormalement bruyante

1. Assurez-vous que la vis de transport a été retirée avant d'utiliser l'appareil.
2. Retournez l'appareil et ouvrez le couvercle du filtre situé sur la face inférieure de l'unité.
3. Retirez la vis de transport et éliminez-la.
4. Redémarrez l'appareil et vérifiez si le niveau sonore est revenu à la normale.

15. NETTOYAGE

- Pour nettoyer l'extérieur de l'unité de commande, il est recommandé d'utiliser un chiffon propre, doux et sec.
- Ne lavez pas les manchons. Essuyez-les délicatement avec un chiffon sec.
- N'exercez pas une pression excessive sur l'écran et les boutons pendant le nettoyage.
- N'utilisez pas d'eau pour le nettoyage.
- N'immergez pas le Nymph 4-6-8 dans l'eau ou dans tout autre liquide. Il est interdit de rincer l'unité de commande à l'eau afin d'éviter que de l'eau ne pénètre dans le circuit électrique et ne provoque des dysfonctionnements.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool de nettoyage ou d'autres solutions chimiques, car ils peuvent pénétrer dans le boîtier et altérer le fonctionnement.
- N'utilisez pas d'objets abrasifs pour le nettoyage.
- Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants.

16. ENTRETIEN & SERVICE

- Le Nymph 4-6-8 ne nécessite aucun entretien, à l'exception du nettoyage.
- Vous ne devez pas modifier, réparer vous-même ou démonter le Nymph 4-6-8.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou des pièces recommandées par le fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'absence de dommages et d'usure importante.



AVERTISSEMENTS :

- N'essayez pas d'ouvrir le Nymph 4-6-8 pour effectuer un entretien. Le retrait du boîtier ou un remontage incorrect peut provoquer un choc électrique, des dommages, un court-circuit ou un incendie.
- Si, pour une quelconque raison, vous ouvrez le boîtier, la garantie devient nulle et non avenue. Le Nymph 4-6-8 ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur. Seule la pile de la télécommande peut être remplacée.
- L'entretien, le service et les réparations ne peuvent être effectués que par le fabricant, un atelier professionnel désigné par le fabricant ou une personne possédant des qualifications équivalentes. Pour toute demande d'entretien ou de service, veuillez d'abord nous contacter à l'adresse info@nymph.be.

- Pour tout accessoire manquant, tel que le manuel d'utilisation ou d'autres éléments, contactez-nous à l'adresse e-mail mentionnée ci-dessus.
- En cas de défaut, retournez le produit à NYMPH dans son emballage d'origine, accompagné d'une description de la panne, d'une preuve d'achat et de tous les accessoires.

17. STOCKAGE

- Nous recommandons de nettoyer le Nymph 4-6-8 avant un stockage prolongé (voir le chapitre « NETTOYAGE »).
- Stockez de préférence le Nymph 4-6-8 dans son emballage d'origine.
- Ne stockez pas de pièces humides, car cela pourrait entraîner la formation de moisissures ou de rouille.
- Rangez le Nymph 4-6-8 dans un endroit exempt de poussière, à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité.
- Ne stockez pas le Nymph 4-6-8 à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Conservez le Nymph 4-6-8 hors de portée des jeunes enfants.
- Retirez la pile de la télécommande avant un stockage prolongé.
- Enroulez le câble d'alimentation sans le serrer, mais ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- Pliez soigneusement les manchons et ne placez pas d'objets lourds dessus, car cela pourrait endommager les manchons ou les chambres à air.
- Pour le stockage, placez les manchons (y compris les tuyaux) les uns sur les autres. Enroulez-les ensuite sans serrer. Pour le transport ou le stockage, le tuyau d'air peut être déconnecté des manchons afin de réduire l'espace de stockage nécessaire.

18. TRANSPORT

- Réinstallez la vis de transport. La vis de transport est destinée uniquement au transport et ne doit pas être réinstallée lors d'une utilisation normale.
- Pendant le transport :
 - Évitez les chocs et impacts inutiles.
 - Ne laissez pas tomber le Nymph 4-6-8.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.
 - Protégez le Nymph 4-6-8 contre les vibrations.
 - Protégez les manchons contre les perforations.
 - Utilisez l'emballage d'origine chaque fois que possible.
- Après un transport ou un stockage à très basse température, le Nymph 4-6-8 doit être laissé à température ambiante pendant environ 30 minutes en raison d'une éventuelle condensation. L'appareil peut ensuite être utilisé.

19. ÉLIMINATION & RECYCLAGE

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et de composants de haute qualité pouvant être réutilisés et recyclés. Veuillez éliminer ce produit de manière responsable à la fin de sa durée de vie.

19.1. Élimination des équipements électriques et électroniques (DEEE)



Les produits portant le symbole de la poubelle barrée à roulettes sont soumis à une collecte séparée conformément à la directive 2012/19/UE (DEEE) et à la législation nationale applicable.

Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés. Déposez plutôt l'appareil :

- dans un point de collecte communal agréé, ou
- auprès d'un détaillant lors de l'achat d'un produit neuf équivalent.

Une collecte séparée appropriée contribue à prévenir les dommages environnementaux et permet un recyclage correct des matériaux de valeur.



REMARQUE :

Une élimination incorrecte peut entraîner des sanctions prévues par la législation nationale.

19.2. France – Marquage Triman

Si ce produit est vendu en France, les instructions d'élimination s'appliquent conformément à la législation Triman. Suivez les consignes locales de collecte indiquées par le logo Triman et les instructions officielles françaises relatives à l'élimination.



Tous les matériaux d'emballage sont recyclables. Ils doivent être triés et éliminés dans les filières de recyclage appropriées, conformément à la réglementation française applicable et aux consignes locales de collecte.




19.3. Allemagne (ElektroG §18(4))

Pour les produits vendus en Allemagne, les informations complémentaires suivantes destinées aux consommateurs sont requises :

- Les anciens équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.
- Les batteries et lampes pouvant être retirées sans dommage doivent être retirées avant l'élimination.
- Les consommateurs peuvent déposer gratuitement leurs anciens appareils dans les points de collecte municipaux.
- Obligations de reprise des détaillants en Allemagne :

- Reprise 1:1 : lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type, l'ancien appareil doit être repris gratuitement.
- Reprise 0:1 : les petits appareils (dimension extérieure < 25 cm) peuvent être retournés même sans achat d'un nouveau produit, dans la limite de trois appareils par type.
- Ces dispositions s'appliquent aux magasins physiques disposant d'une surface de vente $\geq 400 \text{ m}^2$ pour les équipements électriques et électroniques ainsi qu'aux vendeurs à distance dont les surfaces de stockage ou d'expédition pour ces produits sont $\geq 400 \text{ m}^2$.
- Les consommateurs sont responsables de la suppression de toutes les données personnelles présentes sur les appareils avant leur retour.
- L'Allemagne déclare chaque année les quotas de collecte et de recyclage conformément à la directive DEEE.

19.4. Élimination des batteries

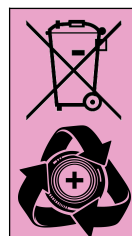

La gestion et l'élimination des batteries et accumulateurs sont régies par le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries. Ce règlement est directement applicable dans tous les États membres de l'UE et vise à garantir une utilisation sûre, durable et respectueuse de l'environnement des batteries.

Les consommateurs ont l'obligation légale de ne pas éliminer les batteries avec les déchets ménagers. Les batteries usagées doivent être déposées dans des points de collecte désignés, comme l'indique le symbole de la poubelle barrée à roulettes, afin qu'elles soient recyclées correctement. Une élimination correcte contribue à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

19.5. Élimination des matériaux d'emballage



Éliminez les matériaux d'emballage de manière respectueuse de l'environnement. Respectez les indications et les symboles de recyclage figurant sur l'emballage et veillez à ce que les sacs plastiques, le carton et les autres matériaux soient collectés pour le recyclage.

20. GARANTIE & RESPONSABILITÉ

NYMPH garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux du consommateur en vertu de la législation européenne applicable en matière de protection des consommateurs.

La garantie s'applique aux produits utilisés à des fins personnelles et non à des fins commerciales ou de location. **NYMPH** remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, ce produit ou tout composant du produit reconnu défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué par un produit ou un composant neuf ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, il pourra être remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Aucun remboursement ne sera accordé. Votre appareil de remplacement vous sera retourné sans frais et restera couvert par cette garantie pour la durée restante de la période de garantie.

Cette garantie est valable pour l'acheteur d'origine à compter de la date d'achat initiale et n'est pas transférable. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier de la garantie.

Cette garantie ne s'applique pas à :

- Une utilisation négligente ou abusive du produit.
- L'utilisation avec une tension ou une intensité incorrecte.
- Les dommages résultant de chutes ou d'impacts.
- Les dommages causés par l'eau.
- L'utilisation contraire aux instructions d'utilisation.
- Le démontage, la réparation ou la modification par toute personne autre que **NYMPH**.
- Les dommages causés par des accidents ou des catastrophes tels qu'un incendie, une inondation, un tremblement de terre, une guerre, un acte de vandalisme ou un vol.
- Les dommages causés par un entretien ou un stockage incorrect.
- Les dommages causés par un montage incorrect.
- Les dommages causés par des raccordements incorrects.
- Accessoires tels que les piles et les fusibles.

- L'exposition à des influences extérieures défavorables, telles que la lumière du soleil, d'autres rayonnements ou des champs électromagnétiques.
- L'usure normale.

Les dommages causés par le non-respect des instructions du présent manuel d'utilisation annulent la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages indirects. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou les blessures corporelles résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie devient nulle.

NYMPH se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis ni obligation, des modifications au manuel d'utilisation, aux couleurs, aux spécifications, aux accessoires, aux matériaux et aux modèles.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout autre procédé électronique ou mécanique, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur, sauf dans le cas de courtes citations intégrées dans des critiques et de certaines autres utilisations non commerciales autorisées par le droit d'auteur. Pour toute demande d'autorisation, contactez-nous.



Zonnebloemstraat 17
9900 Eeklo
Belgium



+32 (0)495 50 63 99



info@nymph.be



www.nymph.be